EH-BS-PP-46

SEDAČKA DO VANY

URČENÉ POUŽITÍ:
Sedačka do vany je navržená tak, aby nebylo nutné dosednout až na dno vany, což usnadňuje nalézání a vstávání z vany. Snižuje riziko únavných nebo nebezpečných poloh během hygieny vsedě a vestoje. Sedačka do vany zvyšuje soběstačnost uživatele při každodenní osobní hygieně ve vaně.

INDIKACE A KONTRAINDIKACE:
Sedačka do vany zajišťuje oporu seniorům, vozíčkářům, osobám se sníženou pohyblivostí dolních končetin, beder a kyčlí a všem, kteří mají potíže s nalézáním a vstáváním ve vaně. K použití sedačky do vany je nutně zapotřebí schopnosti udržet se samostatně v sedu. Sedačku do vany nedoporučujeme používat, pokud má uživatel problémy s rovnováhou nebo vnímáním.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A INDIKACE:
- Nesmí být překročena maximální hmotnost uživatele uvedená v montážním návodu.
- Pokud má uživatel problémy s pohyblivostí nebo trpí poruchami rovnováhy, doporučujeme požádat o pomoc při nalézání a vstávání z vany.
- Před každým použitím musí uživatel zkontrolovat, zda není sedačka do vany poškozena.
- Při montáži přesně dodržujte to, co je uvedeno v uživatelské příručce.
- Během montáže, nastavování šířky sedačky a během instalace na vanu se může zvýšit riziko poranění prstů.
- Před každým použitím se ujistěte, že je sedačka na vaně pevně stabilní. Koncové pryžové krytky a obdélníkové pryžové lišty na hliníkovém rámu musí být správně nakloněny k rovnému okraji, resp. k boční stěně vany.
- Sedačku do vany, ani její součásti, žádným způsobem neupravujte.
- Sedačku do vany nepoužívejte, pokud je poškozená nebo jakkoli pozměněné a upravená. Praskliny a deformace mohou silně ovlivnit použití a bezpečnost sedačky.
- Během používání se vyhněte polohám, které mají těžiště těla příliš vzadu nebo vepředu. Nesprávná poloha sedu může vést k nestabilitě a převrácení sedačky.
- Během sezení a vstávání se může zvýšit riziko uklouznutí, způsobené mokrým dnem vany.
- Sedačka do vany nesmí být skladována venku.


INFORMACE O ÚDRŽBĚ:
Údržba výrobků spočívá v čištění a sanitaci. Aby bylo zaručeno bezpečné používání a odpovídající hygienický standard, měl by uživatel tyto postupy provést před každým použitím. Uživatel se musí ujistit o konstrukční celistvosti výrobku i všech jeho součástí a musí být zkontrolováno utažení šroubů. Při čištění a sanitaci postupujte podle následujících kroků:
1. Měly by se nosit rukavice.
2. Před provedením důkladné dezinfekce odstraňte zjevné hrubé nečistoty.
3. K čištění použijte vodu nebo neagresivní čisticí prostředek.
4. Otřete suchým a čistým hadříkem.

Alternativně lze výrobek čistit v domácích myčkách na nádobí při maximální teplotě.

POŽADAVKY NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ:
Produkt může současně používat několik uživatelů. Před opětovným použitím různými osobami musí být produkt řádně vyčištěn a dezinfikován. Před předáním produktu jiným osobám musí být produkt zkontrolován kvalifikovanými prodejci.

SPRÁVNÝ POSTUP LIKVIDACE:
Nevyhazujte výrobek do běžného domovního odpadu. Zeptejte se předem místního úřadu na správný a ekologický způsob likvidace.

HLÁŠENÍ UDÁLOSTI:
Pokud došlo k vážné nehodě s tímto výrobkem, kontaktujte výrobce tohoto produktu na adrese **info@kdesign-group.com** a odpovědný úřad ve vaší zemi.

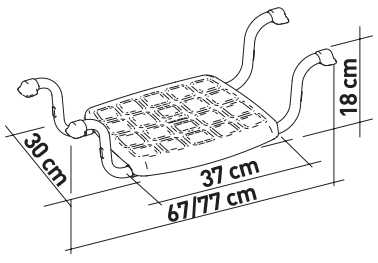


K design s.r.l.
Via Vincinella, Loc. Ghiarettolo
19037 Santo Stefano di Magra (SP)
Italy
(t) +39 0187 1987200
(w) www.kdesign-group.com
(e) info@kdesign-group.com

DMA Praha s.r.o.
Krajanská 339
149 00 Praha 4
www.dmapraha.cz


EH-BS-PP-46

SEDAČKA DO VANY


1

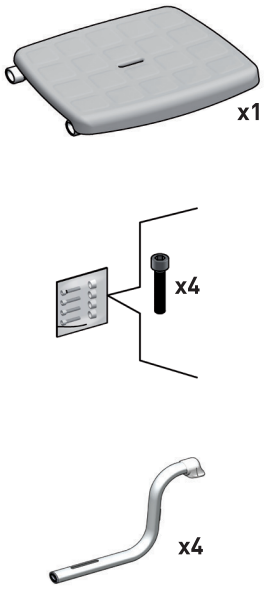


2

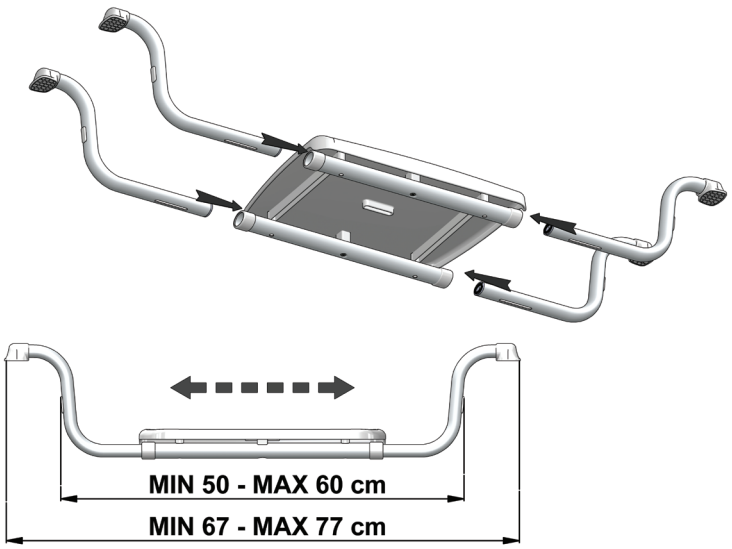

3

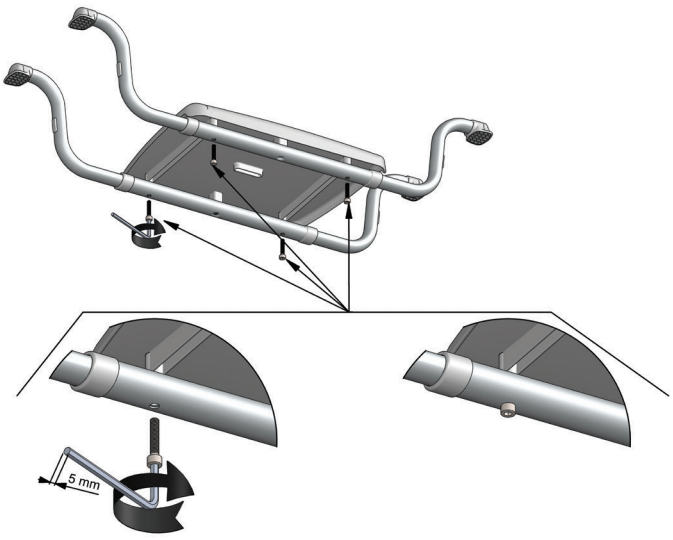

4

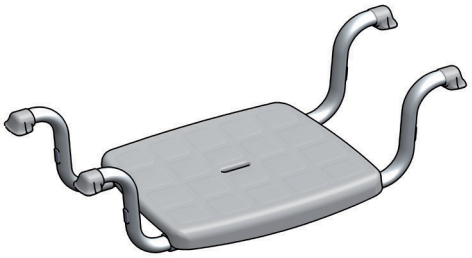

MAX. HMOTNOST UŽIVATELE:

135 kg
300 lb

MADE IN ITALY

CE

MD

ZÁRUKA 2 ROKY

K design s.r.l.
Via Vincinella, Loc. Ghiarettolo
19037 Santo Stefano di Magra (SP)
Italy

(t) +39 0187 1987200
(w) www.kdesign-group.com
(e) info@kdesign-group.com

DMA Praha s.r.o.
Krajanská 339
149 00 Praha 4
www.dmapraha.cz

UM-KINGBS-46K Rev.2 as of 2024/10