




MATRACE

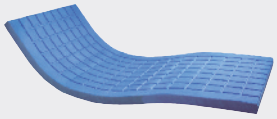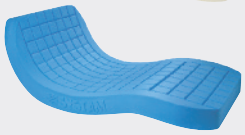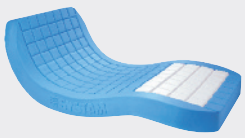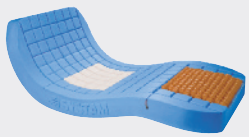

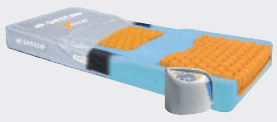

NAŠE MATRACE A INDIKACE

ŘADA MATRACÍ SYST'AM®	INDIKACE	RIZIKO
P111M STANDARD CARE **MATRACE** 	**TYTO MATRACE LZE POUŽÍT, POKUD:**	Riziko NÍZKÉ – VELMI VYSOKÉ
P101M POLYPLOT 	• 1- Je nezbytné upoutání na lůžko v důsledku onemocnění nebo postižení a současně je zvýšené riziko vzniku dekubitu dle hodnotících škál (Braden, Norton, Waterlow, ...). Nebo • 2- Vznikl dekubitus (stupeň 1 a 2 dle EPUAP).	Riziko NÍZKÉ – VELMI VYSOKÉ
P141M POLYMULTI 		
P181M POLYMULTI VISCO 		
P161M-*S* VISCOFLEX® **PODLOŽKA** 	• 1- Je nezbytné upoutání na lůžko v důsledku onemocnění nebo postižení a současně je zvýšené riziko vzniku dekubitu dle hodnotících škál (Braden, Norton, Waterlow, ...); nebo • 2- Vznikl dekubitus (stupeň 1 nebo 2 dle EPUAP).	Riziko NÍZKÉ – VELMI VYSOKÉ
P171M POLYSTRAT HE	• 1- Je nezbytné upoutání na lůžko v důsledku onemocnění nebo postižení a současně je zvýšené až vysoké riziko vzniku dekubitu dle hodnotících škál (Braden, Norton, Waterlow, ...); nebo • 2- Vznikl dekubitus (stupeň 1 až 3 dle EPUAP).	Riziko NÍZKÉ – VELMI VYSOKÉ
P171M-*V* POLYSTRAT HE-V 		
P161M VISCOFLEX® 	• 1- Je nezbytné upoutání na lůžko v důsledku onemocnění nebo postižení a současně je zvýšené až velmi vysoké riziko vzniku dekubitu dle hodnotících škál (Braden, Norton, Waterlow, ...); nebo • 2- Vznikl dekubitus (stupeň 1 až 3 dle EPUAP a až stupeň 4 při použití polohovacích klínů).	Riziko NÍZKÉ – VELMI VYSOKÉ
P161M-*OPP* VISCOFLEX® s vícezónovou opěrnou plochou 		
P161M-*OE* VISCOFLEX® EVOLUTIVE 	Vlastnosti VISCOFLEX® Evolutive umožňují upravit konfiguraci matrace na VISCOFLEX® Air a VISCOFLEX® Air+Air podle potřeb pacienta	Riziko NÍZKÉ – VELMI VYSOKÉ
P161M-*OR* VISCOFLEX® AIR 	• 1- Je nezbytné upoutání na lůžko v důsledku onemocnění nebo postižení a současně je zvýšené až velmi vysoké riziko vzniku dekubitu dle hodnotících škál (Braden, Norton, Waterlow, ...); nebo • 2- Vznikl dekubitus (stupeň 1 až 4 dle EPUAP) dekubitus.	Riziko NÍZKÉ – VELMI VYSOKÉ
P161M-*O2R* VISCOFLEX® AIR + AIR 		
XTECH®25 	• 1- Je nezbytné upoutání na lůžko v důsledku onemocnění nebo postižení a současně je zvýšené až velmi vysoké riziko vzniku dekubitu dle hodnotících škál (Braden, Norton, Waterlow, ...); nebo • 2- Vznikl dekubitus (stupeň 1 až 4 dle EPUAP) dekubitus.	Riziko NÍZKÉ – VELMI VYSOKÉ

SYST'AM® P111M / STANDARD CARE
MATRACE

TVAROVANÁ MATRACE Z HR PĚNY S VYSOKOU HUSTOTOU

MATERIÁLY

40 kg/m³



HR pěna



PUR POLYFILM
napínací prostěradlo



POLYMAILLE®
celistvý potah

NF EN ISO 597 - 1 a 2

Údržba pěny:

(Neponořujte do vody)

Čištění potahu POLYFILM:

Čištění potahu POLYMAILLE®:

95 °C

INDIKACE

Riziko

NÍZKÉ — VELMI VYSOKÉ



ÚČINEK A KOMFORT HR PĚNY SYST'AM®

- Díky tvarování a vysoké hustotě (40 kg/m3) zajišťuje trvalou pružnost, komfort a měkký dotek.
- Současně nabízí vyšší odolnost vůči vnějšímu opotřebení a namáhání, což prodlužuje životnost matrace.

JEDNODÍLNĚ TVAROVANÁ MATRACE

- Zajišťuje dokonalé usazení v potahu.
- Kompatibilní se standardními i polohovacími lůžkovými rošty.
- Úspora času a snazší instalace podložek.

- Snazší instalace podložek
  do ložné plochy lůžka.
- Odolnost proti deformaci a proleženíí
- Bez drolení v čase
- Odolnost proti roztržení

DOSTUPNÉ VERZE

SYST'AM® P111M / Standard matrace care

DOSTUPNÉ POTAHY



NAPÍNACÍ PROSTĚRADLO POLYFILM PRO POUŽITÍ U JEDNOHO PACIENTA

- Prodyšná, vysoce elastická hypoalergenní polyuretanová fólie.
- Spolehlivá přizpůsobivost; na rozdíl od PVC je materiál velmi pevný a dlouhodobě odolný proti opotřebení.
- POLYFILM je zcela nepropustný pro tekutiny.



CELISTVÝ POTAH POLYMAILLE® PRO VÍCEPACIENTSKÉ POUŽITÍ

- Hypoalergenní
- Hypoalergenní polyuretanový nános (antibakteriální, antimikrobiální, protiplísňový).
- Dvousměrná elasticita snižuje tahové a střižné síly.
- Zip ze 3 stran. Protiskluzová spodní strana.

OZNAČENÍ	KÓD POLOŽKY	(cm / inches)	(cm / inches)	min - MAX (kg / lbs)
P111M / matrace Standard Care s napínacím prostěradlem POLYFILM	P111MPPFDH	86 x 198 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 130 / 77 - 286
P111M / matrace Standard Care s potahem POLYMAILLE® celistvý potah	P111MPPMHI	86 x 198 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 130 / 77 - 286
	P111MPPMHI100	96 x 198 / 38 x 78	100 x 200 / 39 x 79	35 - 150 / 77 - 330



DODÁVÁNO KOMPRIMOVANÉ UTÉ

- Úspora ve skladování 2,5x menší objem objemu.

Všechny matrace jsou dodávány komprimované. Pokud požadujete NEKOMPRIMOVANÉ MATRACE, přidejte za číslo položky NC.

CE

WARRANTY 2 YEARS

SYST'AM® P101M / POLYPLOT

TVAROVANÁ PROFILOVANÁ MATRACE Z HR PĚNY S VYSOKOU HUSTOTOU

MATERIÁLY

40 kg/m³



HR pěna



PUR POLYFILM
napínací prostěradlo



POLYMAILLE®
celistvý potah



POLYMAILLE®***HD***
celistvý potah

NF EN ISO 597 - 1 a 2

Údržba pěny:

(Neponořujte do vody)

Čištění potahu POLYFILM:

Čištění potahu POLYMAILLE®:

Čištění potahu POLYMAILLE® HD:

INDIKACE

Riziko

NÍZKÉ — VELMI VYSOKÉ

Matraci P101M / POLYPLOT lze lze použít, pokud:

- 1- Je nezbytné upoutání na lůžko v důsledku onemocnění nebo zdravotního postiže a současně je přítomno zvýšené riziko vzniku dekubitu dekubitu podle hodnoticích škál (Braden, Norton, Waterlow, ...).
- 2- Vznikl dekubitus (stupeň 1 a 2 dle EPUAP).



DODÁVÁNO KOMPRIMOVANÉ UTÉ

- Úspora ve skladování 2,5x menší objem objemu.





ÚČINEK A KOMFORT HR PĚNY SYST'AM®

- Díky tvarování a vysoké hustotě (40 kg/m3) zajišťuje trvalou pružnost, komfort a měkký dotek.
- Současně nabízí vyšší odolnost vůči vnějšímu opotřebení a namáhání, což prodlužuje životnost matrace.

JEDNODÍLNĚ TVAROVANÁ MATRACE

- Zajišťuje dokonalé usazení v potahu.
- Kompatibilní se standardními i polohovacími lůžkovými rošty.
- Úspora času a snazší instalace podložek.

- Snazší instalace podložek do ložné plochy lůžka.



VELKÁ PLOCHA PROFILOVANÝCH BLOKŮ

- Um pa ma
- Maximalizuje kontaktní plochu mezi pacientem a podložkou, a tím snižuje maximální tlak v rizikových oblastech.



NEZ

NEZÁVISLOST A POHYBLIVOST BLOKŮ

- Byl vý
- Navrženo pro významné snížení účinků tření.



VEN

VENTILAČNÍ KANÁLY MEZI BLOKY

- Por zle
- Omezují účinky macerace díky zlepšené ventilaci matrace.

DOSTUPNÉ POTAHY



NAPÍNACÍ PROSTĚRADLO POLYFILM PRO POUŽITÍ U JEDNOHO PACIENTA

NAPÍNACÍ PROSTĚRADLO POLYFILM PRO POUŽITÍ U JEDNOHO PACIENTA

- Spolehlivá přizpů
- POLYFILM je zcela nepropustný pro tekutiny.

- Prodyšná, vysoce elastická hypoalergenní polyuretanová fólie.
- Spolehlivá přizpůsobivost; na rozdíl od PVC je materiál velmi pevný a dlouhodobě odolný proti opotřebení.
- POLYFILM je zcela nepropustný pro tekutiny.



POLYMAILLE® A POLYMAILLE® HD CELISTVÝ POTAH PRO VÍCEPACIENTSKÉ POUŽITÍ

Hypoalergenní **POLYMAILLE® A POLYMAILLE® HD CELISTVÝ POTAH PRO VÍCEPACIENTSKÉ POUŽITÍ**

- Hypoalergenní polyuretanový nános (antibakteriální, antimikrobiální, protiplísňový).
- Dvousměrná elasticita snižuje tahové a střižné síly.
- Zip ze 3 stran. Protiskluzová spodní strana.
- POLYMAILLE® HD: svařované švy.

		(cm / inches)	(cm / inches)	(kg / lbs)
P101M / POLYPLOT s napínacím prostěradlem POLYFILM	P101MPLPFDH	87 x 198 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 130 / 77 - 286
P101M / POLYPLOT s celistvý potah POLYMAILLE®	P102MPLPMHI	87 x 198 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 130 / 77 - 286
	P102MPLPMHI190	87 x 187 / 34 x 74	90 x 190 / 35 x 75	35 - 130 / 77 - 286
	P102MPLPMHI220	87 x 220 / 34 x 87	90 x 220 / 35 x 87	35 - 150 / 77 - 330
	P102MPLPMHI100	96 x 198 / 38 x 78	100 x 200 / 39 x 79	35 - 150 / 77 - 330
	P102MPLPMHI110	113 x 198 / 44 x 78	110 x 200 / 43 x 79	135 - 270 / 297 - 595
	P102MPLPMHI120	120 x 200 / 47 x 78	120 x 200 / 47 x 79	135 - 270 / 297 - 595
	P102MPLPMHI140	133 x 199 / 52 x 78	140 x 200 / 55 x 79	135 - 270 / 297 - 595
P101M / POLYPLOT s **celistvý potah POLYMAILLE® HD**	P102MPLPMHF	87 x 199 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 130 / 77 - 286
	P102MPLPMHF190	87 x 187 / 34 x 74	90 x 190 / 35 x 75	35 - 130 / 77 - 286

Všechny matrace jsou dodávány komprimované. Pokud požadujete NEKOMPRIMOVANÉ MATRACE, přidejte za číslo položky NC.

CE WARRANTY 2 ROKY

05/2019

SYST'AM® P141M / POLYMULTI - ve 3 sekcích

TVAROVANÁ PROFILOVANÁ MATRACE Z HR PĚNY S VYSOKOU HUSTOTOU

MATERIÁLY

40 kg/m³



HR pěna



PUR POLYFILM
napínací prostěradlo



POLYMAILLE®
celistvý potah

NF EN ISO 597 - 1 a 2

Údržba pěny:


(Neponořujte do vody)

Čištění potahu POLYFILM:

Čištění potahu POLYMAILLE®:





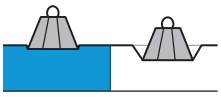

• Základna typu podešve zajišťuje vyšší stabilitu.

INDIKACE

Riziko



Matraci P141M / POLYMULTI lze lze použít, pokud:


• 1- Je nezbytné upoutání na lůžko v důsledku onemocnění nebo zdravotního postižení a současně je přítomno zvýšené riziko vzniku dekubitu dekubitu podle hodnoticích škál (Braden, Norton, Waterlow, ...).

• 2- Vznikl dekubitus (stupeň 1 a 2 dle EPUAP).


ÚČINEK KONCEPCE VÍCEZÓNOVÉ OPORY

• Vícezónová opěrná plocha umožňuje lepší rozložení tlaku přenosem opory z oblastí s nízkou nosností do oblastí s vysokou nosností.
BÍLÉ OBLASTI: měkčí pěna zajišťující zvýšenou prevenci v rizikových oblastech (sakrum, paty, lopatky).
MODRÉ OBLASTI: tužší pěna pro části těla s nižší úrovní rizika.

POLYMULTI®: matrace s vícezónovou opěrnou plochou

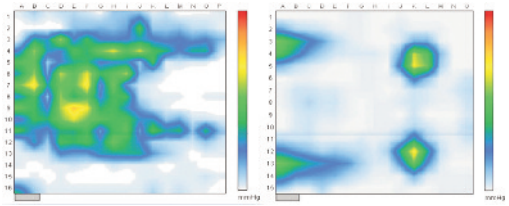

sakrum paty

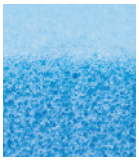

ÚČINEK A KOMFORT HR PĚNY SYST'AM®

• Díky tvarování a vysoké hustotě (40 kg/m3) zajišťuje trvalou pružnost, komfort a měkký dotek.
• Současně nabízí vyšší odolnost vůči vnějšímu opotřebení a namáhání, což prodlužuje životnost matrace.

DOSTUPNÉ POTAHY



NAPÍNACÍ PROSTĚRADLO POLYFILM PRO POUŽITÍ U JEDNOHO PACIENTA

NAPÍNACÍ PROSTĚRADLO POLYFILM PRO POUŽITÍ U JEDNOHO PACIENTA

• Spolehlivá

• Prodyšná, vysoce elastická hypoalergenní polyuretanová fólie.
• Spolehlivá přizpůsobivost; na rozdíl od PVC je materiál velmi pevný a dlouhodobě odolný proti opotřebení.
• POLYFILM je zcela nepropustný pro tekutiny.



CELISTVÝ POTAH POLYMAILLE® PRO VÍCEPACIENTSKÉ POUŽITÍ

CELISTVÝ POTAH POLYMAILLE® PRO VÍCEPACIENTSKÉ POUŽITÍ

• Hypoalergenní

• Hypoalergenní polyuretanový nános (antibakteriální, antimikrobiální, protiplísňový).
• Dvousměrná elasticita snižuje tahové a střižné síly.
• Zip ze 3 stran. Protiskluzová spodní strana.

OZNAČENÍ	KÓD POLOŽKY	(cm / inches)	(cm / inches)	min - MAX (kg / lbs)
P141M / POLYMULTI s napínacím prostěradlem POLYFILM	P141MMPFDHNC	86 x 197 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 130 / 77 - 286
P141M / POLYMULTI s celistvý potah POLYMAILLE®	P141MMPMHINC	86 x 197 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 130 / 77 - 286

DOSTUPNÉ POUZE NEKOMPRIMOVANÉ

WARRANTY 2 ROKY

SYST'AM® P161M-S / PODLOŽKY VISCOFLEX®

TVAROVANÁ PODLOŽKA Z VISKOELASTICKÉ PĚNY

MATERIÁLY

80 kg/m³



Viskoelastická pěna



POLYMAILLE®
celistvý potah

NF EN ISO 597 - 1 a 2

Údržba pěny:

(Neponořujte do vody)

Čištění potahu POLYMAILLE®:

95 °C

INDIKACE

Riziko

NÍZKÉ — VELMI VYSOKÉ




Podložku P161M-S / VISCOFLEX® lze lze použít, pokud:

- 1- Je nezbytné upoutání na lůžko v důsledku onemocnění nebo zdravotního postižení a současně je přítomno zvýšené riziko vzniku dekubitu dekubitu podle hodnotících škál (Braden, Norton, Waterlow, ...);

Nebo

- 2- Vznikl dekubitus (stupeň 1 nebo 2 dle EPUAP).

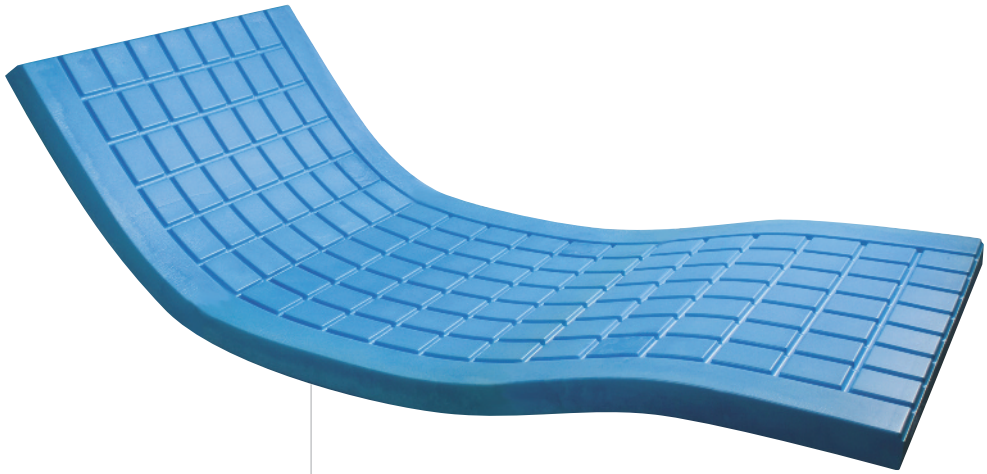








TVAROVANÁ VISKOELASTICKÁ PĚNA S PAMĚŤOVÝM EFEKTEM

- Přesné přizpůsobení tvaru těla a zvětšení kontaktní plochy s matrací.
- Lepší rozložení tlaku; snížení transkutánních tlaků v rizikových oblastech a podpora krevní cirkulace.
- Zlepšený komfort a stabilita pacienta.
- Povrchový efekt tvarování chrání pěnu proti vnějším vlivům.
- Velmi vysoká hustota omezuje deformaci a proležení.


DOSTUPNÉ VERZE

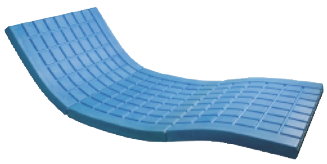

SYST'AM® P161M-S /
podložka VISCOFLEX®



SYST'AM® P161M-SR /
podložka VISCOFLEX® Air

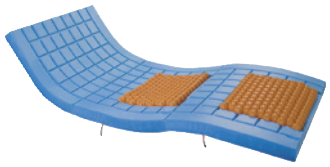

SYST'AM® P161M-S2R /
podložka VISCOFLEX® Air + Air

DOSTUPNÉ POTAHY



CELISTVÝ POTAH POLYMAILLE® PRO VÍCEPACIENTSKÉ POUŽITÍ

- Hypoalergenní

CELISTVÝ POTAH POLYMAILLE® PRO VÍCEPACIENTSKÉ POUŽITÍ

- Hypoalergenní polyuretanový nános (antibakteriální, antimikrobiální, protiplísňový).
- Dvousměrná elasticita snižuje tahové a střižné síly.
- Zip ze 3 stran. Protiskluzová spodní strana.

OZNAČENÍ	KÓD POLOŽKY	(cm / inches)	(cm / inches)	min - MAX (kg / lbs)
P161M-S / podložku VISCOFLEX®	P161MSPMHI	86 x 197 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 110 / 77 - 242
	P161MSPMHI190	86 x 190 / 34 x 75	90 x 190 / 35 x 75	35 - 110 / 77 - 242
P161M-S / VISCOFLEX® Air podložka	P161MSRPMHI	86 x 197 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 110 / 77 - 242
P161M-S / VISCOFLEX® Air + Air podložka	P161MS2RPMHI	86 x 197 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 110 / 77 - 242

CE WARRANTY 2 ROKY

SYST'AM® P181M / POLYMULTI® VISCO

JEDNODÍLNÁ TVAROVANÁ MATRACE Z HR PĚNY S VYSOKOU HUSTOTOU A 2 VISKOELASTICKÝMI VLOŽKAMI

MATERIÁLY

40 kg/m³



HR pěna

80 kg/m³



Viskoelastická pěna
Velmi vysoká hustota



PUR POLYFILM
napínací prostěradlo



POLYMAILLE®
celistvý potah

NF EN ISO 597 - 1 a 2

Údržba pěny:

(Neponořujte do vody)

Čištění potahu POLYFILM:

Čištění potahu POLYMAILLE®:


INDIKACE


Riziko

NÍZKÉ — VELMI VYSOKÉ

Matrace P181M / POLYMULTI® VISCO lze použít, pokud:

- 1- Je nezbytné upoutání na lůžko v důsledku onemocnění nebo zdravotního postižení a současně je přítomno zvýšené riziko vzniku dekubitu dekubitu podle hodnoticích škál (Braden, Norton, Waterlow, ...).
- 2- Vznikl dekubitus (stupeň 1 a 2 dle EPUAP).

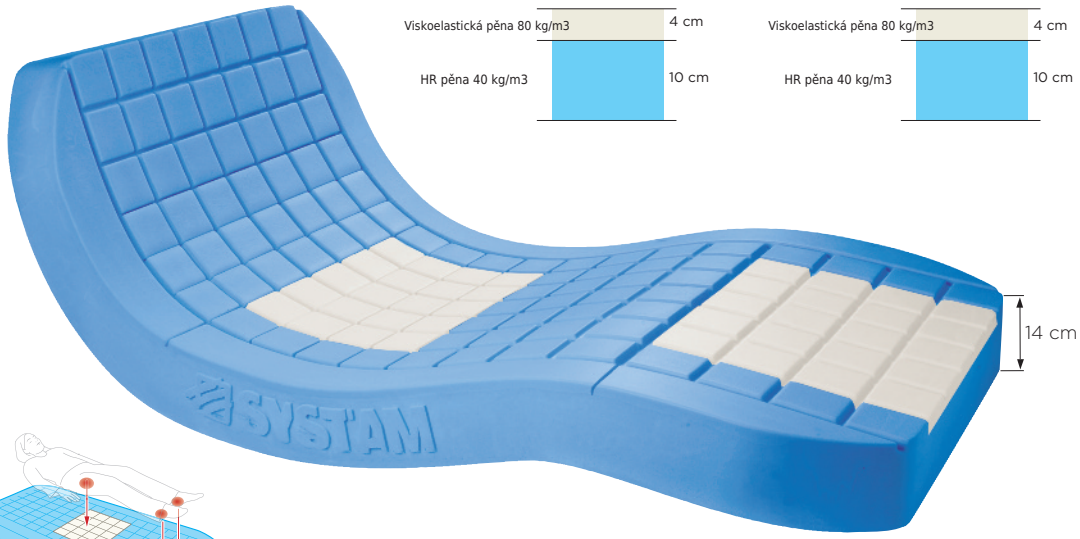

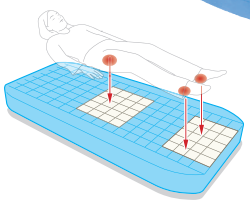



VISKOELASTICKÉ VLOŽKY

- Přesné přizpůsobení tělu a zvětšení kontaktní plochy s matrací.
- Lepší rozložení tlaku; snížení transkutánních tlaků v rizikových oblastech a podpora krevní cirkulace.
- Zlepšený komfort a stabilita pacienta.
- Vícezónová opěrná plocha.
- 4 cm viskoelastické pěny v oblasti sakra a pat.



ÚČINEK A KOMFORT HR PĚNY SYST'AM®

- Díky tvarování a vysoké hustotě (40 kg/m3) zajišťuje trvalou pružnost, komfort a měkký dotek.
- Současně nabízí vyšší odolnost vůči vnějšímu opotřebení a namáhání, což prodlužuje životnost matrace.



SYST'AM® P181M / POLYMULTI® VISCO

JEDNODÍLNĚ TVAROVANÁ MATRACE

- Zajišťuje dokonalé usazení v potahu.
- Kompatibilní se standardními i polohovacími lůžkovými rošty.
- Úspora času a snazší instalace podložek.



- Odolnost proti roztržení

žnými plochami.

- Úspora času a snazší instalace podložek.

DOSTUPNÉ POTAHY



NAPÍNACÍ PROSTĚRADLO POLYFILM PRO POUŽITÍ U JEDNOHO PACIENTA

NAPÍNACÍ PROSTĚRADLO POLYFILM PRO POUŽITÍ U JEDNOHO PACIENTA

- Spolehlivá

- Prodyšná, vysoce elastická hypoalergenní polyuretanová fólie.
- Spolehlivá přizpůsobivost; na rozdíl od PVC je materiál velmi pevný a dlouhodobě odolný proti opotřebení.
- POLYFILM je zcela nepropustný pro tekutiny.



CELISTVÝ POTAH POLYMAILLE® PRO VÍCEPACIENTSKÉ POUŽITÍ

CELISTVÝ POTAH POLYMAILLE® PRO VÍCEPACIENTSKÉ POUŽITÍ

- Hypoalergenní

ální,

ly.

- Hypoalergenní polyuretanový nános (antibakteriální, antimikrobiální, protiplísňový).
- Dvousměrná elasticita snižuje tahové a střižné síly.
- Zip ze 3 stran. Protiskluzová spodní strana.



DODÁVÁNO KOMPRIMOVANÉ

UTÉ

- Úspora ve skladování 2,5x menší objem objemu.

OZNAČENÍ	KÓD POLOŽKY	(cm / inches)	(cm / inches)	min - MAX (kg / lbs)
P181M / POLYMULTI® VISCO s prostěradlem POLYFILM	P181MPPFDH	87 x 198 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 130 / 77 - 286
P181M / POLYMULTI® VISCO s potahem POLYMAILLE®	P181MPPMHI	87 x 198 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 130 / 77 - 286

Všechny matrace jsou dodávány komprimované. Pokud požadujete NEKOMPRIMOVANÉ MATRACE, přidejte za číslo položky NC.

CE

WARRANTY 2 YEARS

SYST'AM® P171M / POLYSTRAT HE

JEDNODÍLNÁ TVAROVANÁ MATRACE ZE 2 VRSTEV: HORNÍ VRSTVA Z VYSOCE ELASTICKÉ PĚNY A ANATOMICKÁ HR VLOŽKA

MATERIÁLY

50 kg/m³



Extra měkká
HE pěna
Velmi vysoká hustota

40 kg/m³



HR pěna



POLYMAILLE®
celistvý potah



POLYMAILLE®***HD***
celistvý potah

NF EN ISO 597 - 1 a 2

Údržba pěny:

(Neponořujte do vody)

Čištění potahu POLYMAILLE®:

Čištění potahu POLYMAILLE® HD:

INDIKACE

Riziko

NÍZKÉ — VELMI VYSOKÉ

Matraci P171M / POLYSTRAT HE
lze použít, pokud:

- 1- Je nezbytné upoutání na lůžko v důsledku onemocnění nebo zdravotního postiž a současně je přítomno zvýšené riziko vzniku dekubitu dekubitu podle hodnoticích škál (Braden, Norton, Waterlow, ...); nebo
- 2- Vznikl dekubitus (stupeň 1 až 3 dle EPUAP).




JEDNODÍLNĚ TVAROVANÁ MATRACE

- Zajišťuje dokonalé usazení v potahu.
- Kompatibilní se standardními i polohovacími lůžkovými rošty.
- Úspora času a snazší instalace podložek.

EXTRA MĚKKÁ VYSOCE ELASTICKÁ PĚNA

- Vysoce odo
- Umožňuje hlubší zaboření.
- Snižuje bolestivost díky měkčí odezvě.
- Zachovává mobilitu.
- Vysoce odolná.

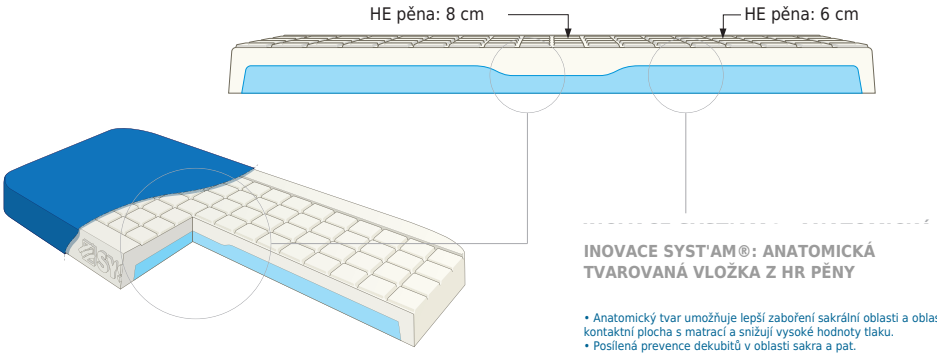

KONCEPCE S VLOŽKOU PROTI PROSEDNUTÍ

- Tato vícevrstvá struktura vzniklá tvarováním zajišťuje dokonalou a časově stálou adhezi:
  - neodděluje se;
  - nevyžaduje lepidla ani rozpouštědla;
  - zajišťuje dokonalé spojení obou materiálů.
- Vyrobena z vysoce pružné HR pěny s vysokou hustotou (40 kg/m3), která omezuje proležení.

INOVACE SYST'AM®: ANATOMICKÁ TVAROVANÁ VLOŽKA Z HR PĚNY

- Anatomický tvar umožňuje lepší zaboření sakrální oblasti a oblasti pat, čímž se zvětšuje kontaktní plocha s matrací a snižují vysoké hodnoty tlaku.
- Posílená prevence dekubitů v oblasti sakra a pat.

DOSTUPNÉ VERZE

SYST'AM® P171M / POLYSTRAT HE

DOSTUPNÉ POTAHY



POLYMAILLE® A POLYMAILLE® HD CELISTVÝ POTAH PRO VÍCEPACIENTSKÉ POUŽITÍ

- Hypoalergenní

POLYMAILLE® A POLYMAILLE® HD CELISTVÝ POTAH PRO VÍCEPACIENTSKÉ POUŽITÍ

- Hypoalergenní polyuretanový nános (antibakteriální, antimikrobiální, protiplísňový).
- Dvousměrná elasticita snižuje tahové a střižné síly.
- Zip ze 3 stran. Protiskluzová spodní strana.
- POLYMAILLE® HD: svařované švy.

OZNAČENÍ	KÓD POLOŽKY	(cm / inches)	(cm / inches)	min - MAX (kg / lbs)
P171M / POLYSTRAT HE s potah POLYMAILLE®	P171MPPMHINC	88 x 199 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 110 / 77 - 242
P171M / POLYSTRAT HE s potahem POLYMAILLE® HD	P171MPPMHFNC	88 x 199 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 110 / 77 - 242

DOSTUPNÉ POUZE NEKOMPRIMOVANÉ


WARRANTY 2 ROKY

SYST'AM® P171M-V / POLYSTRAT HE-V

JEDNODÍLNÁ TVAROVANÁ MATRACE ZE 2 VRSTEV: HORNÍ VRSTVA Z VYSOCE ELASTICKÉ PĚNY A ANATOMICKÁ HR VLOŽKA SE 2 VISKOELASTICKÝMI POLŠTÁŘI

MATERIÁLY

50 kg/m³

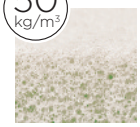

Extra měkká
HE pěna
Velmi vysoká hustota

40 kg/m³



HR pěna

80 kg/m³



Viskoelastická pěna



POLYMAILLE®
celistvý potah



POLYMAILLE®***HD***
celistvý potah

NF EN ISO 597 - 1 a 2

Údržba pěny:

(Neponořujte do vody)

Čištění potahu POLYMAILLE®:

Čištění potahu POLYMAILLE® HD:

INDIKACE

Riziko


NÍZKÉ — VELMI VYSOKÉ

Matraci P171M / POLYSTRAT HE-V
lze použít, pokud:

- 1- Je nezbytné upoutání na lůžko v důsledku onemocnění nebo zdravotního postižení a současně je přítomno zvýšené riziko vzniku dekubitu dekubitu podle hodnotících škál (Braden, Norton, Waterlow, ...); nebo
- 2- Vznikl dekubitus (stupeň 1 až 3 dle EPUAP a až stupeň 4 při použití polohovacích klínů).

VISKOELASTICKÉ VLOŽKY

- Přesné přizpůsobení tělu a zvětšení kontaktní plochy s matrací.
- Lepší rozložení tlaku; snížení transkutánních tlaků v rizikových oblastech a podpora krevní cirkulace.
- Zlepšený komfort a stabilita pacienta.
- Vícezónová opěrná plocha.
- 4 cm viskoelastické pěny v oblasti sakra a pat.

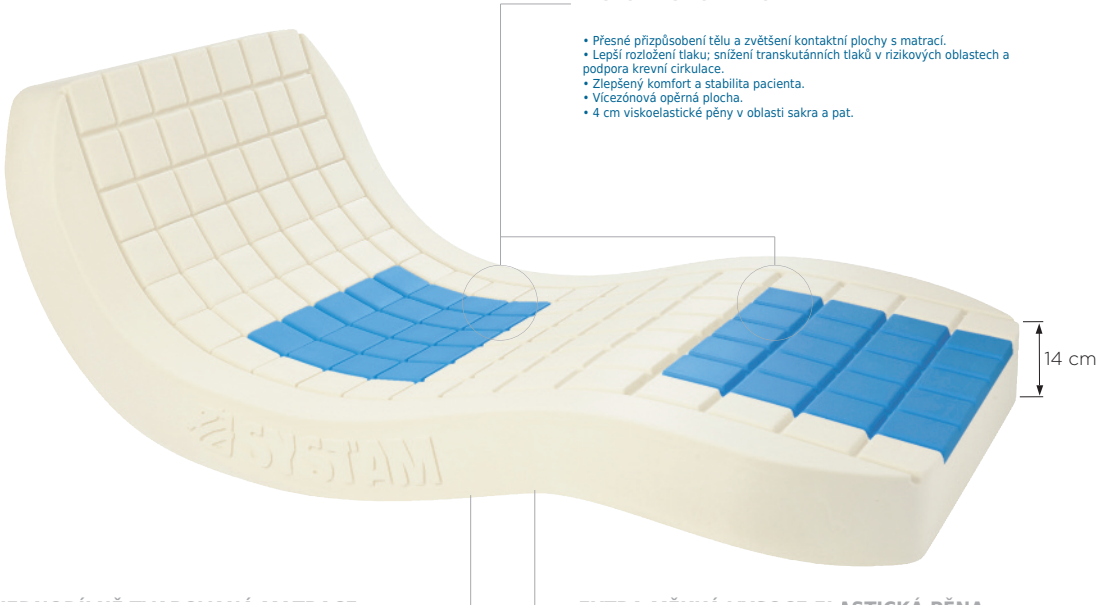


JEDNODÍLNĚ TVAROVANÁ MATRACE

- Zajišťuje dokonalé usazení v potahu.
- Kompatibilní se standardními i polohovacími lůžkovými rošty.
- Úspora času a snazší instalace podložek.

EXTRA MĚKKÁ VYSOCE ELASTICKÁ PĚNA

Vyso
- Umožňuje hlubší zaboření.
- Snižuje bolestivost díky měkčí odezvě.
- Zachovává mobilitu.
- Vysoce odolná.

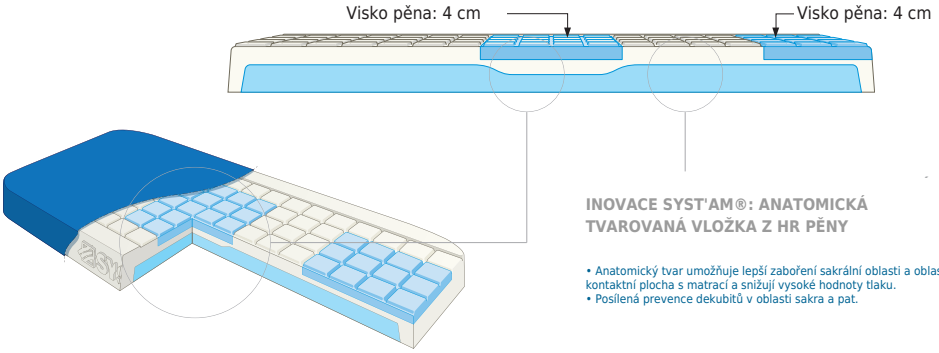

INOVACE SYST'AM®: ANATOMICKÁ TVAROVANÁ VLOŽKA Z HR PĚNY

- Anatomický tvar umožňuje lepší zaboření sakrální oblasti a oblasti pat, čímž se zvětšuje kontaktní plocha s matrací a snižují vysoké hodnoty tlaku.
- Posílená prevence dekubitů v oblasti sakra a pat.

KONCEPCE S VLOŽKOU PROTI PROSEDNUTÍ

- Tato vícevrstvá struktura vzniklá tvarováním zajišťuje dokonalou a časově stálou adhezi:
  - neodděluje se;
  - nevyžaduje lepidla ani rozpouštědla;
  - zajišťuje dokonalé spojení obou materiálů.
- Vyrobena z vysoce pružné HR pěny s vysokou hustotou (40 kg/m3), která omezuje proležení.

ÚČINEK

- Vícezónová opěrná plocha umožňuje lepší rozložení tlaku přenosem opory z oblastí s vysokým rizikem do oblastí s nízkým rizikem dekubitu.



SOKÉ RIZIKO OBLAST

DOSTUPNÉ VERZE



SYST'AM® P171M / POLYSTRAT HE

DOSTUPNÉ POTAHY



POLYMAILLE® A POLYMAILLE® HD CELISTVÝ POTAH PRO VÍCEPACIENTSKÉ POUŽITÍ

- Hypoaler POLYMAILLE® A POLYMAILLE® HD CELISTVÝ POTAH PRO VÍCEPACIENTSKÉ POUŽITÍ ıiální,
  ıíly.
- Hypoalergenní polyuretanový nános (antibakteriální, antimikrobiální, protiplísňový).
- Dvousměrná elasticita snižuje tahové a střižné síly.
- Zip ze 3 stran. Protiskluzová spodní strana.
- POLYMAILLE® HD: svařované švy.

OZNAČENÍ	KÓD POLOŽKY	(cm / inches)	(cm / inches)	min - MAX (kg / lbs)
P171M-*V* / POLYSTRAT HE-V potah POLYMAILLE®	P171MVPMHINC	88 x 199 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 110 / 77 - 242
P171M-*V* / POLYSTRAT HE-V **potah POLYMAILLE® HD**	P171MVPMHFNC	88 x 199 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 110 / 77 - 242

DOSTUPNÉ POUZE NEKOMPRIMOVANÉ

WARRANTY 2 ROKY

SYST'AM® P161M / VISCOFLEX®

JEDNODÍLNÁ TVAROVANÁ MATRACE Z VISKOELASTICKÉ PĚNY S PAMĚŤOVÝM EFEKTEM A S ANATOMICKY TVAROVANOU VLOŽKOU Z HR PĚNY.

MATERIÁLY

80 kg/m³



Viskoelastická pěna

40 kg/m³



HR pěna



POLYMAILLE® celistvý potah



POLYMAILLE®***HD*** celistvý potah

NF EN ISO 597 - 1 a 2

Údržba pěny:



(Neponořujte do vody)

Čištění potahu POLYMAILLE®:



Čištění potahu POLYMAILLE® HD:



INDIKACE

Riziko




Matrace P161M / VISCOFLEX® lze lze použít, pokud:

- 1- Je nezbytné upoutání na lůžko v důsledku onemocnění nebo zdravotního postižení a současně je přítomno zvýšené riziko vzniku dekubitu dekubitu podle hodnotících škál (Braden, Norton, Waterlow, ...); nebo
- 2- Vznikl dekubitus (stupeň 1 až 3 dle EPUAP a až stupeň 4 při použití polohovacích klínů) vznikl dekubitus.



DODÁVÁNO KOMPRIMOVANÉ UTÉ

- Úspora ve skladování 2,5x menší objem objemu.

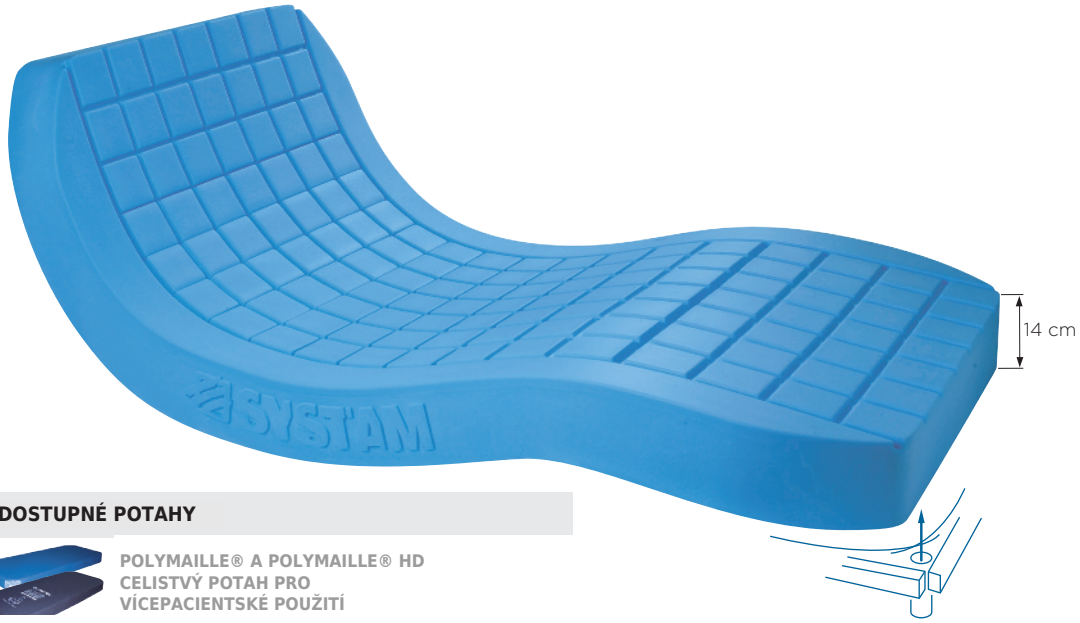

DOSTUPNÉ POTAHY

POLYMAILLE® A POLYMAILLE® HD CELISTVÝ POTAH PRO VÍCEPACIENTSKÉ POUŽITÍ

- Hypoalergenní polyuretanový nános (antibakteriální, antimikrobiální, protiplísňový).
- Dvousměrná elasticita snižuje tahové a střižné síly.
- Zip ze 3 stran. Protiskluzová spodní strana.
- POLYMAILLE® HD: svařované švy.
- POLYMAILLE®

ZAOBLENÉ ROHY

- Snazší instalace podložek do ložné plochy lůžka.

DOSTUPNÉ VERZE



SYST'AM® P161M / VISCOFLEX®



SYST'AM® P161M / VISCOFLEX® s vícezónovou plocha



SYST'AM® P161M / VISCOFLEX® Heavy



SYST'AM® P161M / VISCOFLEX® Kid



SYST'AM® P161M / VISCOFLEX® s 90° rohy

OZNAČENÍ	KÓD POLOŽKY	(cm / inches)	(cm / inches)	min - MAX (kg / lbs)
P161M / VISCOFLEX® s celistvý potah POLYMAILLE®	P161MOPMHI	86 x 199 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 130 / 77 - 286
P161M / VISCOFLEX® s vícezónovou opěrnou plochou celistvý potah POLYMAILLE®	P161MOPPMHI	86 x 199 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 130 / 77 - 286
P161M / VISCOFLEX® Heavy celistvý potah POLYMAILLE®	P161MOHPMHI	86 x 199 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	80 - 180 / 176 - 396
P161M / VISCOFLEX® s celistvý potah POLYMAILLE®	P161MOPMHI70	68 x 197 / 26 x 78	70 x 200 / 27 x 79	35 - 130 / 77 - 286
	P161MOPMHI80	77 x 197 / 30 x 78	80 x 200 / 31 x 79	35 - 130 / 77 - 286
	P161MOPMHI100	96 x 197 / 38 x 78	100 x 200 / 39 x 79	35 - 160 / 77 - 352
	P161MOPMHI120	115 x 197 / 45 x 78	120 x 200 / 47 x 79	135 - 270 / 297 - 594
	P161MOPMHI140	133 x 197 / 52 x 78	140 x 200 / 55 x 79	135 - 270 / 297 - 594
	P161MOPMHI160	155 x 197 / 61 x 78	160 x 200 / 63 x 79	135 - 270 / 297 - 594
	P161MOPMHI190	86 x 187 / 34 x 74	90 x 190 / 35 x 75	35 - 130 / 77 - 286
	P161MOPMHI220	86 x 221 / 34 x 87	90 x 220 / 35 x 87	35 - 130 / 77 - 286
P161M / VISCOFLEX® 90° rohy, potah POLYMAILLE®	P161MODPMHI	86 x 199 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 130 / 77 - 286
P161M / VISCOFLEX® Kids celistvý potah POLYMAILLE®	P161MOKPMHI160	77 x 155 / 30 x 61	80 x 160 / 31 x 63	10 - 40 / 10 - 88
	P161MOKPMHI170	68 x 165 / 26 x 65	70 x 170 / 27 x 67	10 - 40 / 22 - 88
P161M / VISCOFLEX® s **celistvý potah POLYMAILLE® HD**	P161MOPMHF	86 x 199 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 130 / 77 - 286
P161M / VISCOFLEX® s vícezónovou opěrnou plochou **celistvý potah POLYMAILLE® HD**	P161MOPPMHF	86 x 199 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 130 / 77 - 286
P161M / VISCOFLEX® Heavy celistvý potah POLYMAILLE® HD	P161MOHPMHF	86 x 199 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	80 - 180 / 176 - 396
P161M / VISCOFLEX® s **celistvý potah POLYMAILLE® HD**	P161MOPMHF80	77 x 197 / 30 x 78	80 x 200 / 31 x 79	35 - 130 / 77 - 286
	P161MOPMHF120	115 x 197 / 45 x 78	120 x 200 / 31 x 79	135 - 270 / 297 - 594
	P161MOPMHF190	86 x 187 / 34 x 73	90 x 190 / 35 x 74	35 - 130 / 77 - 286
P161M / VISCOFLEX® celistvý potah POLYMAILLE® HD se 4 úchyty	P161MOPMHA	86 x 199 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 130 / 77 - 286

Všechny matrace jsou dodávány komprimované. Pokud požadujete NEKOMPRIMOVANÉ MATRACE, přidejte za číslo položky NC.


CE WARRANTY 2 ROKY

SYST'AM® P161M / VISCOFLEX

KONCEPCE S VLOŽKOU PROTI PROSEDNUTÍ

• Tato vícevrstvá struktura vzniklá tvarováním zajišťuje dokonalou a časově stálou adhezi:
- neodděluje se;
- nevyžaduje lepidla ani rozpouštědla;
- zajišťuje dokonalé spojení obou materiálů.
• Vyrobena z vysoce pružné HR pěny s vysokou hustotou (40 kg/m3), která omezuje proležení.



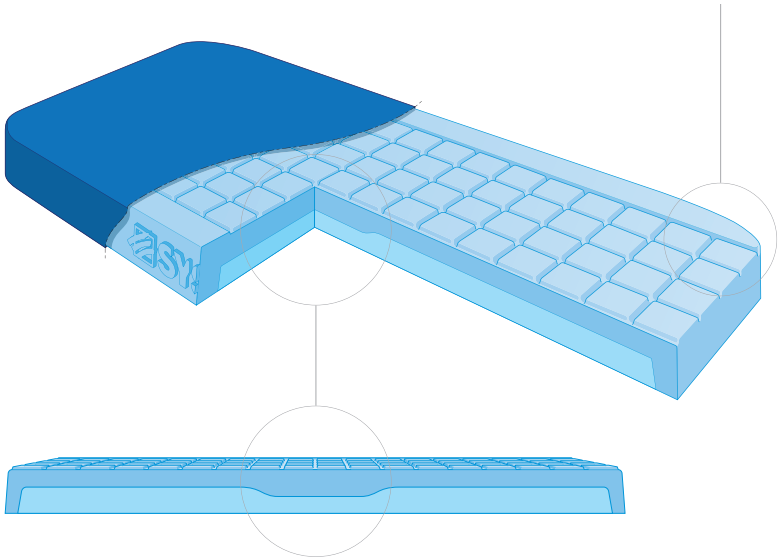

TVAROVANÁ VISKOELASTICKÁ PĚNA S PAMĚŤOVÝM EFEKTEM

• Přesné přizpůsobení tvaru těla a zvětšení kontaktní plochy s matrací.
• Lepší rozložení tlaku; snížení transkutánních tlaků v rizikových oblastech a podpora krevní cirkulace.
• Zlepšený komfort a stabilita pacienta.
• Povrchový efekt tvarování chrání pěnu proti vnějším vlivům.
• Velmi vysoká hustota omezuje deformaci a proležení.

JEDNODÍLNĚ TVAROVANÁ MATRACE


• Zajišťuje dokonalé usazení v potahu.
• Kompatibilní se standardními i polohovacími lůžkovými rošty.
• Úspora času a snazší instalace podložek.

INOVACE SYST'AM®:

• Anatomický tvar umožňuje lepší zaboření sakrální oblasti, což vede ke zvětšení kontaktní plochy s matrací a ke snížení vysokých hodnot tlaku.
• Posílená prevence dekubitů v sakrální oblasti.

BĚŽNÁ VISKOELASTICKÁ MATRACE


• Viskoelastická pěna je v rizikové oblasti výrazně stlačena, zejména v polosedě (Fowlerově poloze).

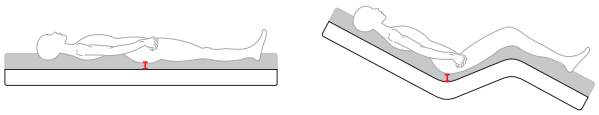

Pacient vleže | Pacient v polosedě


VISCOFLEX® S ANATOMICKY TVAROVANOU VLOŽKOU

• Protože vložka kopíruje tvar těla v sakrální oblasti, tloušťka viskoelastické pěny je maximalizována pro lepší prevenci v rizikových oblastech s rizikem vzniku dekubitu.

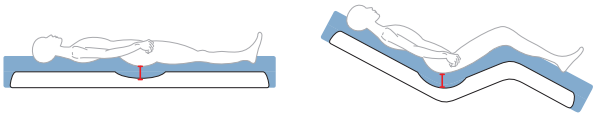

Pacient vleže | Pacient v polosedě

VLASTNOSTI MATRACE P161M VISCOFLEX® S VÍCEZÓNOVOU OPĚRNOU PLOCHOU

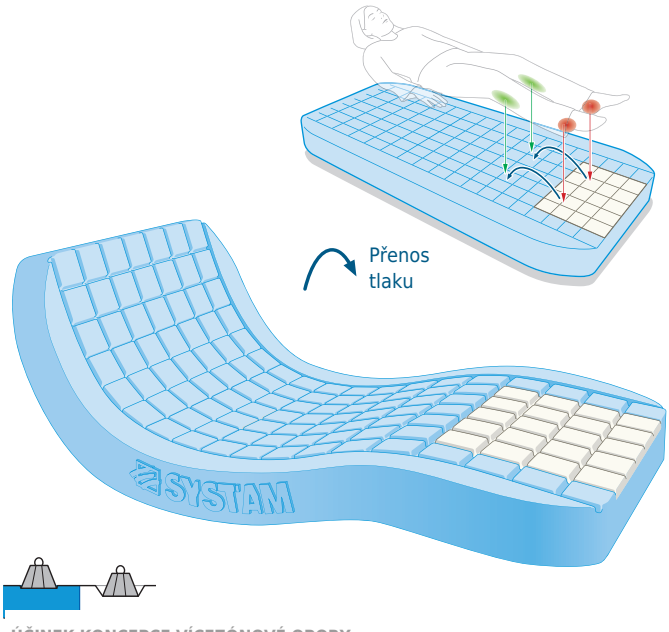

ÚČINEK KONCEPCE VÍCEZÓNOVÉ OPORY

• Vícezónová opěrná plocha umožňuje lepší rozložení tlaku přenosem opory z oblastí s nízkou nosností do oblastí s vysokou nosností.
BÍLÉ OBLASTI: měkčí pěna zajišťující zvýšenou prevenci v rizikových oblastech (sakrum, paty, lopatky).
MODRÉ OBLASTI: tužší pěna pro části těla s nižší úrovní rizika.

SYST'AM® P161M-OR / VISCOFLEX®
EVOLUTIVE / AIR / AIR+AIR

JEDNODÍLNÁ TVAROVANÁ MATRACE Z VISKOELASTICKÉ PĚNY S PAMĚŤOVÝM EFEKTEM A S VLOŽKOU Z HR PĚNY A POLŠTÁŘEM/POLŠTÁŘI POLYAIR®

MATERIÁLY

80 kg/m³




Viskoelastická pěna

40 kg/m³



HR pěna

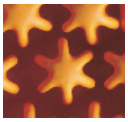

Laxprene®



POLYMAILLE®
celistvý potah

NF EN ISO 597 - 1 a 2

Údržba pěny:

(Neponořujte do vody)

Čištění potahu POLYMAILLE®:

95 °C < 1000 ppm

INDIKACE

Riziko

NÍZKÉ — VELMI VYSOKÉ

P161M-*OE* - P161M-*OR* - P161M-*O2R* / matrace VISCOFLEX® Air lze lze použít, pokud:

- 1- Je nezbytné upoutání na lůžko v důsledku onemocnění nebo zdravotního postiže a současně je přítomno zvýšené riziko vzniku dekubitu dekubitu podle hodnoticích škál (Braden, Norton, Waterlow, ...); nebo
- 2- Vznikl dekubitus (stupeň 1 až 4 dle EPUAP).



• Se 2 vložkami POLYAIR®. Dodáváno s manometrem.



SYST'AM® P161M-OR / VISCOFLEX® AIR


• S 1 sekcí z paměťové pěny a jednou sekcí s vložkou POLYAIR®
Dodáváno s manometrem.

14 cm



SYST'AM® P161M-OE /

• Se 2 snímatelnými sekcemi z paměťové pěny.

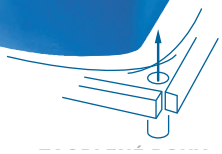

• Snazší instalace podložek do
ložné plochy lůžka.

DOSTUPNÉ POTAHY



CELISTVÝ POTAH POLYMAILLE®
CELISTVÝ POTAH POLYMAILLE® PRO VÍCEPACIENTSKÉ POUŽITÍ

• Hypoalergenní

• Hypoalergenní polyuretanový nános (antibakteriální, antimikrobiální, protiplísňový).
• Dvousměrná elasticita snižuje tahové a střižné síly.
• Zip ze 3 stran. Protiskluzová spodní strana.

DOSTUPNÉ VERZE



SYST'AM® P161M-OE / VISCOFLEX® EVOLUTIVE



SYST'AM® P161M-*OR* / VISCOFLEX® AIR



SYST'AM® P161M-*O2R* / VISCOFLEX® AIR + AIR

OZNAČENÍ	KÓD POLOŽKY	(cm / inches)	(cm / inches)	min - MAX (kg / lbs)
P161M-*OE* / VISCOFLEX® Evolutive s celistvý potah POLYMAILLE®	P161MOEPMHI	86 x 197 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 130 / 77 - 286
P161M-*OR* / VISCOFLEX® Air s potahem POLYMAILLE® celistvý potah	P161MORPMHI	86 x 197 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 130 / 77 - 286
P161M-*O2R* / VISCOFLEX® Air + Air s celistvý potah POLYMAILLE®	P161MO2RPMHI	86 x 197 / 34 x 78	90 x 200 / 35 x 79	35 - 130 / 77 - 286
vložka POLYAIR®	P301CR51432HW			
vložka VISCOFLEX® z měkké paměťové pěny	P161MO2			



DODÁVÁNO KOMPRIMOVANÉ UTÉ

• Úspora ve skladování 2,5x menší objem objemu.

Všechny matrace jsou dodávány komprimované. Pokud požadujete NEKOMPRIMOVANÉ MATRACE, přidejte za číslo položky NC.


CE WARRANTY 2 ROKY

05/2019

SYST'AM® P161M-OR / VISCOFLEX® EVOLUTIVE / AIR / AIR+AIR

VLOŽKA POLYAIR®

- Účinné lokální snížení transkutánního tlaku.
- Voštinová konstrukce buněk maximalizuje kontaktní plochu.
- Vysoká elasticita a odolnost materiálu Laxprene® proti roztržení.
- Omezení účinků macerace díky ventilačním kanálkům mezi buňkami.

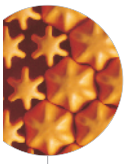

JEDNODÍLNĚ TVAROVANÁ MATRACE

- Zajišťuje dokonalé usazení v potahu.
- Kompatibilní se standardními i polohovacími lůžkovými rošty.
- Úspora času a snazší instalace podložek.

KONCEPCE S VLOŽKOU PROTI PROSEDNUTÍ


- Tato vícevrstvá struktura vzniklá tvarováním zajišťuje dokonalou a časově stálou adhezi:
  - neodděluje se;
  - nevyžaduje lepidla ani rozpouštědla;
  - zajišťuje dokonalé spojení obou materiálů.
- Vyrobena z vysoce pružné HR pěny s vysokou hustotou (40 kg/m3), která omezuje proležení.

nezuje

INOVACE SYST'AM®:


- Anatomický tvar umožňuje lepší zaboření sakrální oblasti, což vede ke zvětšení kontaktní plochy s matrací a ke snížení vysokých hodnot tlaku.
- Posílená prevence dekubitů v sakrální oblasti.

MATRACE VISCOFLEX®

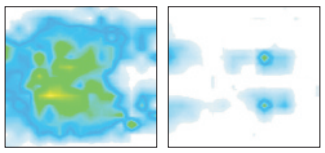


Sakrum Paty

MATRACE VISCOFLEX® AIR+AIR

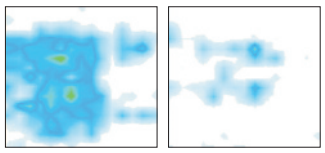

Sakrum Paty

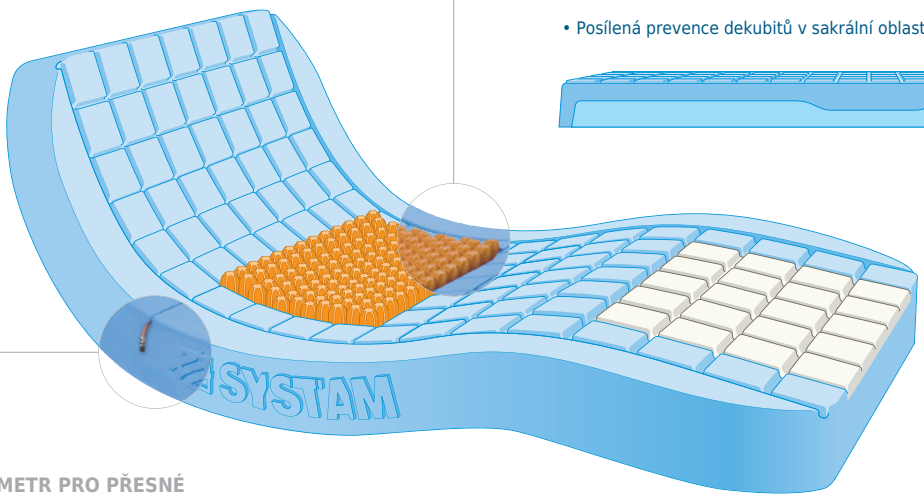


- Posílená prevence dekubitů v sakrální oblasti.







MANOMETR PRO PŘESNÉ

- Matrace je dodávána s manometrem pro snadné.
- Nafouknutí vložky se vzduchovými buňkami je možné bez snímání potahu díky promyšlenému systému přístupu k ventilům, který zajišťuje úplné utěsnění a ochranu matrace.

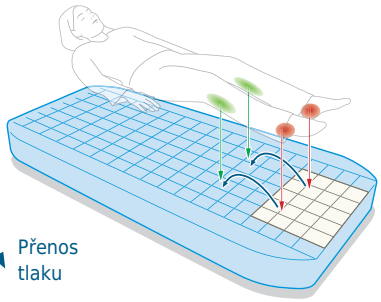

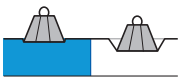

Přenos tlaku

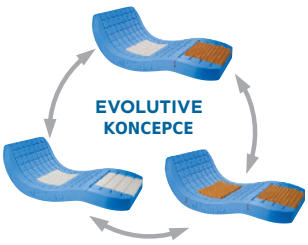


- Modulární systém snadno použitelný díky vložce/vložkám POLYAIR®, které lze umístit do oblasti hýždí nebo pat podle
- 2 samostatně dostupné moduly umožňují:
  - doplnit druhou vložku POLYAIR®;
  - přeměnit VISCOFLEX® Air na VISCOFLEX® Evolutive;
  - přeměnit VISCOFLEX® Evolutive na VISCOFLEX® Air

- Vícezónová opěrná plocha umožňuje lepší rozložení tlaku prostřednictvím přenosu opory z oblastí s nízkou nosností do oblastí s vysokou nosností:

BÍLÉ OBLASTI:
Oblasti s nízkou nosností (měkčí pěna) zajišťují zvýšenou prevenci v rizikových oblastech (sakrum, paty, lopatky).


MODRÉ OBLASTI:
Oblasti s vysokou nosností (tužší pěna) pro části těla s nižší úrovní rizika.

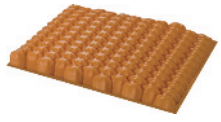


VLOŽKA POLYAIR®



VLOŽKA VISCOFLEX®

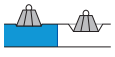

PODLOŽKA VISCOFLEX® AIR (viz str. 59)

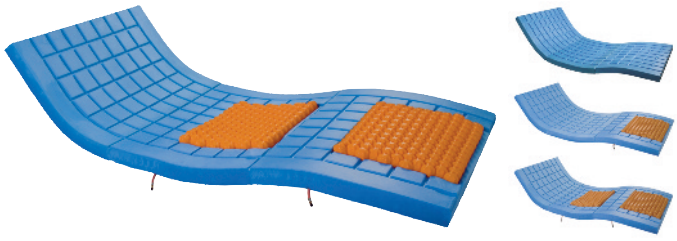

PODLOŽKA VISCOFLEX® AIR

NÁHRADNÍ POTAHY K LŮŽKOVÝM MATRACÍM

ELASTICITA A PRODYŠNOST POLYFILMU VÝRAZNĚ PŘEVYŠUJÍ PVC



Napínací prostěradlo Polyfilm

VLASTNOSTI POTAHŮ POLYFILM®

- Prodyšná a vysoce elastická hypoalergenní polyuretanová fólie (roztažnost 800 % před prasknutím) pro zvýšenou
- Spolehlivá přizpůsobivost: na rozdíl od PVC je materiál velmi pevný a dlouhodobě odolný proti opotřebení (UV záření, moč,
- POLYFILM je zcela nepropustný pro tekutiny a díky prodyšnosti pomáhá omezovat maceraci.

Dezinfikujte sprejovými přípravky aplikovanými za studena (kvartérní amoniové sloučeniny, glutaraldehydy atd.).



POLYMAILLE®
ÚČINNÁ BARIÉRA

VLASTNOSTI POTAHŮ POLYMAILLE®

- Polyuretanový povlak na polyesterovém úpletu
- Hypoalergenní polyuretanový nános (antibakteriální, antimikrobiální, protiplísňový).
- POLYMAILLE® je dvousměrně elastický, snižuje tahové a střižné síly.
- POLYMAILLE® je prodyšný a zlepšuje mikroklima.
- POLYMAILLE® je nepropustný pro tekutiny.
- Protiskluzová spodní strana.
- Zip ze 3 stran.

Čištění potahu POLYMAILLE®:



POLYMAILLE® *HD*
ÚČINNÁ BARIÉRA

VLASTNOSTI POTAHŮ POLYMAILLE® HD

- Polyuretanový povlak na polyamidovém úpletu s tištěnými pokyny
- Hypoalergenní polyuretanový nános (antibakteriální, antimikrobiální, protiplísňový).
- POLYMAILLE® HD je dvousměrně elastický, snižuje tahové a střižné síly.
- POLYMAILLE® HD je prodyšný a zlepšuje mikroklima.
- POLYMAILLE® HD je nepropustný pro tekutiny.
- Zip ze 3 stran.
- Voděodolný potah.
- Svařované švy.

Dezinfikujte sprejovými přípravky aplikovanými za studena (kvartérní amoniové sloučeniny, glutaraldehydy atd.).

KÓD POLOŽKY	OZNAČENÍ
	POTAHY POLYFILM
P402PF	Napínací prostěradlo POLYFILM pro lůžko šířky 90 cm / 35''
	Celistvý potah POLYMAILLE® pro matrace šířky 90 cm
P421PM	Celistvý potah POLYMAILLE® pro POLYMULTI 3S
P451PM	Celistvý potah POLYMAILLE® pro COMBIFLEX
P452PM	Celistvý potah POLYMAILLE® pro POLYPLOT 14 cm / VISCOFLEX®
P462PM	Celistvý potah POLYMAILLE® pro VISCOFLEX® Evolutiv / Air / Air + Air
P471PM	Celistvý potah POLYMAILLE® pro podložky VISCOFLEX®
	Celistvý potah POLYMAILLE® pro matrace se speciálními rozměry
P452PM70	Celistvý potah POLYMAILLE® pro matraci VISCOFLEX® 70 x 200 cm / 27 x 67''
P452PM80	Celistvý potah POLYMAILLE® pro matraci POLYPLOT / VISCOFLEX® 80 x 200 cm / 31 x 78''
P452PM160	Celistvý potah POLYMAILLE® pro dětskou matraci VISCOFLEX® 80 x 160 cm / 31 x 63''
P452PM170	Celistvý potah POLYMAILLE® pro dětskou matraci VISCOFLEX® 70 x 170 cm / 27 x 67''
P452PM110	Celistvý potah POLYMAILLE® pro matraci VISCOFLEX® 110 x 200 cm / 43 x 78''
P452PM120	Celistvý potah POLYMAILLE® pro matraci POLYPLOT / VISCOFLEX® 120 x 200 cm / 47 x 78''
P452PM140	Celistvý potah POLYMAILLE® pro matraci POLYPLOT / VISCOFLEX® 140 x 200 cm / 55 x 78''
P451PM160	Celistvý potah POLYMAILLE® pro matraci VISCOFLEX® 160 x 200 cm / 61 x 78''
P452PM190	Celistvý potah POLYMAILLE® pro matraci POLYPLOT / VISCOFLEX® 90 x 190 cm / 35 x 74''
P452PM220	Celistvý potah POLYMAILLE® pro matraci POLYPLOT / VISCOFLEX® 90 x 220 cm / 35 x 86''
	Celistvý potah POLYMAILLE® HD pro matrace se speciálními rozměry
P452PF	Celistvý potah POLYMAILLE® HD pro matraci POLYPLOT / POLYSTRAT / VISCOFLEX® 90 x 200 cm / 35 x 78''
P452PA	Celistvý potah POLYMAILLE® HD se 4 úchyty pro matraci POLYPLOT / POLYSTRAT / VISCOFLEX® 90 x 200 cm / 35 x 78''
P452PF80	Celistvý potah POLYMAILLE® HD pro matraci POLYPLOT / VISCOFLEX® 80 x 200 cm / 31 x 78''
P452PF190	Celistvý potah POLYMAILLE® HD pro dětskou matraci VISCOFLEX® 80 x 160 cm / 31 x 63''
P452PF220	Celistvý potah POLYMAILLE® HD pro matraci VISCOFLEX® 90 x 220 cm / 35 x 86''
P452PA	Celistvý potah POLYMAILLE® HD s úchyty pro matraci POLYPLOT / POLYSTRAT / VISCOFLEX® 90 x 200 cm / 35 x 79''
P462PF	Celistvý potah POLYMAILLE® HD pro matraci VISCOFLEX® Air / Air + Air 90 x 200 cm / 35 x 78''
P453PF19066	Celistvý potah POLYMAILLE® HD pro matraci nosítka VISCOFLEX® 66 x 190 cm / 26 x 75''
P453PF19076	Celistvý potah POLYMAILLE® HD pro matraci nosítka VISCOFLEX® 76 x 190 cm / 30 x 75''