







SEDÁKY A POLOHOVACÍ POMŮCKY

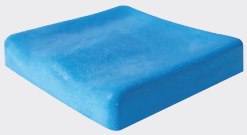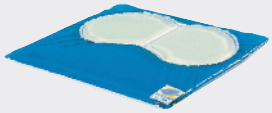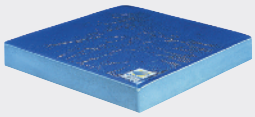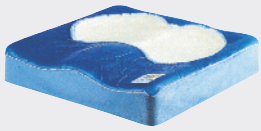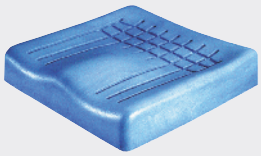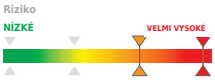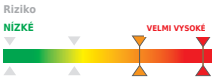

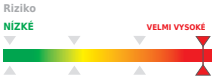

NAŠE SEDÁKY A INDIKACE

ŘADA SEDÁKŮ SYST'AM®	INDIKACE	RIZIKO
	TYTO SEDÁKY LZE POUŽÍT, POKUD:	
P371C HR PĚNA SEDÁK 	• Poloha vsedě je nezbytná v důsledku onemocnění nebo zdravotního postižení a současně je zvýšené riziko vzniku dekubitu.	
P311C GELOVÝ **SEDÁK** 		
P311C-*D* DUOGEL SEDÁK 		
P314C MIXTE SEDÁK 	• Poloha vsedě je nezbytná v důsledku onemocnění nebo zdravotního postižení a současně je zvýšené riziko vzniku dekubitu.	
P341C DUOFORM SEDÁK 	• 1- Je již přítomen dekubitus (stupeň I až II dle EPUAP). pacient může měnit polohu vsedě nebo jsou tlakové body odlehčovány ošetřovatelskou péčí. Nebo • 2- Je přítomno zvýšené až vysoké riziko dle hodnoticí škály (Braden, Norton, Waterlow, ...). Sedák DUOFORM je vhodný pro pacienty: s anamnézou dekubitu v oblasti kontaktu se sedací plochou a/nebo s úplnou či částečnou paralýzou trupu nebo dolních končetin, a/nebo s poruchou či ztrátou čití dolní končetiny a/nebo se zhoršenou frontální stabilitou a/nebo s lehkými posturálními asymetriemi a/nebo s cévní amputací a/nebo se špatným celkovým stavem.	
P361C VISCOFLEX® SEDÁK 	• 1- Je již přítomen dekubitus (stupeň I až II dle EPUAP). pacient může měnit polohu vsedě nebo jsou tlakové body odlehčovány ošetřovatelskou péčí. Nebo • 2- Je přítomno zvýšené až velmi vysoké riziko dle hodnoticí škály (Braden, Norton, Waterlow, ...). Sedák VISCOFLEX® je vhodný pro pacienty s anamnézou dekubitu v oblasti kontaktu se sedací plochou a/nebo také s úplnou či částečnou paralýzou trupu nebo dolních končetin a/nebo s poruchou či ztrátou čití dolní končetiny, a/nebo se zhoršenou frontální stabilitou a/nebo s lehkými posturálními asymetriemi a/nebo s cévní amputací a/nebo se špatným celkovým stavem.	
P361CA VISCOFLEX®+ SEDÁK 	• 1- Je již přítomen dekubitus (stupeň I až III dle EPUAP). pacient může měnit polohu vsedě nebo jsou tlakové body odlehčovány ošetřovatelskou péčí. Nebo • 2- Je přítomno zvýšené až velmi vysoké riziko dle hodnoticí škály (Braden, Norton, Waterlow, ...). Sedák VISCOFLEX®+ je vhodný pro pacienty s anamnézou dekubitu v oblasti kontaktu se sedací plochou a/nebo s úplnou či částečnou paralýzou trupu nebo dolních končetin a/nebo s poruchou či ztrátou čití dolní končetiny, a/nebo se zhoršenou frontální stabilitou a/nebo s lehkými posturálními asymetriemi a/nebo s cévní amputací a/nebo se špatným celkovým stavem.	
P361CR VISCOFLEX® AIR SEDÁK 	• 1- Je již přítomen dekubitus (stupeň I až IV dle EPUAP). pacient může měnit polohu vsedě nebo jsou tlakové body odlehčovány ošetřovatelskou péčí. Nebo • 2- Je přítomno zvýšené až velmi vysoké riziko dle hodnoticí škály (Braden, Norton, Waterlow, ...). Sedák VISCOFLEX® Air je vhodný pro pacienty s anamnézou dekubitu v oblasti kontaktu se sedací plochou a/nebo s úplnou či částečnou paralýzou trupu nebo dolních končetin a/nebo s poruchou či ztrátou čití dolní končetiny, a/nebo se špatným celkovým stavem.	
P301C POLYAIR® 60 SEDÁK 	• 1- Je již přítomen dekubitus (stupeň I až IV dle EPUAP). Nebo • 2- Je přítomno zvýšené až velmi vysoké riziko dle hodnoticí škály (Braden, Norton, Waterlow, ...). Sedák POLYAIR® je vhodný pro pacienty s anamnézou dekubitu v oblasti kontaktu se sedací plochou a/nebo s úplnou či částečnou paralýzou trupu nebo dolních končetin a/nebo s poruchou či ztrátou čití dolní končetiny. systémy se dvěma komorami jsou vhodné také pro pacienty se spasticitou/kontrakturami a/nebo se zhoršenou frontální a laterální stabilitou, a/nebo s posturálními asymetriemi, nestabilitou pánve a/nebo s cévní amputací a/nebo se špatným celkovým stavem.	
P302C POLYAIR® 100 SEDÁK 		

SYST'AM® P371C / SEDÁK Z HR PĚNY

ANATOMICKY TVAROVANÝ SEDÁK Z VYSOCE PRUŽNÉ HR PĚNY

MATERIÁLY

40 kg/m³



HR pěna



Snímatelný POLYMAILLE® potah

NF EN ISO 597 - 1 a 2

Čištění pěny:

(Neponořujte do vody)

Čištění potahu:

95 °C


INDIKACE

Riziko

NÍZKÉ — VELMI VYSOKÉ

Sedák P371C / HR-foam lze použít, pokud:

- Poloha vsedě je nezbytná v důsledku onemocnění nebo zdravotního postižení a současně je zvýšené riziko vzniku dekubitu.

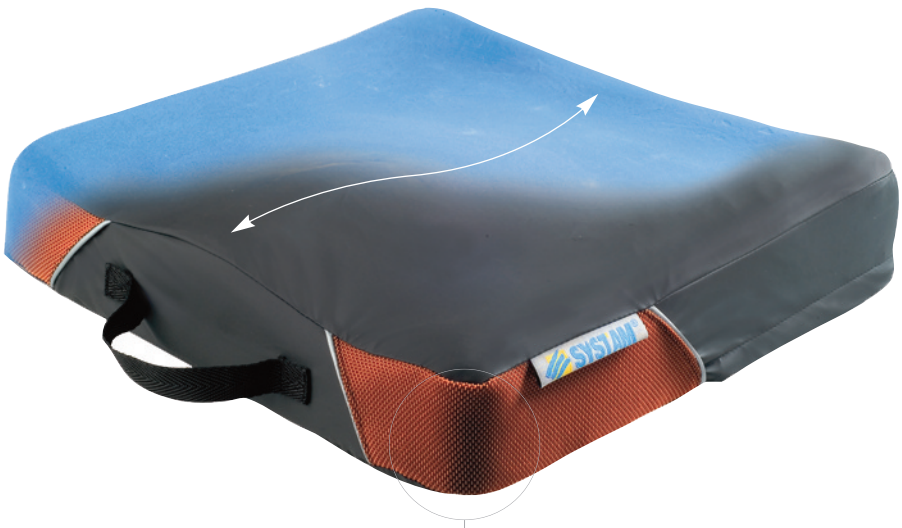



- Vysoká nosnost vysoce pružné pěny SYST'AM® (HR pěna) s vysokou hustotou (40 kg/m3) zajišťuje vynikající odolnost proti proležení.
- Skutečná bariéra chránící výrobek.

PRODYŠNÝ POTAH


ÚTINY)

- Snižuje účinky macerace
- Brání posunu sedáku po podkladu.

ANATOMICKÝ TVAR SE ZVÝŠENÝMI BOČNÍMI

- Zlepšuje polohování, stabilitu a komfort
- Zvětšuje kontaktní plochu a tím snižuje tlaky

DOSTUPNÉ VERZE

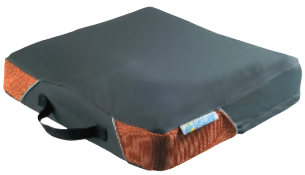

SYST'AM® P371C / sedák z HR pěny
S potahem POLYMAILLE®.

OZNAČENÍ	KÓD POLOŽKY	W x L (W x L - cm / inches)	min - MAX (kg / lbs)
P371C / sedák z HR pěny	P371C42421HW	42 x 42 cm / 17 x 17"	40 - 100 kg / 88 - 220 lbs
	P371C45421HW	45 x 42 cm / 18 x 17"	40 - 110 kg / 88 - 242 lbs
	P371C45461HW	45 x 46 cm / 18 x 18"	60 - 130 kg / 132 - 286 lbs
	P371C51461HSW	51 x 46 cm / 20 x 18"	60 - 150 kg / 132 - 330 lbs

CE WARRANTY 2

SYST'AM® P311C / GELOVÝ SEDÁK

GELOVÝ SEDÁK Z VISKOELASTICKÉHO GELU

MATERIÁLY


Viskoelastický gel


Snímatelný POLYMAILLE® potah


Snímatelný POLYMAILLE® **potah HD**

NF EN ISO 597 - 1 a 2

Čištění gelu:

(Neponořujte do vody)

Čištění potahu POLYMAILLE®:

Čištění potahu POLYMAILLE® HD:

INDIKACE

Riziko

NÍZKÉ — VELMI VYSOKÉ


P311C / Gel sedák can be used, pokud:

- Poloha vsedě je nezbytná v důsledku onemocnění nebo zdravotního postižení a současně je zvýšené riziko vzniku dekubitu.




VISKOELASTICKÝ VYSOCE RETIKULOVANÝ

- Zabraňuje migraci gelu a brání prosezení v oblasti kostních prominencí.

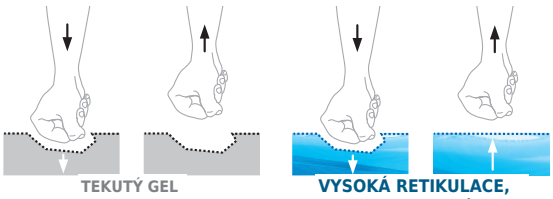

TEKUTÝ GEL

VYSOKÁ RETIKULACE, VISKOELASTICKÝ GEL

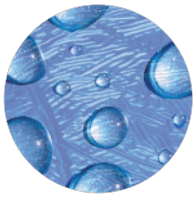


- Plně vhodné pro inkontinentní pacienty.

DOSTUPNÉ VERZE



SYST'AM® P311C / gelový sedák S potahem POLYMAILLE®.

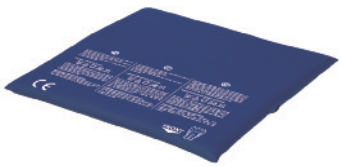

SYST'AM® P311C / gelový sedák S potahem POLYMAILLE® HD (se svařovanými švy).



SYST'AM® P313C / gelový sedák Gelový sedák se snímatelnou středovou vložkou.

OZNAČENÍ	KÓD POLOŽKY	W L (W x L - cm / inches)	min - MAX (kg / lbs)
SYST'AM® P311C s potahem POLYMAILLE®	P311C40401HW	40 x 40 cm / 16 x 16''	40 - 120 kg / 88 - 264 lbs
	P311C45431HW	45 x 43 cm / 18 x 17''	40 - 140 kg / 88 - 308 lbs
SYST'AM® P311C **s potahem POLYMAILLE® HD**	P311C40401HF	40 x 40 cm / 16 x 16''	40 - 120 kg / 88 - 264 lbs
	P311C45431HF	45 x 43 cm / 18 x 17''	40 - 140 kg / 88 - 308 lbs
SYST'AM® P313C se snímatelnou středovou vložkou.	P313C40401HW	40 x 40 cm / 16 x 16''	40 - 100 kg / 88 - 220 lbs

WARRANTY 2 ROKY

SYST'AM® P311C-D / SEDÁK DUOGEL

GELOVÝ SEDÁK Z VISKOELASTICKÉHO GELU S VÍCEZÓNOVOU OPĚRNOU PLOCHOU

MATERIÁLY



Viskoelastický gel



Snímatelný POLYMAILLE® potah

NF EN ISO 597 - 1 a 2

Čištění gelu:

(Neponořujte do vody)

Čištění potahu POLYMAILLE®:

INDIKACE

Riziko

NÍZKÉ — VELMI VYSOKÉ

P311C-*D* / DUOGEL Cushion can be


lze použít, pokud:

- Poloha vsedě je nezbytn nezbytná v důsledku onemocnění neb onemocnění nebo zdravotního postižení a současně je zvýšené riziko vzniku dekubitu.




VISKOELASTICKÝ VYSOCE RETIKULOVANÝ

Zabraňuje migraci gelu a brání prosezení v oblasti kostních prominencí.

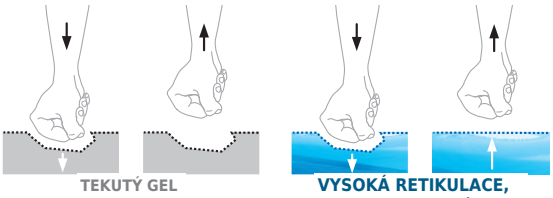

TEKUTÝ GEL

VYSOKÁ RETIKULACE, VISKOELASTICKÝ GEL

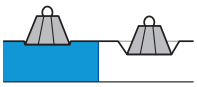


Díky inovativní technologii Duogel výrazně snižuje maximální tlak působící na citlivé oblasti zvětšením kontaktní plochy mezi pacientem a sedákem.

BÍLÁ OBLAST:

Nízkonosný, viskoelastický, samostatně uzavřený a netekoucí polyuretanový gel pro minimální tlak v rizikových oblastech, např. v oblasti kostních prominencí pánve.

MODRÁ OBLAST:

Vysokonosná plocha z retikulovaného viskoelastického PU gelu v nízkorizikových oblastech pro lepší komfort a stabilitu pacienta.

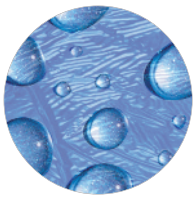

Plně vhodné pro inkontinentní pacienty.

DOSTUPNÉ VERZE



SYST'AM® P311C-*D* /Gel Cushion
S potahem POLYMAILLE®.

OZNAČENÍ	KÓD POLOŽKY	W x L - cm / inches	min - MAX (kg / lbs)
P311C-D / sedák DUOGEL	P311CD42421HW	42 x 42 cm / 17 x 17''	40 -140 kg / 88 - 308 lbs

WARRANTY 2

SYST'AM® P314C / SEDÁK MIXTE

TVAROVANÝ SEDÁK Z VISKOELASTICKÉHO GELU A HR PĚNY

MATERIÁLY

40 kg/m³



HR pěna



Viskoelastický gel



Snímatelný POLYMAILLE® potah



Snímatelný POLYMAILLE®***HD*** potah

NF EN ISO 597 - 1 a 2

Údržba pěny:

(Neponořujte do vody)

Čištění potahu:

Čištění potahu POLYMAILLE® HD:


INDIKACE


Riziko

NÍZKÉ — VELMI VYSOKÉ


P314C / MIXTE Cushion can be used, pokud:


- Poloha vsedě je nezbytn nezbytná v důsledku onemocnění neb onemocnění nebo zdravotního postižení a současně je zvýšené riziko vzniku dekubitu.

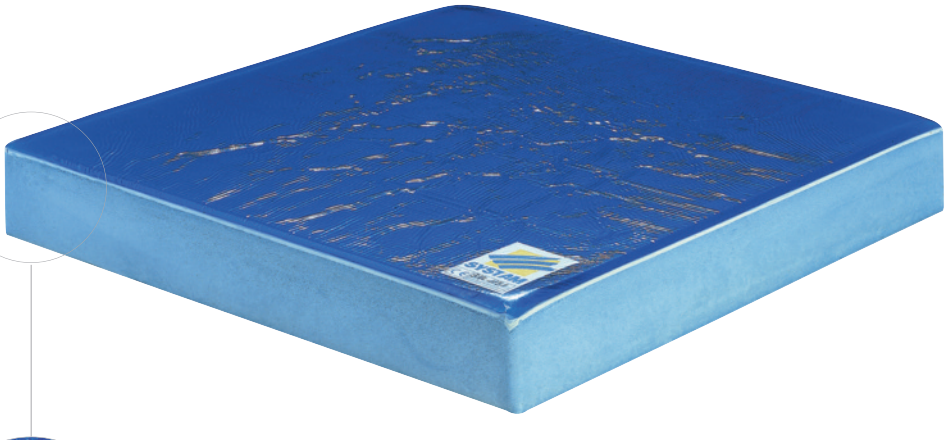

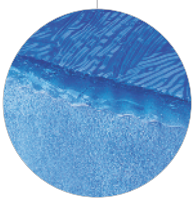

- Vysoce retikulovaný viskoelastický polyuretanový gel brání migraci gelu a tím zabraňuje prosednutí
- Přidání základny z vysoce pružné pěny umožňuje sedáku lépe se přizpůsobit kostním prominencím, a tím zajistit větší kontaktní plochu a účinnější rozložení tlaku. Současně zlepšuje
- Protože jsou obě vrstvy materiálu tvarovány společně (nikoli lepeny), jsou zcela spojeny, a tím se eliminuje riziko jejich oddělení v čase.

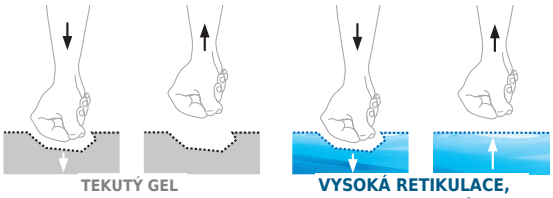

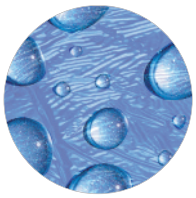

- Plně vhodné pro inkontinentní pacienty.

DOSTUPNÉ VERZE



P314C / sedák MIXTE®
S potahem POLYMAILLE®.



P314C / sedák MIXTE®
S potahem POLYMAILLE® HD
(se svařovanými švy).

OZNAČENÍ	KÓD POLOŽKY	W x L (W x L - cm / inches)	min - MAX (kg / lbs)
P314C / sedák MIXTE® s potahem POLYMAILLE®	P314C40401HW	40 x 40 cm / 16 x 16"	30 - 90 kg / 66 - 198 lbs
	P314C45431HW	45 x 43 cm / 18 x 17"	40 - 120 kg / 88 - 264 lbs
P314C / sedák MIXTE® **s potahem POLYMAILLE® HD**	P314C40401HF	40 x 40 cm / 16 x 16"	30 - 90 kg / 88 - 198 lbs
	P314C45431HF	45 x 43 cm / 18 x 17"	40 - 120 kg / 88 - 264 lbs

CE WARRANTY 2

SYST'AM® P341C / SEDÁK DUOFORM

SEDÁK ZE 2 VISKOELASTICKÝCH GELŮ TVAROVANÝCH S ANATOMICKOU POLYURETANOVOU HR PĚNOU

MATERIÁLY

40 kg/m³



HR pěna



Viskoelastický gel



Snímatelný POLYMAILLE® potah



Snímatelný POLYMAILLE® ***HD*** potah

NF EN ISO 597 - 1 a 2

Údržba pěny:

(Neponořujte do vody)

Čištění potahu:

Čištění potahu POLYMAILLE® HD:

INDIKACE


Riziko

NÍZKÉ — VELMI VYSOKÉ


P341C / DUOFORM Cushion can be lze použít, pokud:

- 1- Je již přítomen dekubitus (stupeň I až II dle EPUAP). pacient může měnit polohu vsedě nebo jsou tlakové body odlehčovány ošetřovatelskou péčí. Nebo
- 2- Je přítomno zvýšené až vysoké riziko dle hodnoticí škály (Braden, Norton, Waterlow, ...). Sedák P341C / DUOFORM je vhodný pro pacienty: s anamnézou dekubitu v oblasti kontaktu se sedací plochou, a/nebo také úplnou nebo částečnou paralýzou trupu nebo dolních končetin a/nebo s poruchou nebo ztrátou čití dolní končetiny a/nebo se zhoršenou frontální stabilitou a/nebo s lehkými posturálními asymetriemi a/nebo s cévní amputací a/nebo se špatným celkovým stavem.

Sedák lze použít na různých sedacích podložkách bez úprav.

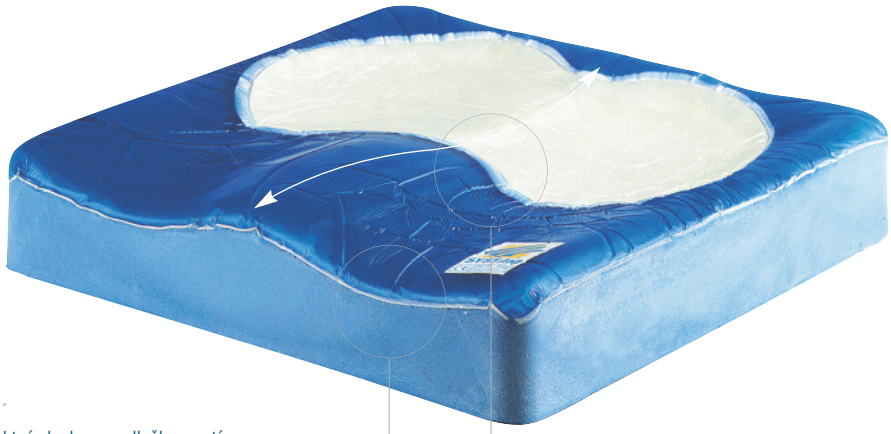


- Zvětšuje kontaktní plochu s podložkou, a tím
- Zlepšuje polohování a stabilitu pacienta.

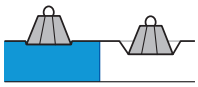


INOVATIVNÍ KOMBINACE

- Vysoce retikulovaný viskoelastický polyuretanový gel brání migraci gelu a tím zabraňuje prosednutí podložky. Viskoelastický tekutý gel (bílá vložka) zajišťuje snížení maximálních tlaků v citlivých
- Přidání základny z vysoce pružné pěny umožňuje sedáku lépe se přizpůsobit kostním prominencím, a tím zajistit větší kontaktní plochu, tedy účinnější rozložení tlaku. Současně
- Protože jsou obě vrstvy materiálu tvarovány společně (nikoli lepeny), jsou zcela spojeny, a tím se eliminuje riziko oddělení v čase.

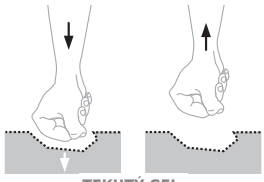

TEKUTÝ GEL

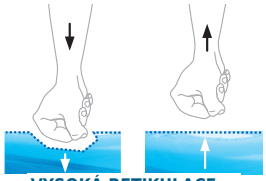

VYSOKÁ RETIKULACE, VISKOELASTICKÝ GEL


- Díky inovativní technologii Duogel výrazně snižuje maximální tlak působící na citlivé oblasti zvětšením kontaktní plochy mezi pacientem a sedákem.

BÍLÁ OBLAST:

Nízkonosný, viskoelastický, samostatně uzavřený a netekoucí polyuretanový gel pro minimální tlak v rizikových oblastech, např. v oblasti kostních prominencí pánve.


MODRÁ OBLAST:

Vysokonosná plocha z retikulovaného viskoelastického PU gelu v nízkorizikových oblastech pro lepší komfort a stabilitu pacienta.

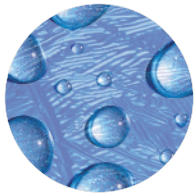

- Plně vhodné pro inkontinentní pacienty.


DOSTUPNÉ VERZE

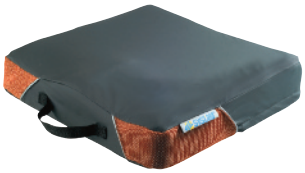

P341C / sedák DUOFORM® S potahem POLYMAILLE®.



P341C / sedák DUOFORM® S potahem POLYMAILLE® HD (se svařovanými švy).

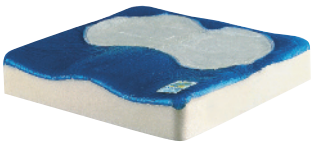

P341C-S / DUOFORM® Soft sedák S potahem POLYMAILLE®, pro pacienty < 70 kg.

OZNAČENÍ	KÓD POLOŽKY	W x L - cm / inches	min - MAX (kg / lbs)
P341C / sedák DUOFORM® s potahem POLYMAILLE®	P341C36361HW	36 x 36 cm / 14 x 14''	30 - 70 kg / 66 - 154 lbs
	P341C42421HW	42 x 42 cm / 16 x 16''	40 - 110 kg / 88 - 242 lbs
	P341C42461HW	42 x 46 cm / 16 x 18''	40 - 120 kg / 88 - 264 lbs
	P341C45421HW	45 x 42 cm / 18 x 16''	40 - 120 kg / 88 - 264 lbs
	P341C45461HW	45 x 46 cm / 18 x 18''	40 - 140 kg / 88 - 308 lbs
	P341C51461HW	51 x 46 cm / 20 x 18''	40 - 160 kg / 88 - 352 lbs
P341C-S / DUOFORM® Soft s potahem POLYMAILLE®	P341CS42421HW	42 x 42 cm / 16 x 16''	30 - 70 kg / 66 - 154 lbs
P341C / sedák DUOFORM® **s potahem POLYMAILLE® HD**	P341C42421HF	42 x 42 cm / 16 x 16''	40 - 110 kg / 88 - 242 lbs
	P341C45421HF	45 x 42 cm / 18 x 16''	40 - 120 kg / 88 - 264 lbs
	P341C45461HF	45 x 46 cm / 18 x 18''	40 - 140 kg / 88 - 308 lbs
	P341C51461HF	51 x 46 cm / 20 x 18''	40 - 160 kg / 88 - 352 lbs

CE WARRANTY 2 ROKY

SYST'AM® P361C / VISKOELASTICKÝ SEDÁK

TVAROVANÝ SEDÁK Z VISKOELASTICKÉ PĚNY S PAMĚŤOVÝM EFEKTEM

MATERIÁLY

80 kg/m³



Viskoelastická pěna



Snímatelný POLYMAILLE® potah



Snímatelný POLYMAILLE®***HD*** potah

NF EN ISO 597 - 1 a 2

Údržba pěny:

(Neponořujte do vody)

Čištění potahu:

Čištění potahu POLYMAILLE® HD:

INDIKACE

Riziko

NÍZKÉ — VELMI VYSOKÉ


Sedák P361C / VISCOFLEX® lze lze použít, pokud:

- 1- Je již přítomen dekubitus (stupeň I až II dle EPUAP). pacient může měnit polohu vsedě nebo jsou tlakové body odlehčovány ošetřovatelskou péčí. Nebo
- 2- Je přítomno zvýšené až velmi vysoké riziko dle hodnotící škály (Braden, Norton, Waterlow, ...). Sedák P361C / VISCOFLEX® je vhodný pro pacienty: s anamnézou dekubitu v oblasti kontaktu se sedací plochou, a/nebo také úplnou nebo částečnou paralýzou trupu nebo dolních končetin a/nebo s poruchou nebo ztrátou čití dolní končetiny a/nebo se zhoršenou frontální stabilitou a/nebo s lehkými posturálními asymetriemi a/nebo s cévní amputací a/nebo se špatným celkovým stavem.

Sedák lze použít na různých sedacích podložkách bez úprav.



DOSTUPNÉ VERZE

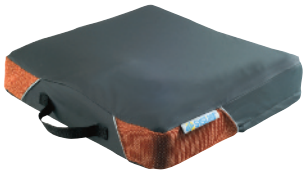

P361C / sedák VISCOFLEX® S potahem POLYMAILLE®.



P361C / sedák VISCOFLEX® S potahem POLYMAILLE® HD (se svařovanými švy).



P361C-S / VISCOFLEX® Soft sedák S potahem POLYMAILLE®, pro pacienty < 70 kg.

OZNAČENÍ	KÓD POLOŽKY	W L (W x L - cm / inches)	min - MAX (kg / lbs)
P361C / sedák VISCOFLEX® s potahem POLYMAILLE®	P361C36361HW	36 x 36 cm / 14 x 14"	30 - 50 kg / 66 - 110 lbs
	P361C38381HW	38 x 38 cm / 15 x 15"	30 - 90 kg / 66 - 198 lbs
	P361C40401HW	40 x 40 cm / 15,5 x 15,5"	40 - 100 kg / 88 - 220 lbs
	P361C42421HW	42 x 42 cm / 16 x 16"	40 - 100 kg / 88 - 220 lbs
	P361C42461HW	42 x 46 cm / 16 x 18"	40 - 110 kg / 88 - 242 lbs
	P361C45421HW	45 x 42 cm / 18 x 16"	40 - 110 kg / 88 - 242 lbs
	P361C45461HW	45 x 46 cm / 18 x 18"	40 - 130 kg / 88 - 286 lbs
	P361C48431HW	48 x 43 cm / 19 x 17"	40 - 140 kg / 88 - 308 lbs
	P361C51461HW	51 x 46 cm / 20 x 18"	60 - 150 kg / 132 - 330 lbs
	P361C51501HW	51 x 50 cm / 20 x 20"	60 - 160 kg / 132 - 352 lbs
P361C-*S* / VISCOFLEX® Soft s potahem POLYMAILLE®	P361CS42421HW	42 x 42 cm / 16 x 16"	30 - 70 kg / 70 - 154 lbs
P361C / sedák VISCOFLEX® **s potahem POLYMAILLE® HD**	P361C42421HF	42 x 42 cm / 16 x 16"	40 - 100 kg / 88 - 220 lbs
	P361C45421HF	45 x 42 cm / 18 x 16"	40 - 100 kg / 88 - 220 lbs
	P361C45461HF	45 x 46 cm / 18 x 18"	40 - 130 kg / 88 - 286 lbs
	P361C51501HF	51 x 50 cm / 20 x 20"	60 - 160 kg / 132 - 352 lbs


CE WARRANTY 2 ROKY


SYST'AM® P361C / SEDÁK VISCOFLEX®



- Přesné přizpůsobení tvaru těla a zvětšení kontaktní plochy těla se
- Lepší rozložení tlaku: snížení transkutánních tlaků v oblastech s
- Povrchový efekt dosažený tvarováním: ochrana pěny proti
- Velmi vysoká hustota omezuje deformaci a prosednutí.

- Lepší cirkulace vzduchu omezuje účinky
- Materiál lépe doprovází pohyb těla během pohybu a snižuje povrchové tření.

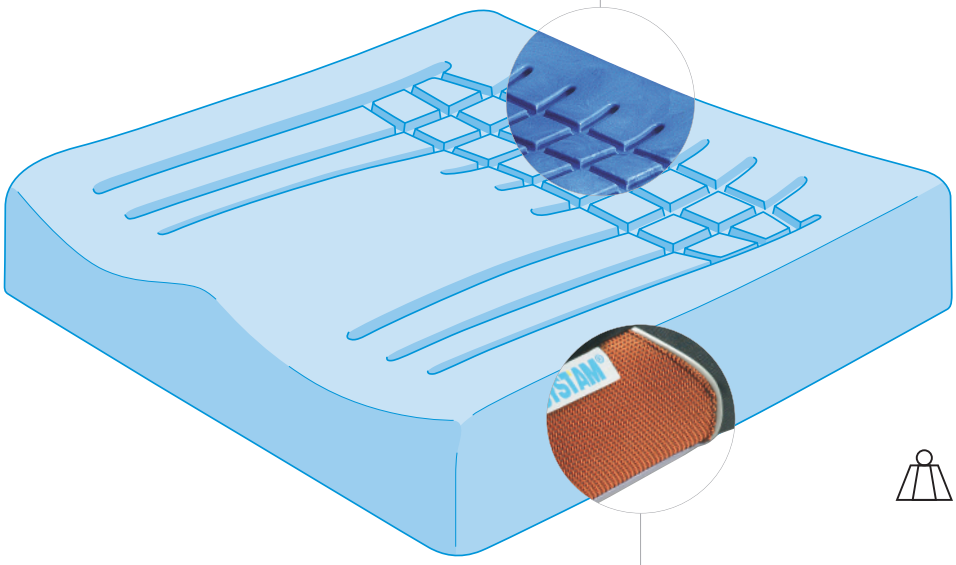

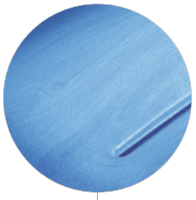

- Chrání výrobek před vnějšími vlivy.


ULTRALEHKÉ


ГАН

- Snižuje účinky macerace usnadněním kožní
- Nepropustný materiál


ANATOMICKÝ TVAR SE ZVÝŠENÝMI BOČNÍMI OKRAJI

- Zvětšuje kontaktní plochu a tím snižuje tlaky.

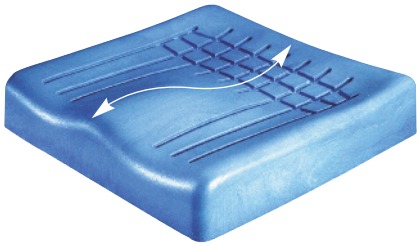

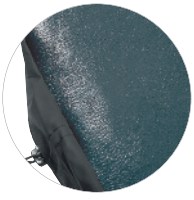

- Brání posunu sedáku po podkladu (pouze POLYMAILLE® pouze).

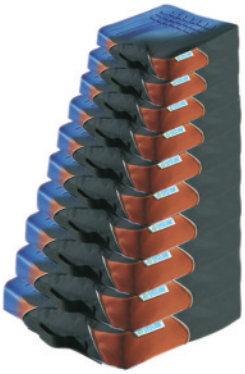

DOSTUPNÉ V 10 RŮZNÝCH ROZMĚRECH

SYST'AM® P361CA / SEDÁK VISCOFLEX®+

ANATOMICKY TVAROVANÝ SEDÁK Z VISKOELASTICKÉ PAMĚŤOVÉ PĚNY S ERGONOMICKOU VLOŽKOU

MATERIÁLY



Viskoelastická pěna



HR pěna



Snímatelný POLYMAILLE® potah



Snímatelný POLYMAILLE®***HD*** potah

NF EN ISO 597 - 1 a 2

Údržba pěny:

(Neponořujte do vody)

Čištění potahu:

Čištění potahu POLYMAILLE® HD:

INDIKACE

Riziko

NÍZKÉ — VELMI VYSOKÉ

Sedák P361CA / VISCOFLEX®+ lze lze použít, pokud:

- 1- Je již přítomen dekubitus (stupeň I až III dle EPUAP).
  Pacient může měnit polohu vsedě nebo jsou tlakové body odlehčovány ošetřovatelskou péčí. Nebo
- 2- Je přítomno zvýšené až velmi vysoké riziko dle hodnotící škály (Braden, Norton, Waterlow, ...).
  Sedák P361CA / VISCOFLEX®+ je vhodný pro pacienty:
  s anamnézou dekubitu v oblasti kontaktu se sedací plochou, a/nebo s úplnou či částečnou paralýzou trupu nebo dolních končetin a/nebo s poruchou či ztrátou čití dolní končetiny a/nebo se zhoršenou frontální stabilitou a/nebo s lehkými posturálními asymetriemi a/nebo s cévní amputací a/nebo se špatným celkovým stavem.


Sedák lze použít na různých sedacích podložkách bez úprav.



Pohled na strukturu uvnitř sedáku.



DOSTUPNÉ VERZE

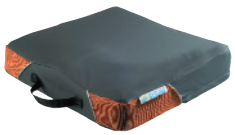

P361CA / VISCOFLEX®
sedák s potah POLYMAILLE®.



P361CA / VISCOFLEX®+
sedák s potah POLYMAILLE® HD (se svařovanými švy).



P361CP / VISCOFLEX®+
sedák s abdukčním klínem s potahem POLYMAILLE®, pro pacienta s deficitem stability



P361CA / VISCOFLEX®+
bariatrický sedák pro bariatrické pacienty

OZNAČENÍ	KÓD POLOŽKY	W L (W x L - cm / inches)	min - MAX (kg / lbs)
P361CA / sedák VISCOFLEX®+ s potahem POLYMAILLE®	P361CA32321HW	32 x 32 cm / 13 x 13''	15 - 50 kg / 33 - 110 lbs
	P361CA36361HW	36 x 36 cm / 14 x 14''	30 - 50 kg / 66 - 110 lbs
	P361CA38381HW	38 x 38 cm / 15 x 15''	30 - 90 kg / 66 - 198 lbs
	P361CA38431HW	38 x 43 cm / 15 x 17''	30 - 90 kg / 66 - 198 lbs
	P361CA40401HW	40 x 40 cm / 15,5 x 15,5''	40 - 100 kg / 88 - 220 lbs
	P361CA42421HW	42 x 42 cm / 16 x 16''	40 - 100 kg / 88 - 220 lbs
	P361CA42461HW	42 x 46 cm / 16 x 18''	40 - 110 kg / 88 - 242 lbs
	P361CA42501HW	42 x 50 cm / 16 x 19''	40 - 150 kg / 88 - 330 lbs
	P361CA45421HW	45 x 42 cm / 18 x 16''	40 - 110 kg / 88 - 242 lbs
	P361CA45461HW	45 x 46 cm / 18 x 18''	40 - 130 kg / 88 - 286 lbs
	P361CA45501HW	45 x 50 cm / 18 x 19''	40 - 150 kg / 88 - 330 lbs
	P361CA48431HW	48 x 43 cm / 19 x 17''	60 - 140 kg / 88 - 308 lbs
	P361CA51461HW	51 x 46 cm / 20 x 18''	60 - 150 kg / 132 - 330 lbs
	P361CA51501HW	51 x 50 cm / 20 x 20''	60 - 160 kg / 132 - 352 lbs
	P361CA56461HW	56 x 46 cm / 22 x 18''	60 - 230 kg / 132 - 507 lbs
	P361CA61501HW	61 x 50 cm / 24 x 20''	80 - 270 kg / 176 - 595 lbs
P361CP / sedák VISCOFLEX®+ s abdukčním klínem a potahem POLYMAILLE®	P361CP42421HW	42 x 42 cm / 16 x 16''	40 - 100 kg / 88 - 220 lbs
	P361CP45421HW	45 x 42 cm / 18 x 16''	40 - 110 kg / 88 - 242 lbs
	P361CP45461HW	45 x 46 cm / 18 x 18''	40 - 130 kg / 88 - 286 lbs
P361CA / sedák VISCOFLEX®+ **s potahem POLYMAILLE® HD**	P361CA40401HF	40 x 40 cm / 15,5 x 15,5''	40 - 100 kg / 88 - 220 lbs
	P361CA42421HF	42 x 42 cm / 16 x 16''	40 - 100 kg / 88 - 220 lbs
	P361CA42461HF	42 x 46 cm / 16 x 18''	40 - 110 kg / 88 - 242 lbs
	P361CA45421HF	45 x 42 cm / 18 x 16''	40 - 110 kg / 88 - 242 lbs
	P361CA45461HF	45 x 46 cm / 18 x 18''	40 - 130 kg / 88 - 286 lbs
	P361CA48431HF	48 x 43 cm / 19 x 17''	60 - 140 kg / 88 - 308 lbs
	P361CA51461HF	51 x 46 cm / 20 x 18''	60 - 150 kg / 132 - 330 lbs
	P361CA51501HF	51 x 50 cm / 20 x 20''	60 - 160 kg / 132 - 352 lbs
	P361CA56461HF	56 x 46 cm / 22 x 18''	60 - 230 kg / 132 - 507 lbs


WARRANTY 2 ROKY

SYST'AM® P361CA / SEDÁK VISCOFLEX®+



- Přesné přizpůsobení tvaru těla a zvětšení kontaktní plochy těla se
- Lepší rozložení tlaku: snížení transkutánních tlaků v oblastech s
- Povrchový efekt dosažený tvarováním: ochrana pěny proti
- Velmi vysoká hustota omezuje deformaci a prosednutí.

VÝZNAMNÉ SNÍŽENÍ MAXIMÁLNÍHO TLAKU V RIZIKOVÝCH OBLASTECH

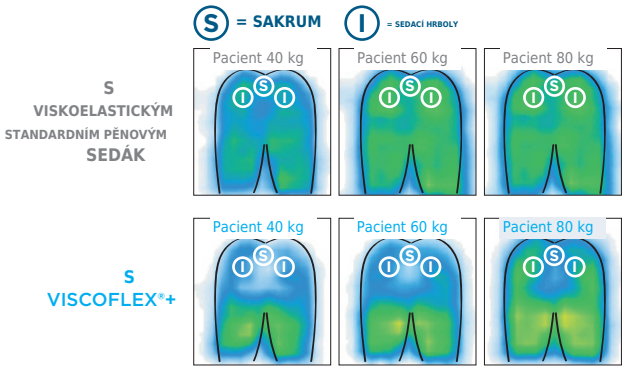


ANATOMICKÝ TVAR SE ZVÝŠENÝMI BOČNÍMI OKRAJI


- Zvětšuje kontaktní plochu a tím snižuje tlaky. Zvětšuje kontaktní plochu a tím snižuje tlaky.

VLOŽKA: INOVATIVNÍ KONCEPCE S ERGONOMICKOU

- Je vyrobena z pěny s vysokou nosností a tvoří konstrukční základ sedáku. Funguje jako kostra sedáku, která rozděluje nosnost do jednotlivých
- Umožňuje optimální zaboření kostních prominencí (sakrum, sedací hrboly) do materiálu: zajišťuje dostatečné zaboření rizikové oblasti, ale současně kontrolované a stabilizované ponoření před dosažením limitu prosednutí.

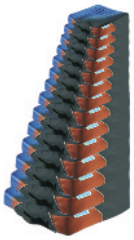

DOSTUPNÉ V 16 RŮZNÝCH ROZMĚRECH

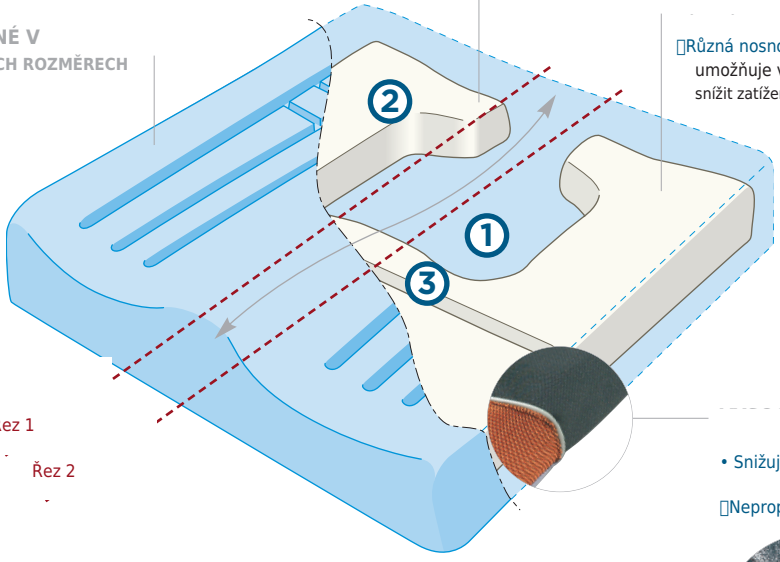



- Různá nosnost v přední a zadní části vložky umožňuje vyvážit pacienta vsedě, a tím snížit zatížení v oblasti sedacích hrbolů.

ULTRALEHKÉ

TAH

- Snižuje účinky macerace usnadněním
- Nepropustný materiál

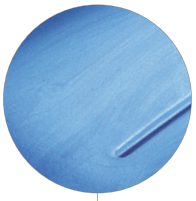


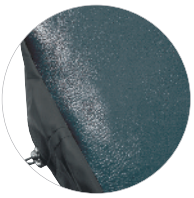

- Brání posunu sedáku po podkladu (pouze POLYMAILLE®).

- Chrání výrobek před vnějšími vlivy.


1

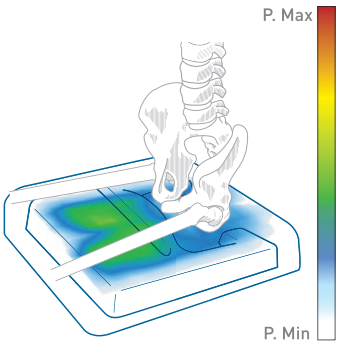

SNÍŽENÍ ZÁTĚŽE V RIZIKOVÝCH


- Chráněné rizikové oblasti (sakrum / sedací hrboly), i v případě retroverze pánve, umožňují částečné odlehčení kostních prominencí jejich zabořením.

2 (ŘEZ 1)

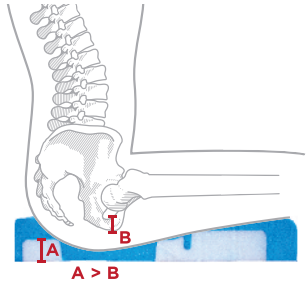

- Rozkládá tlak do periferní oblasti hýždí, stabilizuje zaboření pánve a brání dosažení zóny prosednutí.

3 (ŘEZ 2)

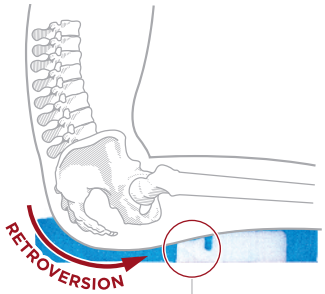

- Blokuje sedací hrboly a brání sklouzávání vpřed.

VLASTNOSTI P361CP / VISCOFLEX®+ S ABDUKČNÍM KLÍNEM

INOVATIVNÍ STABILIZAČNÍ ABDUKČNÍ KLÍN, NASTAVITELNÝ

- Na rozdíl od jiných systémů. které vkládají klín dovnitř potahu sedáku.
- Usnadňuje nastavení a seřízení pomůcky pod pacientem
- Usnadňuje přesun z vozíku tím, že umožňuje okamžité a snadné odstranění stabilizačního klínu.

- Textilie potažená pružným, měkkým polyuretanem je navržena ke snížení účinku tření v rizikových bodech.

PREVENCE SKLOUZÁVÁNÍ VPŘED (SAGITÁLNÍ

- Prevence pádů a skutečná alternativa k imobilizačním pomůckám








- Respektuje přirozený úhel rozevření dolních končetin (distální část je užší než
- Umožňuje hluboké a beznámahové zavedení klínu zdravotnickým personálem a současně maximální komfort pacienta díky zvlášť úzkému subpubickému zakončení.



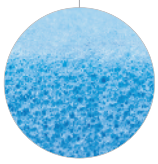

- Bez ostrých hran, čímž snižuje zóny střižných sil a
- Vysoce pružná pěna pro optimální komfort v tlakových zónách.

- Zvyšuje jistotu pacientů se sklonem ke sklouzávání vpřed nebo pádu ze sedu tím, že udržuje sedák v poloze i přes tlak působící na přední část sedáku.



zajišťuje maximální elevaci.

- Nastavení klínu je pro ošetřující personál zvlášť snadné díky tomu, že klín je zcela oddělený od sedáku.



DOSTUPNÉ VE 3 VELIKOSTECH

LEARN MORE

POLOHA A SKLOUZÁVÁNÍ VPŘED V GERIATRII

Sklouzávání vpřed v poloze vsedě je velmi častý posturální deficit v geriatrii. Ačkoli byly sakrokokcygeální dekubity dlouho připisovány výhradně poloze vleže na zádech, dnes je sklouzávání vpřed v poloze vsedě uznáváno jako významný rizikový faktor sakrokokcygeálních dekubitů v geriatrii.

Proto je nezbytné předepsat podpůrný sedák ihned při výskytu sklouzávání vpřed.



NESPRÁVNÁ POLOHA
(riziko sakrálních dekubitů)




SPRÁVNÁ POLOHA

PŘÍČINY SKLOUZÁVÁNÍ VPŘED

- Sklouzávání vpřed je způsobeno posturálními deficity, které mohou být hypertonické (retropulze, náklon pánve) nebo hypotonické (oslabené paravertebrální svaly,
- Obvyklými příčinami sklouzávání vpřed bývají psychomotorická regrese, výrazná dorzální anatomie nebo reakce na bolest v tlakových bodech.

RIZIKA SPOJENÁ SE SKLOUZÁVÁNÍM VPŘED

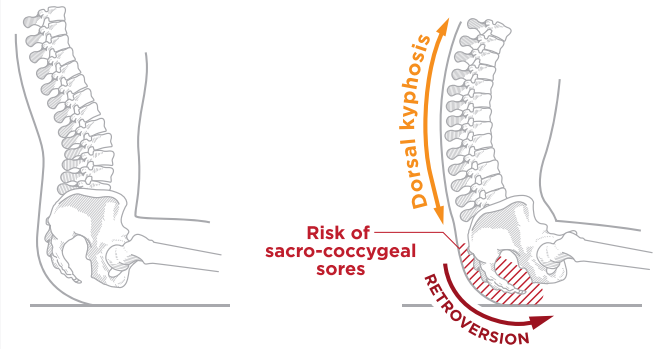

- Mnohé studie ukazují, že stárnutí je provázeno nárůstem hrudní kyfózy a ztrátou bederní lordózy, přičemž pánev se mezi
- V poloze vsedě jsou oploštění bederní lordózy a fyziologický náklon pánve
- Při sklouzávání vpřed je retroverze pánve dostatečně výrazná k vyvolání
- Navíc při posunu pánve vpřed v sedu vytváří hmotnost horní části těla střižné síly podporující
- Celkově je sklouzávání vpřed v sedu významným rizikovým faktorem sakro-kokcygeálních dekubitů v geriatrii.

- Sklouzávání vpřed v sedu postupně zvyšuje zakřivení hrudní kyfózy, a tím omezuje rozvinutí hrudníku a pohyblivost bránice. Respirační kapacita je tím zřetelně snížena.

POSTURA A POLOHA VSEDĚ

- U těchto starších pacientů je proto nezbytné udržet stabilní posturu ve zvýšeném sedu s cílem zabránit vzniku sakrokokcygeálních
- Sklouzávání vpřed stabilizované pánevním klínem blokuje pánev v
- Tento klín však musí být hloubkově nastavitelný ve velkém rozsahu
- Je to nezbytné, protože jakákoli stabilizace ponechávající i mírné sklouznutí
- Zadní část klínu je nutně zakřivená a zúžená tak, aby odpovídala anatomickému tvaru pánve a zabránila zvýšenému tlaku v oblasti
- Pánevní klín, který lze snadno vyjmout bez úplného či částečného snímání potahu sedáku, výrazně usnadňuje jeho vyjmutí při přesunech.

- V praxi se v geriatrických zařízeních stále často používají omezovací prostředky
- Existují různé postupy: úvazy, fixační prostředky, manžety, vesty, postroje,
- Zpráva A.N.A.E.S. (výbor expertů) doporučuje používat alternativní
- Bylo prokázáno, že omezovací prostředky zvyšují agitovanost, tlak na břicho a diskomfort pacientů a pacienti i jejich okolí je vnímají jako
- Odhadem 1/1000 úmrtí je považováno za související s omezovacími prostředky, z nichž 58 % bylo použito
- Posturální sedák nabízí řešení sklouzávání vpřed při současné podpoře bezpečnosti pacienta a zachování jeho důstojnosti.

SYST'AM® P361CR / SEDÁK VISCOFLEX® AIR


NASTAVITELNÝ ANATOMICKY TVAROVANÝ SEDÁK Z VISKOELASTICKÉ PĚNY SE VZDUCHOVOU VLOŽKOU

MATERIÁLY

80 kg/m³



Viskoelastická pěna

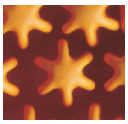

Laxprene®



Snímatelný POLYMAILLE® potah



Snímatelný POLYMAILLE®***HD*** potah

NF EN ISO 597 - 1 a 2

Údržba pěny:

(Neponořujte do vody)

Čištění potahu:

Čištění potahu POLYMAILLE® HD:

INDIKACE

Riziko

NÍZKÉ — VELMI VYSOKÉ


Sedák P361CR / VISCOFLEX® Air lze použít, pokud:

- 1- Je již přítomen dekubitus (stupeň I až IV dle EPUAP). Pacient může měnit polohu vsedě nebo jsou tlakové body odlehčovány ošetřovatelskou péčí. Nebo
- 2- Je přítomno zvýšené až velmi vysoké riziko dle hodnotící škály (Braden, Norton, Waterlow, ...). Sedák P361CR / VISCOFLEX® Air je vhodný pro pacienty: s anamnézou dekubitu v oblasti kontaktu se sedací plochou, a/nebo s úplnou či částečnou paralýzou trupu nebo dolních končetin a/nebo s poruchou či ztrátou čití dolní končetiny a/nebo se špatným celkovým stavem.

Sedák lze použít na různých sedacích podložkách bez úprav.



SYST'AM PATENTED SYST'AM

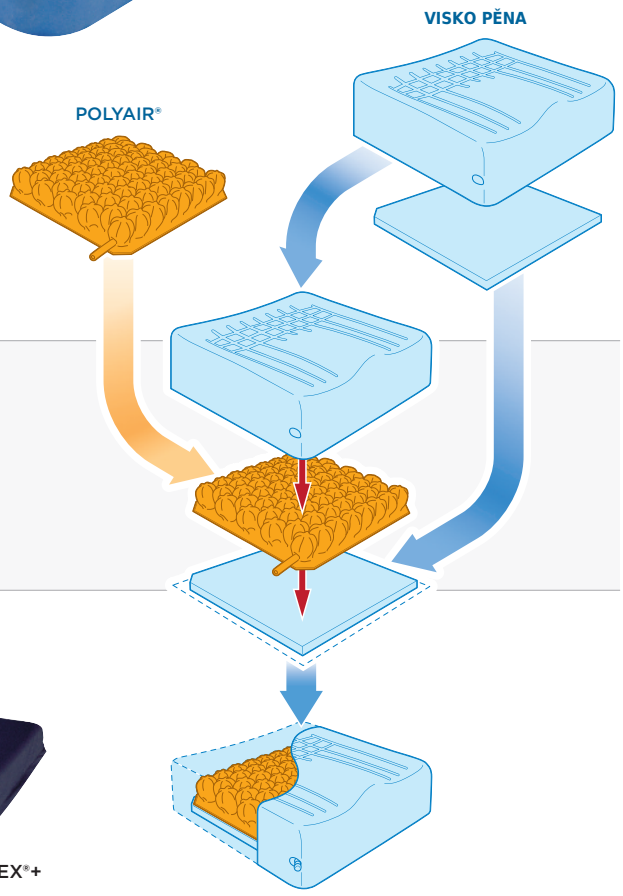

ÚČINNOST
TECHNOLOGIE VZDUCHOVÝCH BUNĚK
SPOJENÁ S KOMFORTEM
VISKOELASTICKÉ PĚNY
S PAMĚŤOVÝM EFEKTEM

DOSTUPNÉ VERZE



P361CR / VISCOFLEX® sedák s potah POLYMAILLE®.




P361CR / VISCOFLEX®+ sedák s potah POLYMAILLE® HD (se svařovanými švy).

OZNAČENÍ	KÓD POLOŽKY	W L (W x L - cm / inches)	min - MAX (kg / lbs)
P361CR / sedák VISCOFLEX® Air s potahem POLYMAILLE®	P361CR4242HW	42 x 42 cm / 16 x 16"	30 - 110 kg / 66 - 242 lbs
	P361CR4542HW	45 x 42 cm / 18 x 16"	40 - 120 kg / 88 - 264 lbs
	P361CR4546HW	45 x 46 cm / 18 x 18"	40 - 140 kg / 88 - 308 lbs
P361CR / sedák VISCOFLEX® Air **s potahem POLYMAILLE® HD**	P361CR4242HF	42 x 42 cm / 16 x 16"	30 - 110 kg / 66 - 242 lbs
	P361CR4542HF	45 x 42 cm / 18 x 16"	40 - 120 kg / 88 - 264 lbs
	P361CR4546HF	45 x 46 cm / 18 x 18"	40 - 140 kg / 88 - 308 lbs

CE WARRANTY 2 YEARS

SYST'AM® P361CR / SEDÁK VISCOFLEX® AIR

SEDÁK POLYAIR®

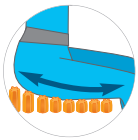






- POLYAIR® se přizpůsobuje všem anatomickým typům, zejména díky vnitřní ventilaci vzduchových kanálků, která umožňuje sedáku rychle se přizpůsobit morfologii pacienta a chránit před

Zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku.

VISCOFLEX®


TVAROVANÁ VISKOELASTICKÁ PĚNA S PAMĚŤOVÝM EFEKTEM



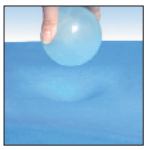




- Přesné přizpůsobení tělu a zvětšení
- Lepší rozložení tlaku: snížení transkutánních tlaků v rizikových oblastech a usnadnění
- Povrchový efekt dosažený tvarováním: ochrana pěny proti vnějším vlivům (trhání,
- Velmi vysoká hustota omezuje deformaci a prosednutí.

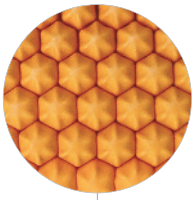

, MODERNÍ MATERIÁL

- Udržení tlaku

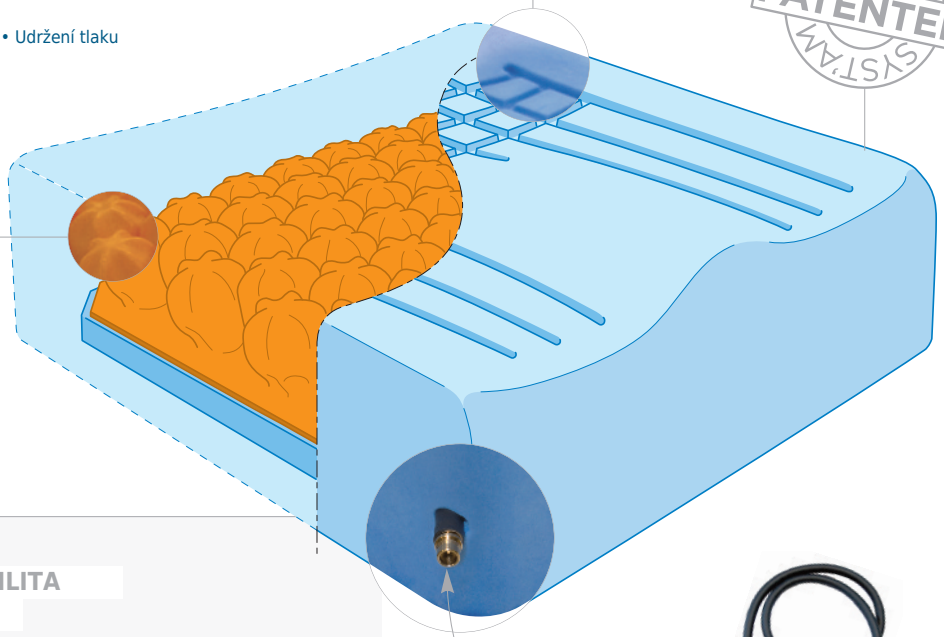

SYST'AM PATENTED SYST'AM

ZVÝŠENÁ STABILITA A KOMFORT

NASTAVITELNÉ, TLUMENÁ PREVENCE

zaboření.

Vhodné pro zdravotní postižení i geriatrii.

VRSTVA „PROTI PROSEDNUTÍ“

Viskoelastická pěna.



DODÁVÁNO SE SYSTÉMEM HUŠTĚNÍ


OVLADATELNÝM JEDNOU RUKOU

PRO JEDNODUCHÉ A SNADNÉ NASTAVENÍ



nafukujte nebo vypouštějte vsedě.

Bez úniku vzduchu

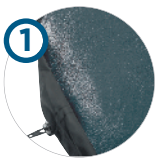

- Protiskluzová spodní strana: brání posunu sedáku
- Nepropustný materiál (propustný pro vodní páru a vzduch):
- Snižuje účinky macerace usnadněním kožní




- Boční průchodky 2:
  - umožňují zasunout ventily do sedáku po nafouknutí

SYST'AM® P301C A P302C / SEDÁK POLYAIR®

PNEUMATICKÝ SEDÁK SE VZDUCHOVÝMI BUŇKAMI / JEDNA NEBO DVĚ KOMORY

MATERIÁLY

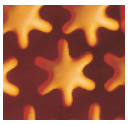

Laxprene®



Snímatelný POLYMAILLE® potah

NF EN ISO 597 - 1 a 2

Údržba pěny:

(Neponořujte do vody)

Čištění potahu:


INDIKACE

Riziko

NÍZKÉ — VELMI VYSOKÉ

Sedák P301 - P302C / POLYAIR®
lze použít, pokud:

- 1- Je již přítomen dekubitus (stupeň I až IV dle EPUAP).
  Nebo
- 2- Je přítomno zvýšené až velmi vysoké riziko dle hodnoticí škály (Braden, Norton, Waterlow, ...). přítomno. POLYAIR® sedák nezbytná vhodný pro pacienty s anamnézou dekubitu v oblasti kontaktu se sedací plochou a/nebo s úplnou či částečnou paralýzou trupu nebo dolní končetiny, a/nebo s poruchou nebo ztrátou čití dolní končetiny, a/nebo s spasticitou/kontrakturami a/nebo se zhoršenou frontální a laterální stabilitou, a/nebo s posturálními asymetriemi, nestabilitou pánve a/nebo s cévní amputací a/nebo se špatným celkovým stavem.

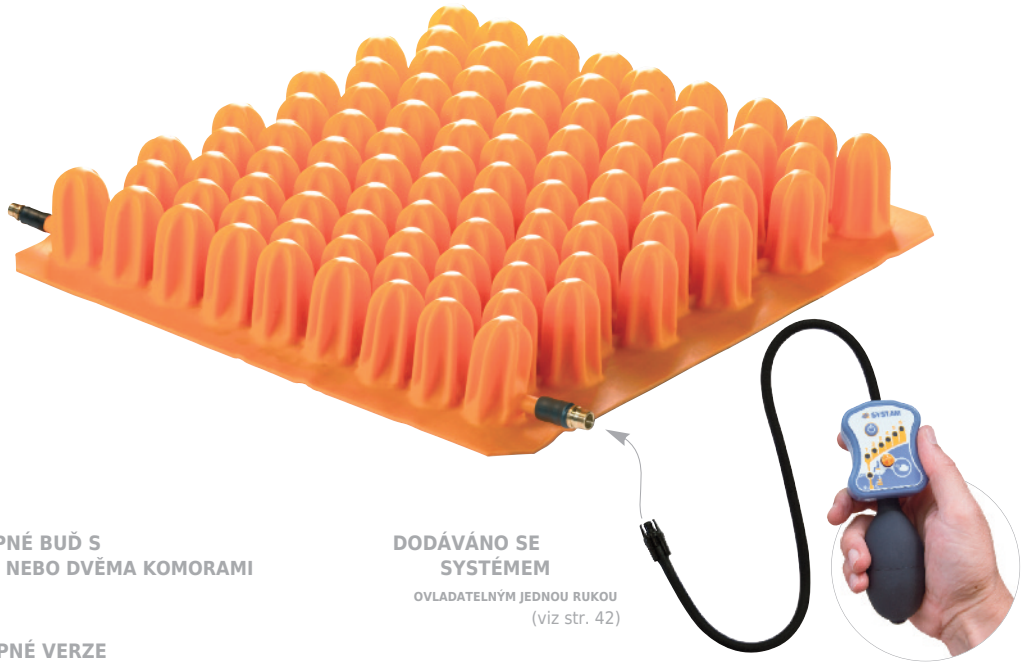

DOSTUPNÉ BUĎ S JEDNOU NEBO DVĚMA KOMORAMI

DODÁVÁNO SE SYSTÉMEM
OVLADATELNÝM JEDNOU RUKOU
(viz str. 42)

DOSTUPNÉ VERZE



P301C / POLYAIR®
s potahem POLYMAILLE®.



P302C / POLYAIR®
s potahem POLYMAILLE®.



P301C-*M* / POLYAIR®
jedna komora
s potahem POLYMAILLE®.



P302C-*M* / POLYAIR®
jedna komora
s potahem POLYMAILLE®.

OZNAČENÍ	KÓD POLOŽKY	W x L - cm / inches	min - MAX (kg / lbs)	MĚŘENÍ OBVODU HÝŽDÍ (cm / palce)
P301C / POLYAIR® 60 s potahem POLYMAILLE®	P301C36361HW	36 x 36 /14 x 14"	20 - 60 / 44 - 132	50 - 75 / 19 - 29
	P301C40401HW	40 x 40 / 16 x 16"	30 - 80 / 66 - 176	75 - 95 / 29 - 37
	P301C40431HW	40 x 43 / 16 x 17"	30 - 90 / 66 - 198	75 - 115 / 29 - 45
	P301C40461HW	40 x 46 / 16 x 18"	30 - 110 / 66 - 242	75 - 115 / 29 - 45
	P301C43431HW	43 x 43 / 17 x 17"	30 - 110 / 66 - 242	95 - 115 / 37 - 45
	P301C43461HW	43 x 46 / 17 x 18"	30 - 120 / 66 - 264	95 - 135 / 37 - 53
	P301C46401HW	46 x 40 / 18 x 16"	40 - 120 / 88 - 264	95 - 135 / 37 - 53
	P301C46461HW	46 x 46 / 18 x 18"	40 - 140 / 88 - 308	115 - 135 / 45 - 53
	P301C51461HW	51 x 46 / 20 x 18"	40 - 160 / 88 - 352	135 - 155 / 53 - 61
	P301C51501HW	51 x 50 / 20 x 20"	40 - 180 / 88 - 396	135 - 155 / 53 - 61
	P301C56461HW	56 x 46 / 22 x 18"	60 - 230 / 132 - 507	155 / 61 and +
	P301C61501HW	61 x 50 / 24 x 20"	80 - 270 / 176 - 595	155 / 61 and +
P302C / POLYAIR® 100 s potahem POLYMAILLE®	P302C40401HW	40 x 40 / 16 x 16"	40 - 80 / 88 - 176	75 - 95 / 29 - 37
	P302C40431HW	40 x 43 / 16 x 17"	40 - 90 / 88 - 198	75 - 115 / 29 - 45
	P302C40461HW	40 x 46 / 16 x 18"	40 - 120 / 88 - 264	75 - 115 / 29 - 45
	P302C43431HW	43 x 43 / 17 x 17"	40 - 110 / 88 - 242	75 - 115 / 29 - 45
	P302C43461HW	43 x 46 / 17 x 18"	40 - 120 / 88 - 264	95 - 135 / 37 - 53
	P302C46401HW	46 x 40 / 18 x 16"	40 - 120 / 88 - 264	95 - 135 / 37 - 53
	P302C46461HW	46 x 46 / 18 x 18"	40 - 140 / 88 - 308	115 - 135 / 45 - 53
	P302C51461HW	51 x 46 / 20 x 18"	40 - 160 / 88 - 352	135 - 155 / 53 - 61
	P302C51501HW	51 x 50 / 20 x 20	40 - 180 / 88 - 396	135 - 155 / 53 - 61
	P302C56461HW	56 x 46 / 22 x 18"	60 - 230 / 132 - 507	155 / 61 and +
	P302C61501HW	61 x 50 / 24 x 20"	80 - 270 / 176 - 595	155 / 61 and +
P301C-*M* / POLYAIR® 60 Jedna komora, s potahem POLYMAILLE®	P301CM40401HW	40 x 40 / 16 x 16	30 - 80 / 66 - 175	75 - 95 / 29 - 37
	P301CM43431HW	43 x 43 / 17 x 17	30 - 110 / 66 - 240	95 - 115 / 37 - 45
	P301CM46461HW	46 x 46 / 18 x 18	40 - 140 / 88 - 310	115 - 135 / 45 - 53
P302C-*M* / POLYAIR® 100 Jedna komora, s potahem POLYMAILLE®	P302CM40401HW	40 x 40 / 16 x 16	40 - 80 / 88 - 175	75 - 95 / 29 - 37
	P302CM43431HW	43 x 43 / 17 x 17	40 - 110 / 88 - 240	95 - 115 / 37 - 45
	P302CM46461HW	46 x 46 / 18 x 18	40 - 140 / 88 - 310	115 - 135 / 45 - 53

CE WARRANTY 2 ROKY

SYST'AM® P301C A P302C / SEDÁK POLYAIR®

- Zajišťuje maximální kontakt pacienta se sedací plochou tím, že se tvarově přizpůsobuje prominencím v sakrální oblasti. Tím dochází k velmi účinnému snížení hodnot transkutánního tlaku (měřeno 3D zařízeními pro mapování tlaku) v

- POLYAIR® se přizpůsobuje všem anatomickým typům, zejména díky vnitřní vzduchové ventilaci kanálků, která umožňuje sedáku rychle se přizpůsobit

- POLYAIR® je účinné řešení prevence dekubitů ve vysoce rizikových

- POLYAIR® je stejně účinný proti účinkům macerace, tření a střižných sil díky:
  - zlepšenému provzdušnění rizikových oblastí;
  - snížení deformace tkání;
  - zvýšené stabilitě díky voštinové konstrukci.

PRINCIP FUNKCE

- POLYAIR® se přizpůsobuje všem anatomickým typům, zejména díky vnitřní vzduchové ventilaci kanálků, která umožňuje sedáku rychle se přizpůsobit morfologii pacienta a chránit tkáně před poškozením.


- Zajišťuje rovnoměrný tlak ve všech komorách.

- Ventilační kanálky zlepšují odvětrávání.



- Bez úniku vzduchu



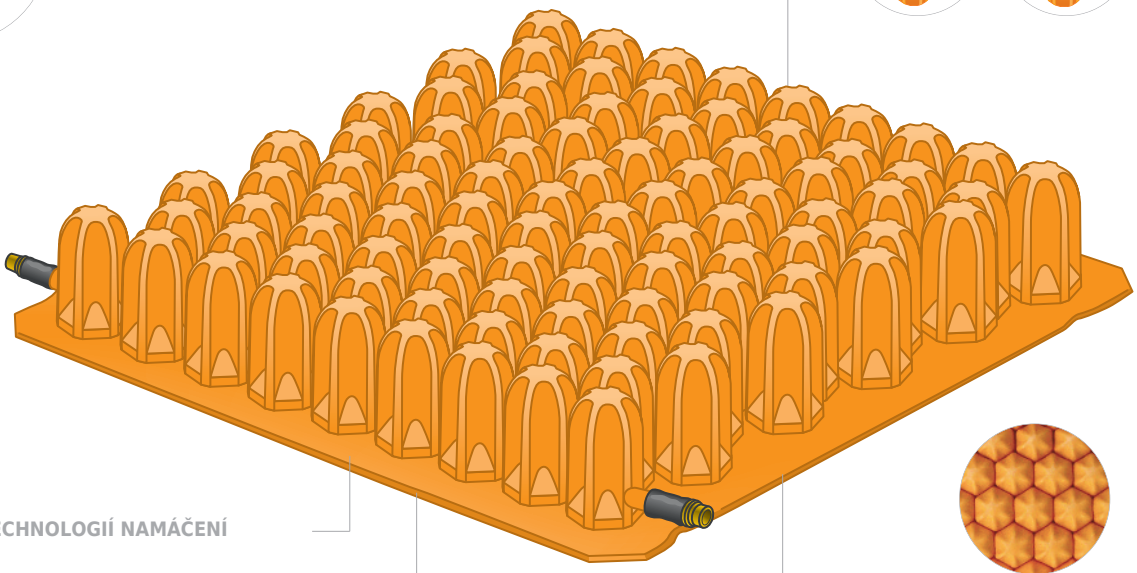

VYROBENO TECHNOLOGIÍ NAMÁČENÍ
(viz str. 42)

LAXPRENE®, MODERNÍ MATERIÁL
(viz str. 42)

VOŠTINOVÁ KONSTRUKCE
(viz str. 43)



INOVACE SYST'AM®
DODÁVÁNO S ELEKTRONICKÝM JEDNORUČNÍM

- Tlakoměr je kompletně navržen a vyroben společností SYST'AM® a speciálně

- Plně elektronický měřicí systém je mimořádně přesný a specifický

- Na rozdíl od membránových tlakoměrů (např. převzatých z kardiologie jsou měření s elektronickým snímačem nejen přesnější, ale také spolehlivější a reprodukovatelnější, protože nehrozí deformace nebo opotřebení membrány. Výsledkem je mnohem přesnější huštění. Snadné

- Nové provedení činí příslušenství ergonomičtějším, lehčím, jednodušším a snazším

- Jednoruční pumpa a konektor Click-fit.

SYST'AM® P301C A P302C / SEDÁK POLYAIR®



Rychlé a přesné nahuštění, díky tabulce huštění a tlakovému manometru

1. • Pro stanovení hodnoty nahuštění je potřeba znát hmotnost pacienta.



2. • Měření vzniku obvodu určuje pánevního kontaktní plochu se sedákem.




3. • Zkřižte hmotnost a obvod hýždí v tabulce huštění a odečtěte nastavení huštění pro účinnou prevenci dekubitů.



• Přehuštěný nebo podhuštěný sedák může vést ke vzniku

• Protože rozdíly v nahuštění uvnitř každé komory (několik mmHg) nelze rozpoznat hmatem, jediným způsobem správného huštění sedáků se vzduchovými buňkami je použití pomůcek, jako je tlakový manometr.
Pouze manometr dokáže zohlednit hmotnost a kontaktní plochu pacienta se sedákem. Tato metoda poskytující konstantní výsledky zajišťuje účinnou prevenci.


SEDÁK NAFOUKNUTÝ RUČNĚ

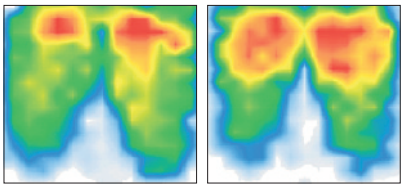

PODHUŠTĚNÝ SEDÁK PŘEHUŠTĚNÝ SEDÁK

NEÚČINNÉ

NAFOUKNUTÝ SEDÁK POLYAIR® S TLAKOMĚREM

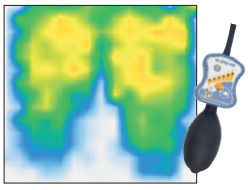

ÚČINNÁ PREVENCE


POLYAIR®: SEDÁK VYROBENÝ TECHNOLOGIÍ NAMÁČENÍ

Níže uvedená měření byla provedena se stejným pacientem sedícím na dvou různých typech sedáku (sedák vyrobený technologií namáčení a sedák tvarovaný kompresí), oba nafouknuté na několik různých úrovní tlaku.




ní


Přizpůsobivý, s progresivní reakcí na huštění

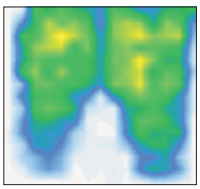

Tlak 30 mmHg

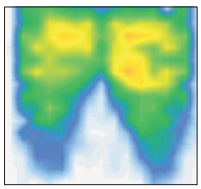

Tlak 40 mmHg

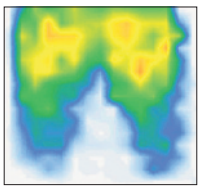


Tlak 50 mmHg




ení


Tendence tvrdnout při nafouknutí.

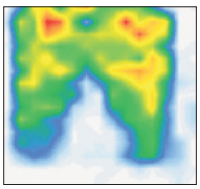

Tlak 30 mmHg

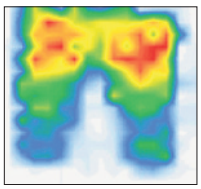

Tlak 40 mmHg

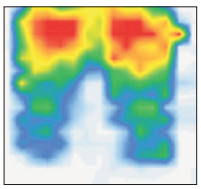

Tlak 50 mmHg


• Laxprene® byl vyvinut ze specifické směsi navržené tak, aby nabízel:
- měkkost,
- odolnost proti roztržení,

• Odolnost byla hlavním faktorem při volbě materiálu Laxprene®
Tento materiál činí POLYAIR ® vysoce odolným proti rozsáhlému roztržení (více odolným než neoprén a polychloropreny).

Vlastnosti a účinnost materiálu Laxprene

Materiál Laxprene® byl speciálně vyvinut společností SYST'AM® pro dosažení:
- nealergenního materiálu (Laxprene® ≠ latex);


• Protože je navíc Laxprene® zpracován technologií namáčení.
POLYAIR® získává vysokou měkkost a zajišťuje dokonalou odezvu na tlak tlaku.

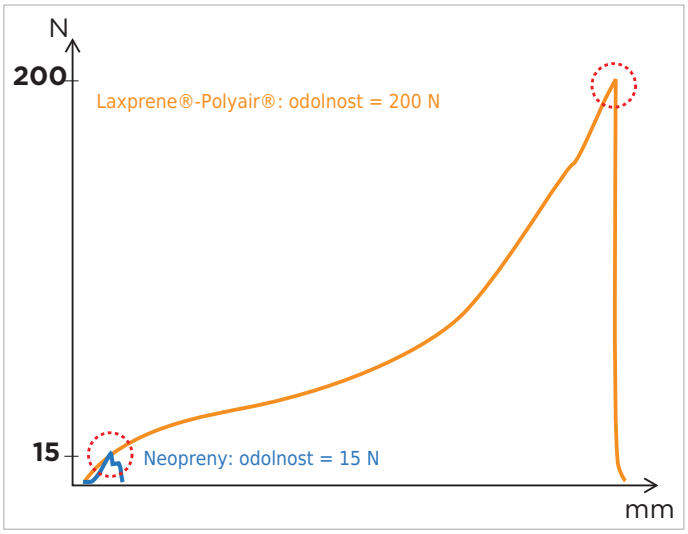

SYST'AM® P301C A P302C / SEDÁK POLYAIR®


- Voštinová konstrukce optimalizuje hustotu vzduchových buněk a zlepšuje kontaktní plochu s výrazným zabořením a rozložením tlaku s cílem minimalizovat kožní tlaky.

VZDUCHOVÉ BUŇKY
SEDÁK

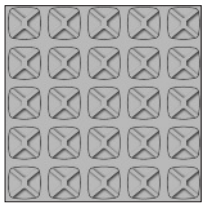


16 až 25 buněk

POLYAIR®

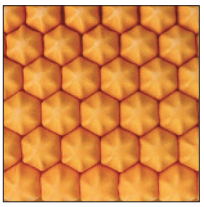

30 buněk

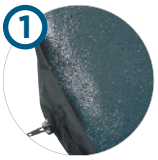


- Protiskluzová spodní strana: brání posunu sedáku po
- Nepropustný materiál (propustný pro vodní páru a vzduch):
- Snižuje účinky macerace usnadněním kožní




- Boční průchodky 2:
  - umožňují zasunout ventily do sedáku po nafouknutí;
  - usnadňuje proudění vzduchu mezi vnitřkem a vnějškem potahu, čímž snižuje účinky macerace díky zlepšené ventilaci sedáků.

DOSTUPNÉ VE DVOU RŮZNÝCH VÝŠKÁCH



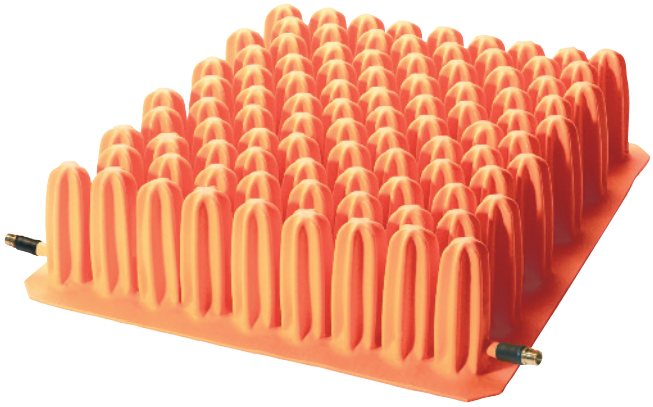


- P301C / POLYAIR® 60 je nejvhodnější pro menší, částečně aktivní pacienty, kteří si samostatně dokáží přenést váhu a při přesunu vyžadují malou nebo žádnou pomoc.

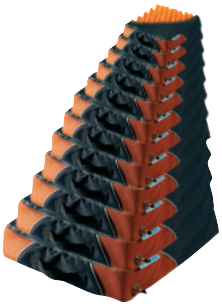


DOSTUPNÉ V
12 RŮZNÝCH ROZMĚRECH

- P302C / POLYAIR® 100 je nejvhodnější pro větší, méně aktivní pacienty s velmi omezenou mobilitou, kteří mají vysoké riziko vzniku dekubitů nebo již dekubity mají.

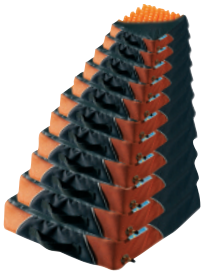


DOSTUPNÉ V
11 RŮZNÝCH ROZMĚRECH

DOSTUPNÉ SE DVĚMA NEBO JEDNOU KOMOROU

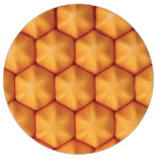

Verze s jednou komorou

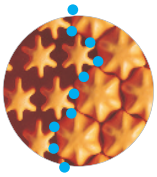


e dvěma komorami


- Obě komory jsou zcela
- Zlepšená stabilita a komfort.

DVĚ KOMORY
SPECIFIKA VERZE

- Všechny sedáky POLYAIR® mají dvojité komory (levou a pravou), které pracují nezávisle na sobě. Pomocí přiloženého manometru a tlakové tabulky
- Toto provedení je zvlášť užitečné při korekci nerovnováhy pánve a současně poskytuje vyšší stabilitu a komfort.

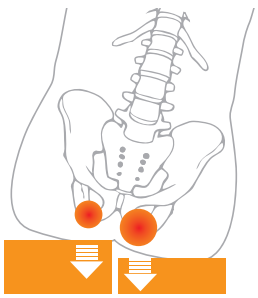

Nerovnováha pánve

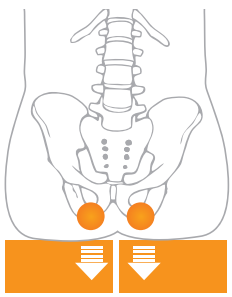

Vyvážení: zlepšuje stabilitu a polohu

SYST'AM® P951D / ZÁDOVÁ OPĚRKA A TERAPEUTICKÉ KOMBI BALÍČKY

ZÁDOVÁ OPĚRKA Z VISKOELASTICKÉ PAMĚŤOVÉ PĚNY S VÍCEZÓNOVOU OPĚRNOU PLOCHOU

MATERIÁLY

80 kg/m³



Viskoelastická pěna



Snímatelný POLYMAILLE® potah

Údržba pěny:

(Neponořujte do vody)

Čištění potahu:

95 °C

INDIKACE

P951D / Zádová opěrka opěrky a terapeutické kombi balíčky lze použít pro:

- 1- zlepšení polohování na invalidním vozíku.
- 2- zlepšení orientace sedu
- 3- omezení sklouzávání vpřed.
- 4- zmírnění bolestí zad.








Umožňuje přizpůsobení zádové opěrky

většině modelů invalidních vozíků

DOSTUPNÉ VERZE



P951D / zádová opěrka
S potahem POLYMAILLE®.

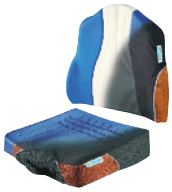

Terapeutické kombi balíčky
(viz str. 46)


OZNAČENÍ	VELIKOST	KÓD POLOŽKY	ROZMĚRY Š x D x V (cm x palce)
P951D / zádová opěrka malá s potahem POLYMAILLE®	Small	P951dS1HW	44 x 39 x 9 cm / 17 x 15 x 3,5''
	Standard	P951d1HW	49 x 44 x 9 cm / 19 x 17 x 3,5''
	large	P951dl1HW	49 x 50 x 10 cm / 19 x 20 x 4''

CE WARRANTY 2

SYST'AM® P951D / ZÁDOVÁ OPĚRKA A TERAPEUTICKÉ KOMBI BALÍČKY

ZÁDOVÁ OPĚRKA SYST'AM® JE SPOLU SE SEDÁKEM PRO PREVENCI DEKUBITŮ:

- Snižuje riziko vzniku dekubitů v sakrální oblasti díky snížení
- Snižuje střižné účinky v sakrálně-hýžďové oblasti díky lepší pánevní podložky.

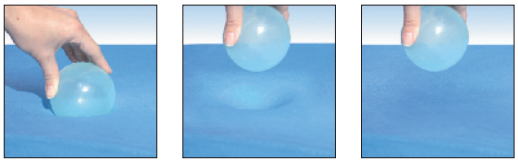

- Vícezónová opěrná plocha umožňuje lepší rozložení tlaků prostřednictvím přenosu tlaku z oblastí s nízkou nosností do oblastí s vysokou nosností:

BÍLÉ OBLASTI:

Oblasti s nízkou nosností (měkká opora) uvolňují oblast páteře od tlakových špiček a podporují správné přizpůsobení zad.

MODRÉ OBLASTI:


Oblasti s vysokou nosností (tužší opora) přenášejí tlak z vysoce rizikových oblastí a zvyšují laterální stabilitu.

CONCEPT MULTIPORTANCE

- Respektuje morfologii zad vycházející
- Respektuje anatomii dolní bederní oblasti, důležitý aspekt postury.

ZLEPŠENÝ KOMFORT


- Boční polstrování chrání axilárně-dorzální oblast před kontaktem s rámem vozíku, který bývá pro uživatele vozíku bolestivý.

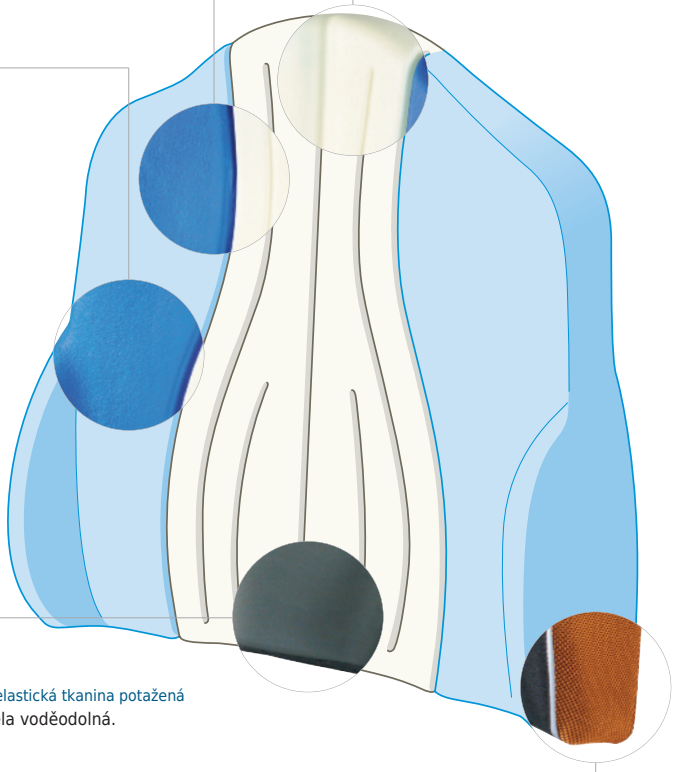


POTAH



- V dorzální oblasti je dvousměrně elastická tkanina potažená polyuretanem, prodyšná a zcela voděodolná.

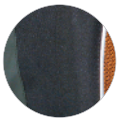


- Elastická potažená tkanina odolává abrazi a zatížení intenzivního každodenního používání.

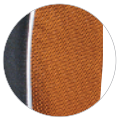


- Vysoce odolná technická tkanina je umístěna v oblastech vystavených větší abrazi.


ZLEPŠENÍ POLOHOVÁNÍ

- Stabilizací pánevní oblasti přispívá k prevenci sklouzávání a rizika
- Boční polštáře snižují laterální nestabilitu, která je u osob se zdravotním postižením častá.

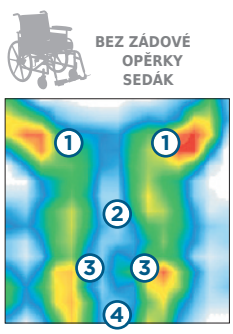




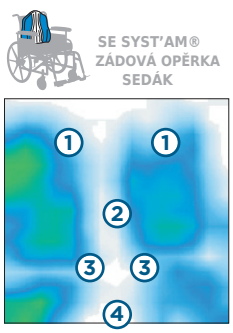

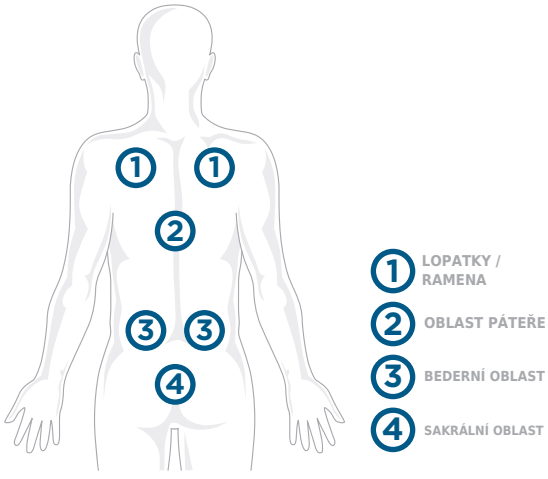


TERAPEUTICKÉ BALÍČKY SYST'AM®

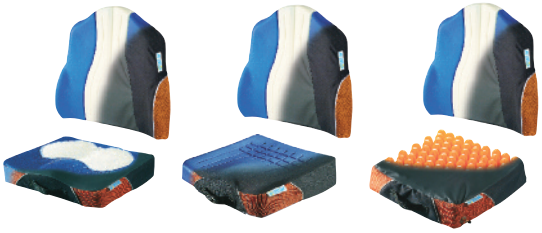


SESTAVTE SI TERAPEUTICKÝ BALÍČEK
SE SEDÁKEM DLE VAŠEHO VÝBĚRU.


1 Zkontrolujte rozměry sedací plochy vašeho vozíku

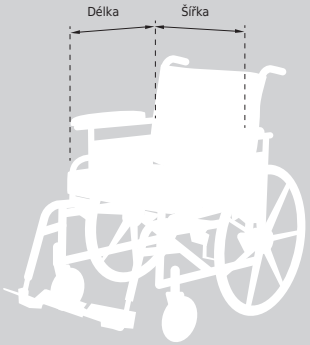

2 Vyberte správný rozměr sedáku

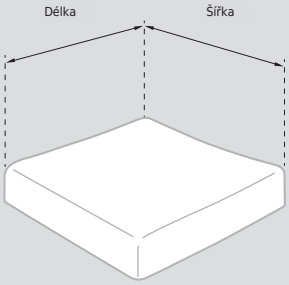


3 Vyberte požadovaný model sedáku ve správném rozměru pomocí následující tabulky

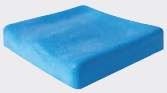


P371C /
sedák z HR pěny




P311C / Gel sedák
DUOGEL®

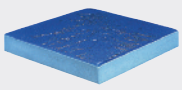

P314C /
POLYFORM® Mixte

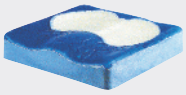


P341C /
DUOFORM®

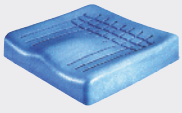

P361C /
VISCOFLEX®



P361CA /
VISCOFLEX®+

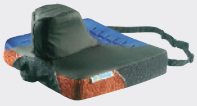

P361CP /
VISCOFLEX®+
s abdukčním klínem



P361CR /
VISCOFLEX® Air



P301C /
POLYAIR® 60



P302C /
POLYAIR® 100

4 Určete velikost zádové opěrky



ZÁDOVÁ OPĚRKA malá
P951DS1HW




ZÁDOVÁ OPĚRKA standardní
P951D1W




ZÁDOVÁ OPĚRKA velká
P951DL1HW


DOPORUČENÍ

- Zvažte větší rozměr do hloubky (+2 / 3 cm) pro použití se zádovou opěrkou.





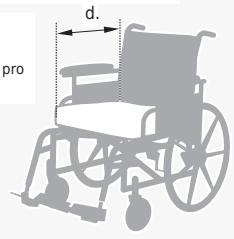


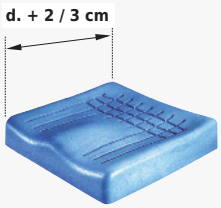

- Zádovou opěrku vždy umístěte na sedák

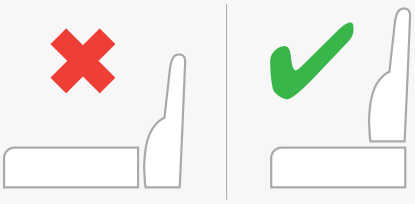

SYST'AM® P951D / ZÁDOVÁ OPĚRKA A TERAPEUTICKÉ KOMBI BALÍČKY

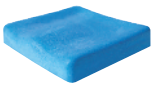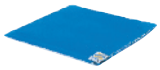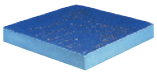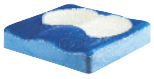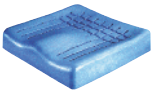ŠÍŘKA INVALIDNÍHO VOZÍKU (cm)	30/32	34/36	38		40 - 42						43/44		45 - 46						48/50			55	60
DOSTUPNÉ ROZMĚRY (cm)	32 x 32 cm	36 x 36 cm	38 x 38 cm	38 x 43 cm	40 x 40 cm	40 x 43 cm	40 x 46 cm	42 x 42 cm	42 x 46 cm	42 x 50 cm	43 x 43 cm	43 x 46 cm	45 x 42 cm	45 x 43 cm	45 x 46 cm	45 x 50 cm	46 x 40 cm	46 x 46 cm	48 x 43 cm	51 x 46 cm	51 x 50 cm	56 x 46 cm	61 x 50 cm
PŘEHLED ROZMĚRŮ SEDÁKŮ																							
 P371C HR-FOAM CUSHION								●					●		●					●			
 P311C SYST'AM GEL / SYST'AM DUOGEL®					●			●					●	●									
 P314C POLYFORM® Mixte					●									●									
 P341C DUOFORM®		●						●	●				●		●					●			
 P361C VISCOFLEX®		●	●		●			●	●				●		●				●	●	●		
 P361CP VISCOFLEX®+ s abdukčním klínem								●					●		●								
 P361CA VISCOFLEX®+	●	●	●	●	●			●	●	●			●		●	●			●	●	●	●	●
 P361CR VISCOFLEX® AIR								●					●		●								
 P301C 1 komora (▯)		●			● ●	●	●				● ●	●					●	● ●		●	●	●	●
 P302C 1 komora (▯)					● ●	●	●				● ●	●					●	● ●		●	●	●	●
KOMPATIBILITA ROZMĚRŮ „SEDÁKY/ZÁDOVÉ OPĚRKY“																							
 P951D **ZÁDOVÁ OPĚRKA** Malá	+	+	+	+																			
 P951D **ZÁDOVÁ OPĚRKA** Standardní		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+								
 P951D **ZÁDOVÁ OPĚRKA** Velká								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

SYST'AM® P961F / HORNÍ KONČETINY
POLOHOVACÍ PODLOŽKA

SYSTÉM POLOHOVÁNÍ HORNÍ KONČETINY Z VISKOELASTICKÉ PĚNY SE ZTUŽUJÍCÍ VLOŽKOU

MATERIÁLY

80 kg/m³



Viskoelastická pěna



Ztužující vložka



Snímatelný POLYMAILLE® potah

Údržba pěny:

(Neponořujte do vody)

Čištění potahu:


95 < 1000 ppm

INDIKACE

Polohovací klín horních končetin P961F do sedu lze použít, pokud:

- U osob s posturálním deficitem v sedu: poškození centrálního nervového systému (cévní mozkové příhody, kraniocerebrální trauma), periferního nervového poškození, ortopedická omezení, vazomotorické poruchy.

SYST'AM PATENTED SYST'AM

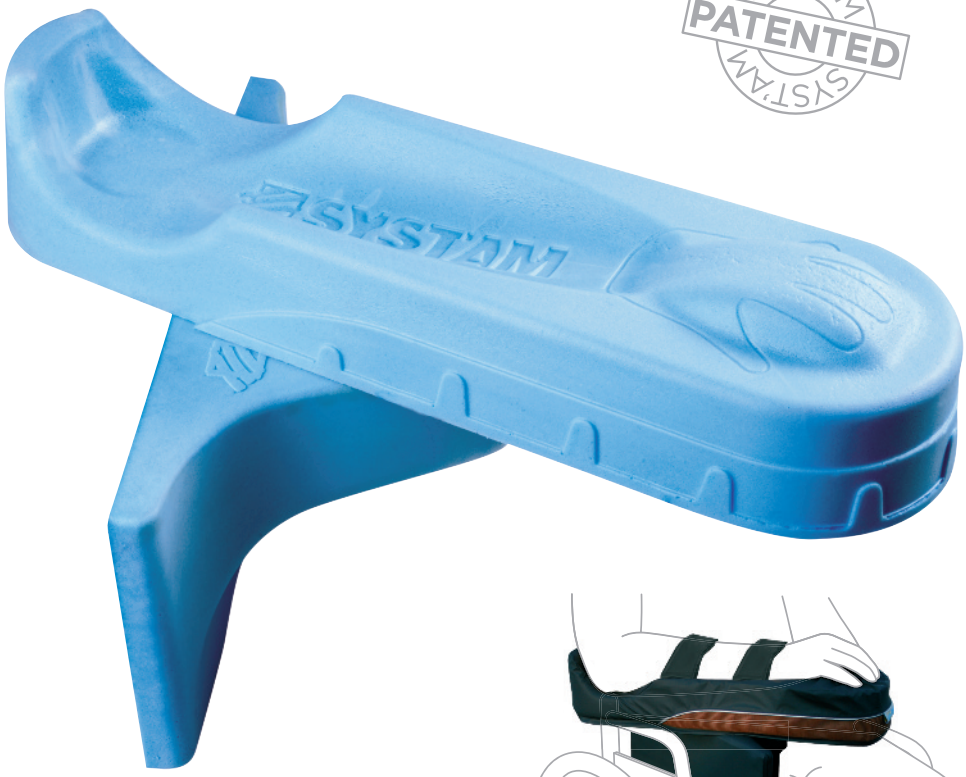



SYST'AM® P961F /HORNÍ KONČETINA
POLOHOVACÍ PODLOŽKA
(s potahem)



DOSTUPNÉ VERZE



Horní končetiny
polohovací klín do sedu

OZNAČENÍ	KÓD POLOŽKY	ROZMĚRY Š x D x V (cm x palce)
P961F / polohování horních končetin klín do sedu	P961F1HW	55 x 18,5 x 26 cm / 21,5 x 7 x 10''

CE WARRANTY 2 ROKY


SYST'AM® P961F / HORNÍ KONČETINY
POLOHOVACÍ PODLOŽKA

NOVÁ KONCEPCE, ZCELA NEZÁVISLÁ

ավení bez nářadí.


- Hmotnost horní končetiny se přenáší přímo na stehno, nikoli na loketní opěrku, což zajišťuje trvalou korekci bez ohledu na polohu a

- Lze použít na všech modelech židlí/vozíků (statické, invalidní vozíky, elektrické, autosedačky, toaletní křesla).

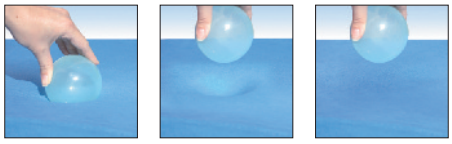

VÁ PĚNA

- Křivky respektující přirozenou morfologickou polohu paže a ruky, zejména přirozený úhel loket/zápěstí.

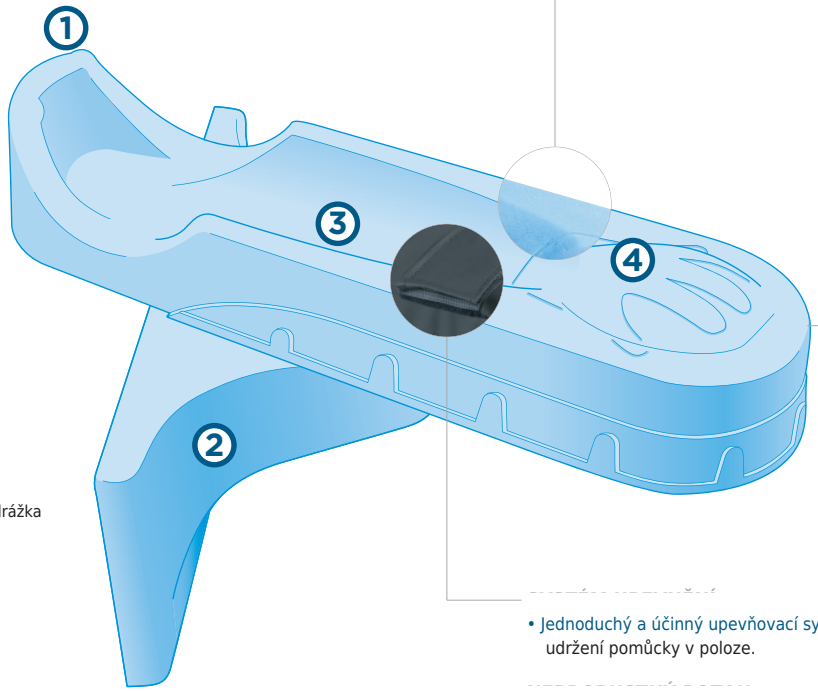


1. Blok: udržuje paži v pomůcce.
2. Opěrný prvek: přizpůsobuje se přirozené křivce stehna.
3. Anatomická drážka: anatomická drážka respektující morfologickou polohu paže.
4. Zóny pro polohování dlaně ruky.

PATENTED SYST'AM

- Jednoduchý a účinný upevňovací systém se suchým zipem pro udržení pomůcky v poloze.


- Vhodné pro inkontinentní pacienty.

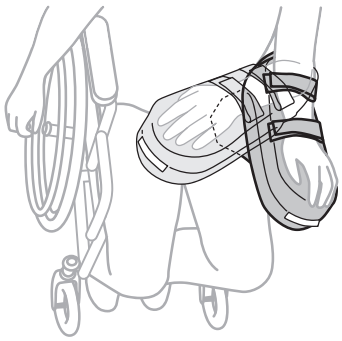


ohybům pacienta.

Přizpůsobení na všechny velikosti a typům morfologie.

- Odlehčení tlaku v oblasti lokte.

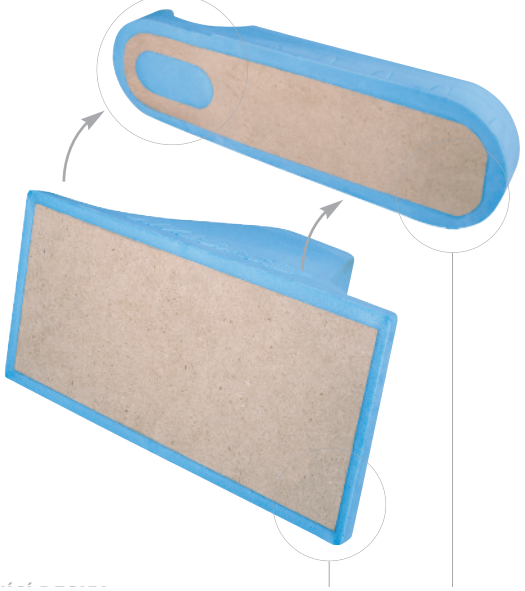

Pravo-levě symetrická pomůcka.

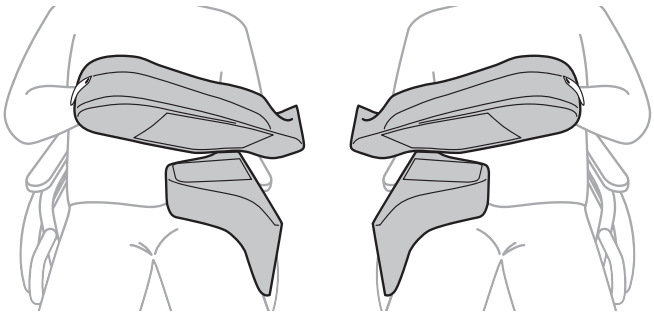

- Na zadní straně obou komponent přispívají k udržení systému na místě a umožňují odlehčení tlaků na stehně.

LEARN MORE

VÝHODY POMŮCKY SYST'AM® PRO POLOHOVÁNÍ HORNÍCH KONČETIN NA VOZÍKU

Horní končetiny významně přispívají ke stabilitě polohy vsedě. U osob s posturálními deficity v sedu je nezbytné zajistit oporu horních končetin. Etiologie může být různá: centrální neurologické postižení (cévní mozkové příhody, kraniální trauma), periferní neurologické postižení, ortopedické nebo vazomotorické poruchy.

1 - POLOHA HORNÍCH KONČETIN U HEMIPLEGICKÝCH PACIENTŮ

Poloha horních končetin u hemiplegických pacientů je častým problémem v léčebných zařízeních. U hemiplegických osob je vysoká prevalence komplikací ramene, zejména bolesti ramene, přítomné v 70 % případů.
Syndrom rameno-ruka zahrnuje omezení ramenního kloubu, vazomotorické poruchy a bolest horní končetiny v klidu i při manipulaci. Svalový deficit vede k neschopnosti podepřít paži a udržet stabilitu glenohumerálního kloubu (hlavice humeru), který je hmotností paže natahován, což vede k subluxaci. Výskyt se dle studií pohybuje mezi 18 % a 80 %. V důsledku této subluxace může být pozorováno také periferní nervové poškození způsobené natažením a kompresí periferních nervů.
Glenohumerální subluxace je tedy do značné míry důsledkem mechanického tahu spojeného se společným působením manipulace s rukou a polohy vsedě. Léčba je proto založena zejména na technikách polohování horní končetiny na invalidním vozíku s cílem snížit riziko subluxace a syndromu rameno-ruka zabráněním napínání kloubního pouzdra. Panuje obecná shoda, že polohovací techniky představují zásadní faktor prevence.
Přehled literatury Turner-Stokes a Jackson ukazuje význam systematické opory horní končetiny, zejména ve fázi chabosti.



2 - POLOHOVÁNÍ HORNÍCH KONČETIN V ORTOPEDII

Nejčastější komplikací zlomenin horních končetin je vznik edému, který může vést k algodystrofii (komplexnímu bolestivému syndromu). K potlačení tohoto edému je nezbytné končetinu podepřít jak vleže na zádech, tak vsedě a podporovat drenáž šikmou polohou. Pomůcka pro polohování horních končetin podporuje drenáž nakloněním předloktí a zmírňuje bolest omezením osteoartikulárního zatížení horní končetiny.

3 - POLOHOVÁNÍ HORNÍCH KONČETIN PŘI POSTURÁLNÍ INSUFICIENCI

Těžká posturální insuficience je způsobena centrálními neurologickými poruchami ovlivňujícími motorické povely a regulaci pohybu (kraniální trauma, svalová slabost, extrapyramidové syndromy). Může se vyskytovat také při polypatologii se ztrátou soběstačnosti v geriatrii. Deficity posturální rovnováhy v sedu jsou pak zhoršovány neschopností udržet horní končetiny na loketních opěrkách.

Polohování horních končetin je důležitým prvkem stabilizace trupu. Stabilizuje lopatkový pletenec ve frontální rovině, a tím přispívá k zarovnání horních segmentů páteře.

4 - VÝHODY POMŮCKY SYST'AM® PRO POLOHOVÁNÍ HORNÍCH KONČETIN V SEDU

Pomůcky pro nastavení polohy paže bývají obvykle volitelným příslušenstvím vozíku s omezenou schopností udržení a regulace postury a s rizikem rozladění při přesunu.
Posturální nestabilita a změny polohy pacienta mohou také vést k obtížím s udržením paže ve volitelné pomůcce vozíku a dokonce k natahování kloubu při sklouzávání vpřed.
Pomůcka SYST'AM® pro polohování horních končetin u pacientů vsedě zlepšuje dodržení postury díky inovativní koncepci zcela nezávislé na invalidním vozíku, čímž usnadňuje přizpůsobení pohybům pacienta, snazší přesun a nastavení bez nářadí
Hmotnost horní končetiny se přenáší přímo na stehno místo na loketní opěrku, čímž zajišťuje trvalou korekci bez ohledu na polohu pacienta nebo jeho mobilitu.
Pomůcka SYST'AM® pro polohování horních končetin u pacientů vsedě je kompatibilní se všemi modely sedacích pomůcek (statické židle, invalidní vozíky, elektrické vozíky, autosedačky, toaletní křesla, atd.).

POTAHY K INVALIDNÍMU VOZÍKU



POLYMAILLE®

esterovém úpletu
6 stran

í péči i zdravotnická zařízení

timikrobiální, protiplísňové

Vysoce prodyšné (materiál odpuzující tekutiny a propustný pro vodní páru), vhodné při inkontinenci. Snižuje účinky macerace usnadněním

P311C)

Integrované madlo



POLYMAILLE® *HD*

amidovém úpletu

ivní péči a zdravotnická zařízení

timikrobiální, protiplísňové

Vysoce prodyšné (materiál odpuzující tekutiny a propustný pro vodní páru), vhodné při inkontinenci. Snižuje účinky macerace usnadněním

311C)

Se sítotiskem

	TYP OCHRANY	
	 POLYMAILLE®	 POLYMAILLE® *HD*
Složení	Polyuretanový povlak na polyesterovém úpletu	Polyuretanový povlak na polyamidovém úpletu s tištěnými pokyny
Verze	Celistvý potah	Celistvý potah
VLASTNOSTI MATERIÁLU		
Hypoalergenní	✔	✔
Antibakteriální	✔	✔
Antimikrobiální	✔	✔
Protiplísňový	✔	✔
Dvousměrná elasticita	+	++
Prodyšnost	++	++
KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI (pouze sedáky)		
Typ zpracování	Šití	Svařované švy
Protiskluzová spodní strana	✔	
Otevírání	3 strany (kromě P311C: spodní plocha)	2 strany
Integrované madlo	✔	
Sítotisk		Tištěné pokyny pro praní a dezinfekci
ÚDRŽBA A DEZINFEKCE		
Praní	95 < 1000 ppm	95 < 1000 ppm
Dezinfekce	Dezinfikujte sprejovými přípravky aplikovanými za studena (kvartérní amoniové sloučeniny - glutaraldehydy...)	

NÁHRADNÍ POTAHY K INVALIDNÍMU VOZÍKU

OZNAČENÍ	KÓD POLOŽKY POLYMAILLE®	KÓD POLOŽKY POLYMAILLE®*HD*	ROZMĚRY
Potah pro SYST'AM® P311C / Gel nebo P311C-D / SYST'AM® DUOGEL®	P511PA4040W	P511PA4040F	40 x 40 x 2,5 cm
	P511PA4543W	P511PA4543F	45 x 43 x 2,5 cm
Potah pro SYST'AM® P313C / Gel se snímatelnou středovou vložkou	P513PA4040W		40 x 40 x 2,5 cm
Potah pro sedák SYST'AM® P314C / MIXTE	P514PA4040W	P514PA4040F	40 x 40 x 6 cm
	P514PA4543W	P514PA4543F	45 x 43 x 6 cm
Potah pro SYST'AM® P341C / DUOFORM® nebo sedák SYST'AM® P371C / HR-Foam	P541PA3636W		36 x 36 x 8 cm
	P541PA4242W	P541PA4242F	42 x 42 x 8 cm
	P541PA4246W		42 x 46 x 8 cm
	P541PA4542W	P541PA4542F	45 x 42 x 8 cm
	P541PA4546W	P541PA4546F	45 x 46 x 8 cm
	P541PA5146W	P541PA5146F	51 x 46 x 8 cm
	P541PA5150W		51 x 50 x 8 cm
Potah pro SYST'AM® P361C / VISCOFLEX®	P541PA3636W		36 x 36 x 8 cm
	P541PA3838W		38 x 38 x 8 cm
	P541PA4040W		40 x 40 x 8 cm
	P541PA4242W		42 x 42 x 8 cm
	P541PA4246W		42 x 46 x 8 cm
	P541PA4542W		45 x 42 x 8 cm
	P541PA4546W		45 x 46 x 8 cm
	P541PA4843W		48 x 43 x 8 cm
	P541PA5146W		51 x 46 x 8 cm
	P541PA5150W		51 x 50 x 8 cm
Potah pro SYST'AM® P361CA / VISCOFLEX®+	P541PA3232W		32 x 32 x 8 cm
	P541PA3636W		36 x 36 x 8 cm
	P541PA3838W		38 x 38 x 8 cm
	P541PA3843W		38 x 43 x 8 cm
	P541PA4040W	P541PA4040F	40 x 40 x 8 cm
	P541PA4242W	P541PA4242F	42 x 42 x 8 cm
	P541PA4246W		42 x 46 x 8 cm
	P541PA4250W		42 x 50 x 8 cm
	P541PA4542W	P541PA4542F	45 x 42 x 8 cm
	P541PA4546W	P541PA4546F	45 x 46 x 8 cm
	P541PA4550W		45 x 50 x 8 cm
	P541PA4843W	P541PA4843F	48 x 43 x 8 cm
	P541PA5146W	P541PA5146F	51 x 46 x 8 cm
	P541PA5150W	P541PA5150F	51 x 50 x 8 cm
Potah pro SYST'AM® P361CA / VISCOFLEX®+ Bariatric	P541PA5646W	P541PA5646F	56 x 46 x 10 cm
	P541PA6150W		61 x 50 x 10 cm
Potah pro SYST'AM® P361CP / VISCOFLEX®+ s klínem	P541PAP4242W		42 x 42 x 8 cm
	P541PAP4542W		45 x 42 x 8 cm
	P541PAP4546W		45 x 46 x 8 cm

POTAHY K INVALIDNÍMU VOZÍKU

OZNAČENÍ		KÓD POLOŽKY POLYMAILLE®	KÓD POLOŽKY POLYMAILLE®*HD*	ROZMĚRY
Potah pro SYST'AM® P361CR / VISCOFLEX® Air		P502PA4343W	P502PA4343F	43 x 43 x 9,5 cm
		P502PA4643W	P502PA4643F	46 x 4 x 9,5 cm
		P502PA4646W	P502PA4646F	46 x 46 x 9,5 cm
Potah pro SYST'AM® P301C / POLYAIR® 60		P501PA3636W		36 x 36 x 6 cm
		P501PA4040W		40 x 40 x 6 cm
		P501PA4043W		40 x 43 x 6 cm
		P501PA4046W		40 x 46 x 6 cm
		P501PA4343W		43 x 43 x 6 cm
		P501PA4346W		43 x 46 x 6 cm
		P501PA4640W		46 x 40 x 6 cm
		P501PA4646W		46 x 46 x 6 cm
		P501PA5146W		51 x 46 x 6 cm
		P501PA5150W		51 x 50 x 6 cm
		P501PA5646W		56 x 46 x 6 cm
		P501PA6150W		61 x 50 x 6 cm
Potah pro SYST'AM® P302C / POLYAIR® 100		P502PA4040W		40 x 40 x 10 cm
		P502PA4043W		40 x 43 x 10 cm
		P502PA4046W		40 x 46 x 10 cm
		P502PA4343W		43 x 43 x 10 cm
		P502PA4346W		43 x 46 x 10 cm
		P502PA4640W		46 x 40 x 10 cm
		P502PA4646W		46 x 46 x 10 cm
		P502PA5146W		51 x 46 x 10 cm
		P502PA5150W		51 x 50 x 10 cm
		P502PA5646W		56 x 46 x 10 cm
		P502PA6150W		61 x 50 x 10 cm
Potah pro SYST'AM® P951D / zádovou opěrku	Malá	P951SHW		44 x 39 x 9 cm
	Standardní	P951HW		49 x 44 x 9 cm
	Velká	P951LHW		49 x 50 x 10 cm
Potah pro SYST'AM® P961F / horní končetiny **POLOHOVACÍ KLÍN DO SEDU**		P961HW		