DMA
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

MD

NÁVOD K POUŽITÍ

ČTYŘKOLOVÁ CHODÍTKA

103, 249 A

Katalogové číslo:
103 S, 103 Š,103 M, 249 A, 249 AS, 249 AŠ





CE

UM.2023.06 | REV.2024.12

ZHONGSHAN A&J MEDICAL EQUIPMENT Co., Ltd., 3 Shenghui South Road, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong, 528427 China

EC REP **SUNGO EUROPE B.V.**, Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den Ijssel, Netherlands

DMA PRAHA s. r. o., Krajanská 339, 149 00 Praha 4, Česká republika

POUŽITÍ

Chodítko je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Je vhodné též pro transport drobných předmětů.

INDIKACE

Uživatel by měl být schopen s podporou chodítka samostatného stoje a chůze, mít nezbytné fyzické, vizuální a kognitivní dovednosti pro jeho používání.

KONTRAINDIKACE

Uživatel by neměl mít poruchu vnímání, závažnou ztrátu rovnováhy nebo svalové síly a úrazy, dysfunkce, paralýzu, kontraktury nebo poškození kloubů na horních končetinách.
Chodítko nedoporučujeme používat uživatelům, kteří trpí závažnými psychomotorickými nebo motorickými koordinačními patologiemi, stařeckou demencí, mentálním omezením nebo slabozrakostí a slepotou. V těchto případech je vždy nutné chodítko používat pouze s dopomocí a za přítomnosti odborné asistence!

⚠ POZOR

V případě alergických reakcí, zarudnutí kůže, popř. vzniku otlaků během používání chodítka neprodleně vyhledejte lékaře. Z tohoto důvodu doporučujeme chodítko vždy používat pouze v oděvu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.
Vždy je potřeba zohlednit fyzické i psychické schopnosti uživatele a jeho individuální potřeby.
Pro co nejbezpečnější používání chodítka vždy upravte prostředí, kde jej budete používat.
Chodítko by mělo být nejprve odborně zaměřeno a při předání uživateli individuálně nastaveno.
Před prvním použitím chodítka si pečlivě pročtěte tento návod a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele. Pokud z důvodu zrakového omezení si není možné návod přečíst, vyžádejte si elektronickou verzi k přečtení softwarovou aplikací nebo osobní instruktáž.
Chodítko používejte vždy jen v souladu s návodem k použití. Za následky způsobené používáním v rozporu s tímto návodem nenese dodavatel žádnou zodpovědnost.
Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.
Nepřekračujte maximální statickou nosnost chodítka 120 kg (viz výrobní štítek na produktu).
Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 100 kg.
Při užívání chodítka musí být vždy všechna čtyři kolečka v kontaktu s podkladem.
Při chůzi s chodítkem vždy použijte vhodnou obuv s pevnou patou.
S chodítkem neprojíždějte měkký terén (tráva, písek, bahno…).
Chodítko nevystavujte škodlivým vlivům okolního prostředí (přímé sluneční záření, slaná voda…).
Nečistoty jako písek, vlasy, chlupy apod. v pohyblivých dílech mohou znemožnit jejich funkci.
Při vstávání, opírání nebo posazování se na chodítko vždy zaaretujte brzdy.
Při chůzi s chodítkem mějte ruce vždy připravené na pákách brzd.
Při užívání chodítka musí být všechny kola v kontaktu s podkladem.
Při transportu (automobilem, autobusem, vlakem apod.) nepoužívejte chodítko k sezení.
Chodítko není určeno pro transport a převoz sedících uživatelů.

POUŽITÉ SYMBOLY

Identifikační a výstražné štítky na chodítku musí zůstat čitelné a nesmí být odstraněny. V případě nečitelnosti, mechanického opotřebení nebo chybějících štítků ihned kontaktujte dodavatele.



Zdravotnický prostředek
Označuje, že daný prostředek je zdravotnický prostředek.



Evropská shoda
Označením CE na produktu výrobce prohlašuje, že produkt odpovídá základním požadavkům evropské legislativy na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Tento výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2017/745 (MDR).



Katalogové číslo
Označuje katalogové číslo výrobce, aby bylo možné zdravotnický prostředek identifikovat.



Sériové číslo
Označuje sériové číslo výrobce, aby bylo možné konkrétní zdravotnický prostředek identifikovat.



Čárový kód
Unikátní jednotná mezinárodní číselná identifikace produktu.



Viz návod k použití
Označuje, že je nutné, aby uživatel nahlédl do návodu k použití.



Upozornění
Označuje, že je nutné, aby uživatel nahlédl do návodu k použití, kde jsou uvedeny důležité výstražné informace, jako jsou varování a upozornění, která z různých důvodů není možné uvádět na vlastním zdravotnickém prostředku.



Maximální nosnost
Označuje maximální nosnost uživatele pro bezpečné používání zdravotnického prostředku.



Datum výroby
Označuje, kdy byl zdravotnický prostředek vyroben.



Výrobce
Označuje výrobce zdravotnických prostředků, jak je definován nařízeními EU 90/385/EHS, 93/42/EHS a 98/79/ES.



Zplnomocněný zástupce v EU
Označuje zplnomocněného zástupce v Evropském společenství.



Dovozce
Označuje subjekt, který zdravotnický prostředek dováží.



Distributor
Označuje subjekt, který zdravotnický prostředek distribuuje.



Přeškrtnutá popelnice
Produkt nesmí být vytříděn ani do kontejnerů na tříděný odpad, ani do komunálního odpadu, a je nutné ho odevzdat k ekologické likvidaci v rámci obce nebo dodavateli.

POPIS

Skládací rám chodítka je vyroben z odlehčených, povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn čtyřmi plnými kolečky, z nichž přední dvě mají uložení v otočné vidlici a pohodlnými ergonomickými výškově nastavitelnými rukojeťmi. Chodítko je vybaveno bovdenovými brzdami s možností aretace, sedátkem, zádovou opěrkou, nákupní taškou a aretační pojistkou při složení.

POZOR

Obrázky uvedené v návodu slouží pouze k upřesnění pokynů a mohou se od dodávaného výrobku lišit.

VYBALENÍ CHODÍTKA UVEDENÍ DO PROVOZU

Všechna chodítka jsou výrobcem pečlivě kontrolována a zabalena pro dodání uživateli. Před tím, než chodítko rozbalíte se ujistěte, že krabice není poškozena. Po vybalení chodítka z krabice zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. rám chodítka s madly, 4 kolečka, bovdenové brzdy, nákupní tašku, sedátko, opěrku zad a 2 šrouby s maticí s plastovou krytkou k zajištění nastavení výšky madel, včetně uživatelské příručky pro bezpečné používání chodítka. Po důkladné kontrole chodítka ho autorizovaný odborník dodavatele nastaví pro konkrétního uživatele, předá mu pokyny ohledně důležitých upozornění bezpečného provozu v souladu s tímto návodem a ujistí se, že uživatel těmto pokynům rozumí.

POZOR

Obalový materiál a další různé ochranné části musí být ekologicky zlikvidovány!

SLOŽENÍ A NASTAVENÍ CHODÍTKA

Rám chodítka vyjměte z krabice a roztažením přední a zadní části od sebe rám rozložte. Zasuňte vidlici s kolečkem do otvorů (**A**), až „V" pojistka (**B**) zaklapne. Vidlici navíc zajistěte zasunutím a aretací „E" pojistky (**C**). U modelu 249 A použijte místo „E" pojistek šrouby s plastovou maticí (**D**). Tento postup opakujte u všech čtyř vidlic s kolečky. Přiložená madla zasuňte do otvorů (**E**), nastavte požadovanou výšku madel a zvolenou pozici upevněte pomocí šroubu a matice s umělohmotnou rukojetí (**1**). Šrouby pečlivě dotáhněte. Bovdenová lanka by měla vést zevně rámu i madel. Opěrku zad zasuňte do otvorů (**F**) zmáčknutím pojistek (**2**). Nyní je chodítko připraveno k použití.


Zkontrolujte, zda jste obě madla nastavili do stejné výšky. Madla by měla být nastavena tak, aby při vzpřímeném stoji uživatele, byla zachována mírná fyziologická flexe v loketním kloubu, tj. stav, když se horní končetiny přirozeně uvolní: Loket by neměl být úplně propnutý ani příliš pokrčení. Nemělo by docházet k hrbení ani přílišnému vytažení ramen a lopatek.

POZOR

Optimální nastavení výšky madel vždy konzultujte s vaším ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

TRANSPORTNÍ A SKLADOVACÍ POLOHA


Při skládání chodítka nadzdvihněte sedátko a tahem nahoru za madlo (**G)** umístěném na dně tašky a rám složte.

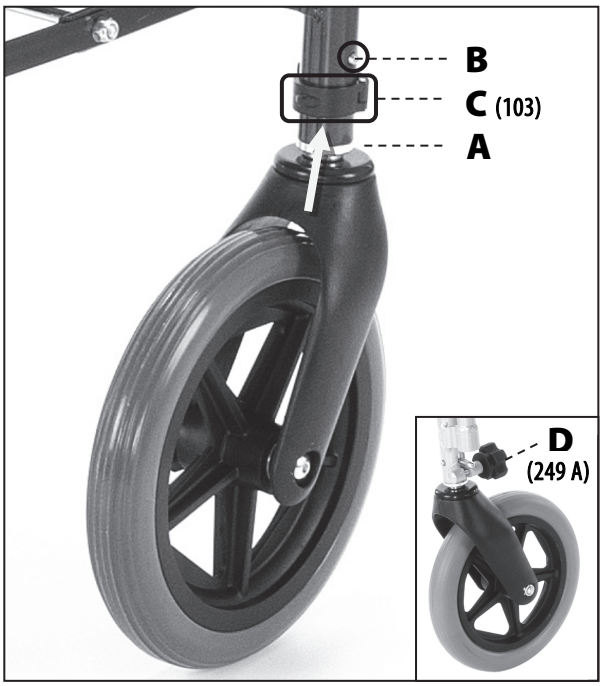


Instalace vidlic s kolečky.



Instalace madel a opěrky zad

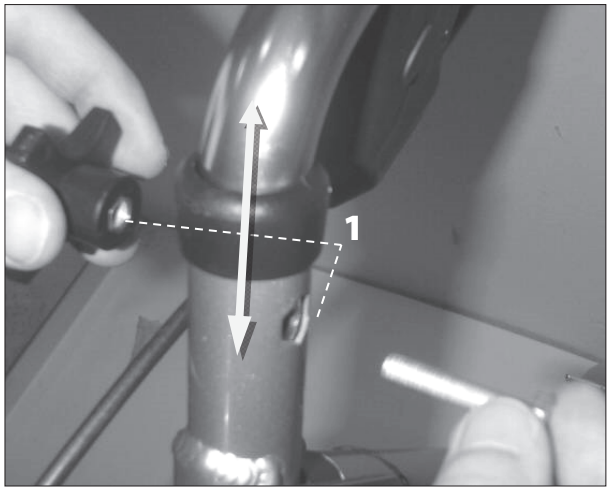

Nastavení výšky madel.

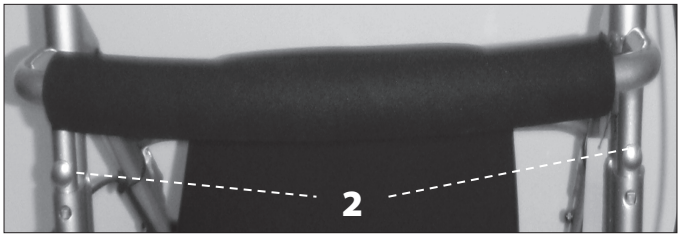

Pojistky zádové opěrky



Madlo uvnitř tašky



Složené chodítko

ÚDRŽBA A SERVIS

Polstrování chodítka je možné čistit a udržovat běžnými čistícími a dezinfekčními, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Čistěte vždy celou plochu, kterou po odstranění nečistot důkladně opláchněte čistou vodou. Všechny kovové díly udržujte suché a čisté. Doporučujeme je občas přeleštit vhodným leštícím prostředkem. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, stav koleček a pro plynulé a bezhlučné ovládání bovdenových brzd pravidelně promazávat ovládací lanka a odstraňovat mechanické nečistoty všech částí. K opravě je nutné použít pouze originální náhradní díly. V opačném případě zaniká jakákoliv záruka a dodavatel se zříká veškeré zodpovědnosti v případě nehody nebo zranění. Je-li potřeba důkladnější kontrola technického stavu nebo oprava, vždy kontaktujte pouze autorizované servisní středisko, které Vám poskytne veškeré informace a servis. Chodítko skladujte v suchém a čistém prostředí, chraňte před prachem, vlhkostí a chemickými vlivy.

LIKVIDACE

Ekologická likvidace chodítka se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení. Informace o místních firmách zabývajících se likvidací odpadů získáte na místním městském nebo obecním úřadě. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na dodavatele.

