DMA
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

NÁVOD K POUŽITÍ

ČTYŘKOLOVÉ CHODÍTKO

109 WT



CE

a Distributor pro Českou republiku:
DMA PRAHA s. r. o.
U Dálnice 207, 251 63 Kunice

e info@dmapraha.cz
w www.dmapraha.cz

t +420 323 610 610

ELBUR VERTRIEBS GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany

V5.2020.06

POUŽITÍ

Chodítko je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility, a to především v interiérech. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Je vhodné též pro transport drobných předmětů.

POPIS

Skládací rám chodítka je vyroben z odlehčených, povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn čtyřmi plnými kolečky, z nichž přední dvě mají uložení v otočné vidlici a pohodlnou ergonomickou výškově nastavitelnou rukojetí. Chodítko je vybaveno bovdenovými brzdami s možností aretace, úložným síťovým košíkem, táckem s vyvýšenými okraji a otvorem pro pití.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.
Před prvním použití si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Vašeho dodavatele.
Chodítko nepřetěžujte a nepřekračujte jeho maximální statickou nosnost 120 kg.
Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 100 kg.
Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.
Při vstávání, opírání nebo posazování na chodítko vždy zaaretujte brzdy.
Při chůzi s chodítkem mějte ruce vždy připravené na pákách brzd.
Při užívání chodítka musí být všechny kola v kontaktu s podkladem.
Při transportu (automobilem, autobusem, vlakem apod.) nepoužívejte chodítko k sezení.
Chodítko není určeno pro transport a převoz sedících uživatelů.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. chodítko s madly, nákupní košík a opěrku zad. Zkontrolujte všechny součásti chodítka, jestli nebyly poškozeny během dopravy. V případě poškození chodítka, chodítko nepoužívejte a kontaktujte dodavatele.

SLOŽENÍ A ROZLOŽENÍ CHODÍTKA

Z důvodu zjednodušení je chodítko zobrazeno bez nákupní tašky.



obr. 1



obr.2

ROZLOŽENÍ

Vyjměte chodítko z kartonové krabice a postavte jej na rovný podklad. Jednou rukou uchopte opěrné madlo chodítka a druhou rukou uchopte přední hranu podnosu chodítka a vyklopte podnos směrem vzhůru obr. 1. Podnos je v horní poloze zajištěn zacvaknutím pojistky.

Rozevřete přední kolečka chodítka. Jednou rukou uchopte opěrné madlo chodítka a druhou rukou uchopte přední hranu podnosu chodítka a zatlačte směrem dolů obr. 2. Chodítko je rozloženo zacvaknutím pojistky.


SLOŽENÍ

Uchopte madlo pojistky podnosu a zatlačte madlo směrem dozadu obr. 3, pojistka podnosu se uvolní a je možné sklopit podnos.

Jednou rukou uchopte opěrné madlo chodítka a naklopte chodítko směrem k sobě, tak aby se zvedla přední kolečka. Druhou rukou zatlačte madlo pojistky složení a zatlačte madlo směrem vzhůru obr. 3, pojistka složení chodítka se uvolní a chodítko lze následně složit.



obr. 3

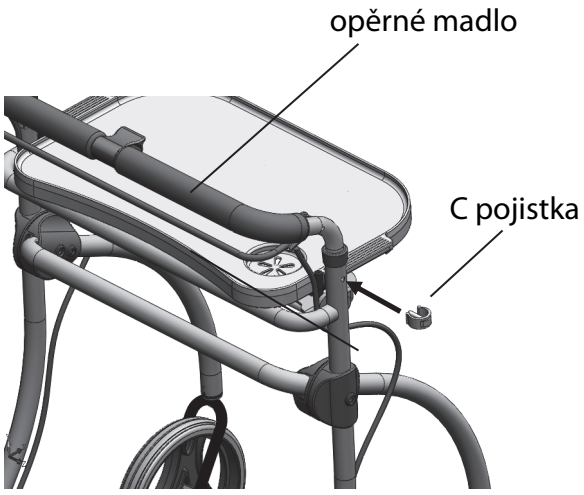


obr. 4

NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRNÉHO MADLA


Na obou stranách chodítka vysuňte C aretační pojistku, nastavte požadovanou výšku opěrného madla obr. 4 a zasuňte C aretační pojistky zpět.

ZABRŽDĚNÍ CHODÍTKA

Chodítko zabrzdíte přitlačením madla brzdy směrem vzhůru k opěrnému madlu obr. 5. Brzdu zaaretujete v zabrzděné poloze otočením červené pojistky pod madlo brzdy. Brzda je zaaretována zacvaknutím pojistky.

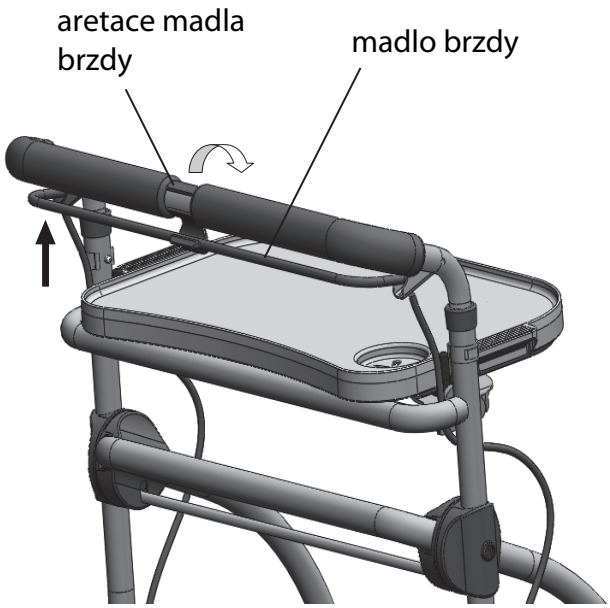

obr. 5

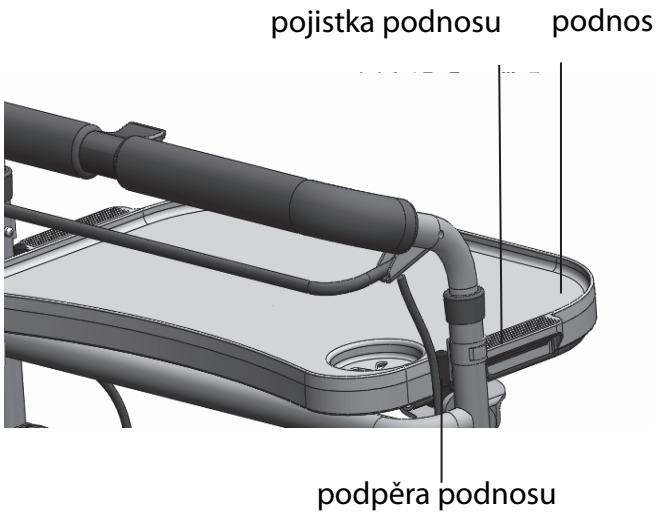

obr. 6

POUŽÍVÁNÍ PODNOSU

Ujistěte se, že je podnos správně nainstalován na chodítku. V případě, že podnos není pevně upevněn na chodítku, uchopte podnos za úchyty umístěné po stranách podnosu a zasuňte podnos do pojistek Obrázek 6. Podnos je správně nainstalován cvaknutím pojistek podnosu.

ÚDRŽBA

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Košík omývejte jen mýdlovou vodou. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, stav koleček a pro plynulé a bezhlučné ovládání bovdenových brzd pravidelně promazat ovládací lanka, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.